



Etac Swift Mobil-2

Chaises de douche et de toilettes

 **etac**[®]
Creating Possibilities



Présentation de la gamme Swift Mobil-2

Les chaises de douche et de toilettes Etac Swift Mobil-2 sont faciles à manœuvrer et simplifient les transferts de patients ainsi que le transport vers et depuis la salle de bain. Elles sont conçues pour faciliter la vie des personnes qui les utilisent. En écoutant les demandes des soignants et utilisateurs, nous comprenons l'importance de l'accessibilité, l'adaptabilité, la dignité et le confort.



Facilite l'accès

La majorité des soignants affirment que le manque d'accessibilité est un défi lors des soins personnels quotidiens et qu'il impose souvent des positions de travail difficiles. La chaise Swift Mobil-2 dispose d'une ouverture arrière et d'un espace large des deux côtés. Cet ajustement aide à rendre les routines d'hygiène intime plus rapides et plus dignes.

Flexibilité et confort du produit

Tous les modèles Swift Mobil-2 supportent un poids maximum de 160 kg et peuvent être facilement adaptés aux besoins des différents utilisateurs. Les chaises sont réglables de plusieurs façons et sont dotées d'une vaste gamme d'accessoires pour améliorer le confort et la stabilité. Quelques petits ajustements peuvent faire une grande différence pour la sécurité et le bien-être de l'utilisateur et les conditions de travail du soignant.

Découvrez les avantages

Une gamme de chaises de douche mobiles, fonctionnelles et flexibles, conçues pour faciliter la toilette intime pour le soignant et l'utilisateur. La chaise Swift Mobil-2 est disponible en trois modèles différents : une chaise de toilettes et de douche standard, un modèle doté d'une fonction d'inclinaison et un modèle autopropulsé avec des roues 24".

Repose-tête réglable multi-positions

Conçu pour offrir un maximum de confort et de flexibilité et peut être ajusté pour s'adapter à une variété de besoins de l'utilisateur.

Dossier confortable

Réglable et à séchage rapide. Tenue et positionnement stables avec deux fixations autour de la barre de poussée.

Accessibilité pratique

Siège avec ouverture à l'arrière, découpe à l'avant et espace libre des deux côtés.

Hauteur réglable

Facile à régler à différentes hauteurs d'assise fixes, sans l'aide d'outils.



Etac Swift Mobil-2



Etac Swift Mobil 24"-2

Accoudoirs flexibles

Réglables en hauteur et largeur.

« Etac Easy-Clean »

Une surface unique, spécialement développée par Etac, offrant un équilibre parfait entre confort et propreté, surface antidérapante et hygiène !

Repose-pieds ergonomiques

Les repose-pieds légèrement incurvés offrent un soutien de la voûte plantaire, assurant confort, stabilité et détente.



Etac Swift Mobil Tilt-2



Etac Swift Mobil-2

La chaise Swift Mobil-2 est une chaise de douche flexible qui donne aux soignants le meilleur accès possible pour les soins personnels. Elle est facile à manœuvrer et peut être adaptée aux différents besoins de l'utilisateur.

Siège unique

Le siège est doté d'une ouverture à l'arrière, ce qui permet au soignant d'y accéder facilement lorsqu'il assiste l'utilisateur dans ses soins personnels. De plus, le grain unique « Etac Easy Clean » sur la surface d'assise est conçue spécialement par Etac pour offrir l'équilibre parfait entre confort, propreté et propriété anti-dérapante.

Soulagement et confort

Pour les utilisateurs sensibles, des coussins de siège ultra-souples sont disponibles, offrant à la fois soutien et confort. Le dossier souple à séchage rapide et les repose-pieds incurvés de la chaise Swift Mobil-2 augmentent encore le confort de l'utilisateur.

Hautement adaptable

La chaise Swift Mobil-2 supporte un poids maximum de 160 kg en standard et est réglable en hauteur entre 45 et 60 cm. Les accoudoirs sont réglables en hauteur et en largeur, de 6 cm dans chaque direction. Les repose-pieds escamotables sont réglables en hauteur et sont également disponibles dans une version plus courte, par exemple lorsque des sièges souples plus hauts sont utilisés.

Etac Swift Mobil-2 XL

Une configuration avec un cadre de dossier plus large est disponible pour les utilisateurs de plus grande taille, offrant une distance supplémentaire de 6 cm entre les accoudoirs.



Le cadre de dossier XL est également disponible comme accessoire.

Etac Swift Mobil-2

Référence

Swift Mobil-2, semi-montée	80229400
Swift Mobil-2, montée	80229401
Swift Mobil-2 avec support pour seau	80229404
Swift Mobil-2 avec support pour bassin	80229406
Swift Mobil-2 XL, semi-montée avec dossier XL	80229467

Standard : dossier, assise, accoudoirs, repose-pieds et 4 roulettes verrouillables

Poids

16,6 kg

Dimensions

Largeur totale : 57/58/64 cm
Distance entre les accoudoirs : 42/48/54 cm

Matériaux

Châssis : acier laqué époxy
Siège/accoudoirs : polypropylène
Dossier : polyester/Velcro
Repose-pieds : polypropylène
Roulettes : polyamide/TPE, verrouillables, à roulement à billes



Nettoyez/désinfectez le produit à l'aide d'un produit nettoyant non abrasif standard avec un pH compris entre 5 et 9, ou avec une solution désinfectante à 70 %.

Le produit peut être nettoyé en toute sécurité dans un laveur-désinfecteur à 85 °C pendant 3 minutes.

Poids max. utilisateur : 160 kg

Caractéristiques



Siège avec ouverture arrière

Il assure l'accessibilité au soignant et le confort à l'utilisateur. La surface unique, spécialement développée par Etac, offre l'équilibre parfait entre frottement et propreté, propriété antidérapante et hygiène !



Dossier réglable

S'ajuste facilement pour offrir une meilleure posture, s'adapter à la forme du corps et garantir un confort maximum. Équipé de deux fixations autour des barres de poussée. Matériau souple lavable et séchage rapide.



Accoudoirs réglables en standard

Facilement adaptables aux différents besoins des utilisateurs. Réglables en hauteur et en largeur, de +/- 6 cm dans chaque direction.



Repose-pieds ergonomiques

Les repose-pieds incurvés offrent un soutien de la voûte plantaire, assurant confort, stabilité et détente.





Etac Swift Mobil Tilt-2

La chaise Swift Mobil Tilt-2 est conçue pour répondre aux besoins des soignants et des utilisateurs. Elle permet de faire face à la multitude de défis auxquels font face les soignants dans leur travail quotidien et offre le confort et la sécurité dont les utilisateurs ont besoin pour se sentir en confiance.

Fonction exclusive de basculement

La chaise Swift Mobil Tilt-2 est dotée d'une fonction exclusive de basculement qui offre une sécurité accrue à l'utilisateur et une position de travail ergonomique pour le soignant. La fonction de basculement de +5° à -35° peut être commandée des deux côtés de la chaise. Cela permet au soignant de rassurer le patient lors du basculement.

Accessibilité et confort

L'excellente accessibilité autour du siège facilite les soins personnels pour le soignant et préserve la dignité du patient. Pour les utilisateurs sensibles, des coussins de siège ultra-souples sont disponibles. Le dossier souple à séchage rapide et les repose-pieds incurvés de la chaise Swift Mobil-2 procurent un meilleur confort.

Convient à de nombreux utilisateurs

La chaise de douche et de toilette s'adapte à de nombreux besoins et tailles d'utilisateurs. Elle supporte un poids maximum de 160 kg en standard et l'assise se règle en hauteur (de 45 à 60 cm). Les accoudoirs sont réglables en hauteur et en largeur et les repose-pieds réglables en hauteur et escamotables sont également disponibles en version plus courte.



Etac Swift Mobil Tilt-2

Référence

Swift Mobil Tilt-2, montée	80229410
Swift Mobil Tilt-2, avec support pour seau	80229411
Swift Mobil Tilt-2, avec support pour bassin	80229412
Swift Mobil Tilt-2, avec support pour bassin et bassin	80229415

Standard : repose-tête, dossier, assise, accoudoirs, repose-pieds et 4 roulettes verrouillables

Poids

20,4 kg

Dimensions

Largeur totale : 57/56/64 cm

Distance entre les accoudoirs : 42/48/54 cm

Matériaux

Châssis : acier laqué époxy

Siège/accoudoir : polypropylène

Dossier : polyester/Velcro

Repose-pieds : polypropylène

Roulettes : polyamide/TPE, verrouillables, à roulement à billes



Nettoyez/désinfectez le produit à l'aide d'un produit nettoyant non abrasif standard avec un pH compris entre 5 et 9, ou avec une solution désinfectante à 70 %.

Le produit peut être nettoyé en toute sécurité dans un laveur-désinfecteur à 85 °C pendant 3 minutes.

Poids max. utilisateur : 160 kg

Caractéristiques



Siège avec ouverture arrière

Pour assurer l'accessibilité au soignant et le confort de l'utilisateur. La surface unique, spécialement développée par Etac, offre l'équilibre parfait entre frottement et propreté, propriété antidérapante et hygiène !



Fonction de basculement unique et sûre

Peut être actionnée des deux côtés de la chaise, ce qui permet une bonne position de travail pour le soignant et rassure l'utilisateur pendant le basculement.



Accoudoirs réglables en standard

Facilement adaptables aux différents besoins des utilisateurs. Réglables en hauteur et en largeur, de +/- 6 cm dans chaque direction.



Repose-tête réglable multi-positions

Le repose-tête est conçu pour offrir un maximum de confort et de flexibilité et peut être ajusté pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.





Etac Swift Mobil 24"-2

La chaise Etac Swift Mobil 24" 2 est un modèle autopropulsé, conçu pour l'utilisateur indépendant.

Facile à manœuvrer

La chaise de douche et de toilette est simple à utiliser et facile à manœuvrer. Les roues arrière sont positionnées pour un contrôle maximum et sont faciles d'accès. Les accoudoirs relevables, le large espace devant les roues et la forme régulière de l'assise simplifient les transferts latéraux.

Siège confortable

Pour faciliter l'accès, le siège dispose d'une ouverture à l'arrière et d'une découpe hygiénique à l'avant. Il est conçu pour assurer le confort de l'utilisateur, quelle que soit sa posture ou la largeur de son bassin. Pour plus de confort, des coussins ergonomiques souples sont encore disponibles.

Convient à de nombreux besoins des utilisateurs

La chaise Swift Mobil 24"-2 s'adapte aux besoins et à la taille de nombreux utilisateurs. Elle supporte un poids maximum de 160 kg en standard. Le siège se règle en hauteur de 45 cm à 60 cm. Les accoudoirs sont réglables en hauteur et en largeur et le dossier souple s'ajuste en tension pour une position plus confortable.

Pour les utilisateurs de plus grande taille, un cadre de dossier extra-large est proposé, offrant une distance supplémentaire de 6 cm entre les accoudoirs.



Etac Swift Mobil 24"-2

Swift Mobil 24"-2, montée

Référence

80229402

Swift Mobil 24"-2 avec support pour seau

80229407

Swift Mobil 24"-2 avec support pour bassin

80229408

Standard : dossier, assise, accoudoirs, repose-pieds et 4 roulettes verrouillables

Poids

25,1 kg

Dimensions

Largeur totale : 72 cm

Distance entre les accoudoirs : 42/48/54 cm

Matériaux

Châssis : acier laqué époxy

Siège/accoudoirs : polypropylène

Dossier : polyester/Velcro

Repose-pieds : polypropylène

Roulettes : polyamide/TPE, verrouillables, à roulement à billes

Roues arrière : pneus pleins, polyamide, roulement à billes

Freins : polyamide, acier inoxydable



Nettoyez/désinfectez le produit à l'aide d'un produit nettoyant non abrasif standard avec un pH compris entre 5 et 9, ou avec une solution désinfectante à 70 %.

Le produit peut être nettoyé en toute sécurité dans un laveur-désinfecteur à 85 °C pendant 3 minutes.

Poids max. utilisateur : 160 kg

Caractéristiques



Facile à manœuvrer

La position des roues arrière permet de propulser facilement la chaise vers l'avant et de simplifier les transferts latéraux.



Dossier réglable

S'ajuste facilement pour offrir une meilleure posture, s'adapter à la forme du corps et garantir un confort maximum. Équipé de deux fixations autour des barres de poussée. Matériau souple et à séchage rapide.



Hauteur de siège réglable

La chaise Swift Mobil 24"-2 peut être facilement réglée à différentes hauteurs, sans outils, pour garantir une hauteur sûre et confortable.



Repose-pieds ergonomiques

Les repose-pieds incurvés offrent un soutien de la voûte plantaire, assurant confort, stabilité et détente.





Accessoires - pour tous les modèles

(Voir Informations relatives au nettoyage à la page 14)



Coussin confort, 4 cm ouverture arrière

80209519

Forme ergonomique et grande souplesse pour un soulagement et un soutien confortables. Conçu avec une découpe à l'avant. Matériau : polyuréthane



Coussin confort, 2 cm ouverture arrière

80209518

Grande souplesse et formes arrondies pour un maximum de confort. Conçu avec une découpe à l'avant.

Matériau : polyuréthane



Coussin confort, 4 cm

Avec petite ouverture de 15 cm : 80209507
Avec grande ouverture de 18 cm : 80209506
Sièges de forme ergonomique, doux et confortables, avec découpes à l'avant. La hauteur est de 4 cm au point le plus bas. Matériau : polyuréthane.



Coussin souple confort, 2 cm

Ouverture de 18 cm : 80209306
Siège Comfort souple et moulé avec découpe à l'avant. La hauteur est de 2 cm au point le plus bas. Matériau : polyuréthane.



Coussin d'assise plein

80209434

Siège plein confortable à utiliser pour couvrir l'ouverture hygiénique. Peut être utilisé sous la douche. Hauteur de 2 cm. Matériau : polyuréthane.



Coussin souple avec ouverture standard

80209065


Coussin en mousse avec housse en tissu hydrofuge. Hauteur de 2 cm. Matériau : polyéther/plastique enduit.



Coussin souple avec ouverture ovale

80209067

Coussin en mousse avec housse en tissu hydrofuge. Hauteur de 4 cm. Matériau : polyéther/plastique enduit.

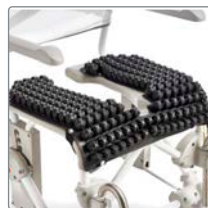

Coussin ROHO® Protect

80209245

Coussin gonflable à air avec d'excellentes caractéristiques de décompression. Destiné aux utilisateurs très sensibles à la pression. Largeur de la découpe anatomique : 21 cm. Matériau : néoprène



Repose-tête

80209447

Repose-tête réglable à plusieurs points avec coussin profilé. Hauteur, profondeur, côtés et inclinaison réglables. Fourni avec support. Matériau : coussin : polyuréthane renfort : acier inoxydable



Coussin dossier confort

80209455

Dossier souple avec coussins d'accoudoirs intégrés. Le rembourrage Comfort offre un soutien souple tout en laissant la surface de préhension de l'accoudoir libre. Matériau : polyéthylène.



Support latéral

80209509

Dossier souple avec coussins d'accoudoirs intégrés. Matériau : tissu en polyester, velcro et polyéthylène.



Dossier XL

80209454

Pour les utilisateurs de plus grande taille, offre plus d'espace pour le dos et les épaules. Augmente la largeur entre les accoudoirs de 6 cm pour atteindre une largeur totale de 48/54/60. (Le dossier XL est incompatible avec Swift Mobil Tilt-2) Matériau : polyester, acier laqué époxy, acier inoxydable, polypropylène.



Accessoires - pour tous les modèles

(Voir Informations relatives au nettoyage à la page 14)



Coussin de dossier souple

80209448

Apporte chaleur et souplesse à l'utilisateur. Utilisé à l'intérieur des accoudoirs, ce qui permet de replier les accoudoirs et de créer une accessibilité pour le transfert latéral. Matériau : polyéthylène.



Coussin pour accoudoir

80209508

Utilisé pour apporter du confort autour des accoudoirs. Fournit une surface chaude et souple pour soutenir les bras tout en gardant la surface de préhension libre, ce qui permet à l'utilisateur de se lever en toute sécurité. Lot de deux. Matériau : polyéthylène.



Accoudoir pour hémiplégique

80209035

Maintient l'avant-bras grâce à sa forme profilée. Équipé d'un matériau réfléchissant la chaleur à l'extérieur. Compatible avec les accoudoirs gauche et droit. Matériau : polyéthylène



Dispositif de blocage des accoudoirs

80209445

Une goupille de blocage à utiliser lorsque vous souhaitez verrouiller l'accoudoir en position rabattue ou levée. Matériau : acier inoxydable.



Pare-éclaboussures

80209430

Une protection souple contre les éclaboussures d'urine à l'avant. Se fixe à la découpe avant du siège et s'enlève facilement. Matériau : polyuréthane



Barre de maintien

60,5 cm 80303034

66,5 cm 80209452


Un support sûr auquel se tenir ou à utiliser comme support. Reliée aux accoudoirs. Matériau : aluminium, polyéthylène.



Ceinture de hanche / ventrale / pectorale rembourrée

80209524


Ceinture de positionnement en deux parties qui peut être utilisée comme ceinture de hanche ou pectorale. Réglable avec 3 boucles d'une longueur comprise entre 65 et 130 cm. Lavable, sèche rapidement et offre un soutien ferme lors du positionnement.

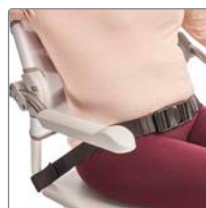

Ceinture de positionnement

80209440

Facile à ajuster avec une boucle en plastique. S'attache autour des tubes de dossier à l'arrière à l'aide de bandes Velcro. Matériau : polyester

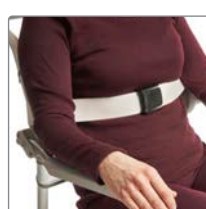

Sangle pectorale

80209442

Facile à ajuster et à attacher autour des sangles du rembourrage du dossier. Il est recommandé de l'utiliser avec une ceinture de positionnement. Matériau : polyester



Bassin avec couvercle

Bassin avec couvercle et poignée : 80209255

Forme intérieure unique qui brise le jet et empêche les éclaboussures. Le couvercle est muni d'une poignée, il se verrouille sur le bassin et empêche le contenu de se renverser. Matériau : polypropylène



Bassin

Bassin sans couvercle 80209254

Couvercle avec poignée 80209256

Forme intérieure unique qui brise le jet et empêche les éclaboussures. Matériau : polypropylène



Support pour bassin

80209257

Convient aussi bien pour le bassin Etac que pour les bassins d'hôpital traditionnels. S'utilise avec les attaches pour support-bassin (80209435) qui se commandent en sus. Matériau : polypropylène



Attaches pour support bassin / seau

80209435

À monter solidement sous le siège pour permettre l'utilisation de supports pour bassin. A fixer avec un tournevis. Kit de 4 pièces. Matériau : polyamide



Attaches pour fixation basse du bassin / seau

80209259 (lot de 2)

Utilisées pour placer le bassin/seau plus bas sous le siège. Montées avec les supports pour bassin ou seau. Abaissent les supports pour bassin/seau de 6 cm. Matériau : polypropylène.

Accessoires - pour tous les modèles

(Voir Informations relatives au nettoyage à la page 14)



Support pour seau

80209258

Utilisé comme support pour les seaux ou les bassins hygiéniques avec des bords plus hauts. S'utilise avec la référence 80209435, à commander en plus. (lot de 2)

Matériau : polypropylène.



Seau avec poignée et couvercle

80209265

Seau traditionnel qui s'utilise avec un support pour seau.

Matériau : polypropylène



Dispositif anti-basculer Swift Mobil Tilt-2

Dispositif anti-basculer pour Swift Mobil Tilt-2 : 80209459

Assure une protection contre le basculement de la chaise vers l'arrière. Augmente la sécurité si le centre de gravité est loin derrière. (Lot de 2)

Matériau : polypropylène et aluminium



Dispositif anti-basculer Swift Mobil-2

Dispositif anti-basculer, avec la fixation : 80209439

Dispositif anti-basculer, sans la fixation : 80209438

Assure une protection contre le basculement de la chaise vers l'arrière. (Lot de 2)

Matériau : polypropylène et aluminium



Aide au franchissement

80209449

Facilite le franchissement des seuils ou des rampes. Vendue avec support.

Matériau : polypropylène et aluminium



Paire de repose-pieds courts

80209520

Un repose-pieds court qui pivote latéralement. Réglable sur 12,5 cm, offre une longueur de repose-pieds de 24 à 36,5 cm. Le repose-pieds a une forme arrondie. Lot de deux.

Matériaux : acier inoxydable et polypropylène



Paire de repose-pieds avec plaques rabattables

80209446

Ajustables pour ceux qui ont besoin d'un angle de pied plus ouvert. Peuvent être équipés d'une cale talonnière. Lot de deux.

Matériau : acier inoxydable et polypropylène.



Support pour jambe et mollet

80209437

Repose-jambes à angle réglable qui peut être utilisé à droite et à gauche. Livré avec 4 positions d'angle fixe. Vendu à l'unité.

Matériau : acier inoxydable et plastique ABS.




Repose-pieds pour un soutien de la jambe et du mollet

80209443

Kit avec repose-pieds séparé à monter avec le support pour jambe et mollet.

Matériau : plastique ABS

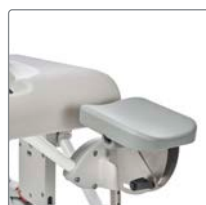

Repose-jambe pour personne amputée

80209510

Hauteur, longueur et inclinaison réglables. Utilisable à gauche et à droite. Si l'utilisateur est amputé, nous recommandons d'utiliser un dispositif anti-basculer.

Matériau : acier inoxydable et polyuréthane



Paire de cales talonnières

80209432

Montées sur les repose-pieds. Empêchent les pieds de glisser vers l'arrière. Réglables en longueur. Vendu par paire.

Matériau : polyester



Kit de roues arrière 24"

80209436

Roues arrière de 24" avec pneus pleins et protections anti-basculer intégrées. Faciles à monter. Fixations et freins inclus.

Matériau : polyamide, acier inoxydable, polyuréthane aluminium



Consignes de nettoyage

Sièges souples confort et couvre-siège, repose-tête, dispositif de blocage d'accoudoir, pare-éclaboussures, bassin, support pour bassin, porte-accessoires, fixation basse, support pour seau, seau, dispositif anti-bascule, aide au franchissement, repose-pieds, support pour jambe et mollet, repose-jambe pour personne amputée, kit de roues arrière 60 cm



Rembourrage du dossier, ceinture de positionnement/Sangle pectorale rembourrée, ceinture de hanche, ceinture de poitrine, cale talonnière



Coussins souples, coussin confort, coussin de dossier souple, coussin d'accoudoir, accoudoir pour hémiplégique, barre transversale



ROHO® protect



10 min



Explication des symboles de nettoyage



Lavage en machine - température max. 60 °C



Le produit peut être nettoyé dans un laveur-désinfecteur à 85 °C pendant 3 minutes.



Essuyage - le produit peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon de nettoyage.




Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant avec un pH de 6 à 9 ou une solution désinfectante à 70 %.



Pas de nettoyage à sec

Dimensions

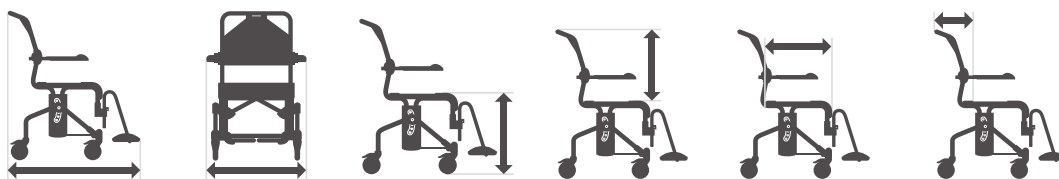

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur d'assise	Hauteur du dossier	Profondeur d'assise	Profondeur du dossier
Swift Mobil-2	93 cm	57/58/64 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5 cm	21 cm
Swift Mobil-2 XL	93 cm	58/64/70 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5 cm	21 cm
Swift Mobil 24"-2	106 cm	72 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5 cm	21 cm
Swift Mobil Tilt-2	104 cm	57/58/64 cm	50 / 65 cm	55 cm	46,5 cm	25 cm



Modèle	Largeur d'assise	Hauteur des accoudoirs	Distance entre accoudoirs	Hauteur du repose-pieds	Hauteur
Swift Mobil-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	34 / 46,5 cm	95-110 cm
Swift Mobil-2 XL	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	34 / 46,5 cm	95-110 cm
Swift Mobil 24"-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	34 / 46,5 cm	95-110 cm
Swift Mobil Tilt-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	34 / 46,5 cm	100-115 cm





« Chacun a le droit de profiter d'une existence autonome et libre de contraintes et de poursuivre ses rêves, quelle que soit sa condition physique. »

Afin de rester informé(e) des dernières actualités et d'obtenir des informations produit continuellement mises à jour, consultez des produits le site www.etac.com ou www.france-rehab.fr

France Rehab
ZA du Serroir
54690 Lay Saint Christophe
Tél. : 03 83 22 20 65
Fax : 03 83 31 57 83
info@france-rehab.fr
www.france-rehab.fr

France Rehab