

XENON[®] SA

Le fauteuil pliant le plus léger du monde ...
Désormais disponible avec repose-pieds escamotables!



XENON[®] SA

Le nouveau châssis ultra-léger combiné à un croisillon plat innovant et breveté octroient au Quickie Xenon SA un design actif des plus impressionnant.



Le fauteuil PLIANT le plus léger du monde avec des repose-pieds escamotables! 9.7 kg* de technologie de pointe.



Quickie® a su combiné les dernières technologies en terme d'alliage ultra-léger (aluminium hydroformé), de design et d'ingénierie pour concevoir le Xenon SA - **le fauteuil pliant le plus léger du monde avec des repose-pieds escamotables !**

Pesant **à peine 9.7 kg***, et grâce à son croisillon breveté révolutionnaire, le Xenon SA se soulève et se transporte avec un minimum d'efforts. Son design, basé sur un style minimaliste, est celui qu'on peut attendre d'un fauteuil à cadre rigide.

Avec un design haut de gamme et une technologie innovante, le Xenon SA procure une expérience inégalée, grâce à **ses performances de conduite exceptionnelles, sa grande restitution de l'énergie et sa maniabilité hors du commun.**

Le Xenon SA ressemble et se comporte comme un fauteuil à cadre rigide avec les avantages d'un fauteuil pliant à repose-pieds escamotables - simplement idéal...!



* 40 x 40 cm; châssis bas; protège-vêtement petite hauteur slim; roues 24" Proton + main-courantes aluminium; roues 4"; dossier réglable en angle; hauteur de dossier fixe 35 cm; freins compacts légers; sans poignées de poussée + toile de dossier légère; palette relevable..

A close-up photograph of a motorcycle's front fork assembly. The upper fork tube is white with the word "XENON" in yellow lettering. The lower fork leg is a bright orange color with a complex, multi-hole design. It is connected to a black tire mounted on a silver-colored rim. The background is dark and out of focus.

Grande discrétion des supports de fourche et de ses ajustements grâce à un mécanisme breveté qui s'opère à l'intérieur du tube. Réglages simples, performances efficaces et un style tout en raffinement!

Pliage sans effort et ultra-léger, pour un maximum d'indépendance pour une vie active..



Avec un poids inférieur à **7.4 kg** sans ses roues arrière et ses repose-pieds, les transports et les transferts ne sont plus une contrainte au quotidien.

Le Xenon SA intègre une technologie très innovante appliquée au système de pliage :

- **Le mécanisme de pliage dynamique (Dynamic Folding System).** Le design plat du croisillon a été conçu pour se faire discret sous l'assise, pour garantir un effet minimaliste et ressembler à un fauteuil à cadre rigide.
- Grâce **au système de verrouillage, Quickie® Locking System**, le Xenon SA se bloque automatiquement en position, une fois plié. Pour le déplier, une seule pression sur le levier suffit.



Xenon SA est légalement protégé pour vous assurer qu'il reste unique pour vous...

Publié droits de propriété intellectuelle
1080 618
001 080 733
EP 180 9532 A2

Registre des brevets en instance
PCT/ EP2008/ 011015
EP 0915 1773.0
EP2008/ 011017
EP10196521
EP10195017
DE102011 000 030.5



Système de Verrouillage Quickie®

Ce système innovant et breveté garantit au Xenon SA une manipulation simple et rend le fauteuil ultra-compact. Mécanisme pouvant être activé par des Utilisateurs à la préhension réduite.



Dossier Réglable en Angle

Xenon SA offre différents types de dossiers avec des supports très stylés et légers, s'intégrant au design du châssis. Dossier fixe 90° et réglable en angle de -15° à +18° par palier de 3°.



Palettes Séparées Aluminium

Harmonisées à la couleur du châssis du fauteuil, réglables en angle et en profondeur de série, pour un bon positionnement.



Palette Monobloc Rabattable - Performance

Palette disponible en composite et fibre de carbone. Solution pour gagner en légèreté et pour faciliter les transferts grâce à son articulation latérale.



Verrou de Potence

Mécanisme innovant pouvant être actionné à droite comme à gauche, faisant pivoter la potence à l'intérieur comme à l'extérieur du cadre, pour un accès optimal au fauteuil..



Repose-Pieds Escamotables

Conçus avec un nouvel alliage d'aluminium ultra-léger. Rigidité assurée. Potences disponibles en 70° et 80°.

XENON[®] SA



Roues Proton à Déverrouillage Rapide

Le poids de la paire de roues incluant main-courantes, axes et pneus Schwalbe Speedrun, est de seulement 2.25 kg - soit une économie d'environ 1 kg par rapport à une paire de roues traditionnelles..



Nouveaux Accoudoirs

Les nouveaux accoudoirs, plus stables et plus rigides, sont disponibles dans tous les coloris de châssis. Différentes versions de manchettes: fixes et réglables en hauteur, courtes et longues.



Support d'Axe Standard

Permet deux positions du centre de gravité, du carrossage 0°; 2°; 4° et un réglage d'écartement des roues - le tout en une seule pièce.



Support d'Axe Léger

Dévisser une seule vis de chaque côté, tourner et inverser les canons d'axes asymétriques de la droite vers la gauche et on obtient un changement de centre de gravité de 2 cm.



Pliage - Verrouillage - Déverrouillage


Système unique permettant un pliage et un verrouillage en un tour de main. Déverrouillage en une seule pression sur le levier.



Freins Compacts Ergonomiques

Minimalistes et simples à verrouiller.

Données Techniques

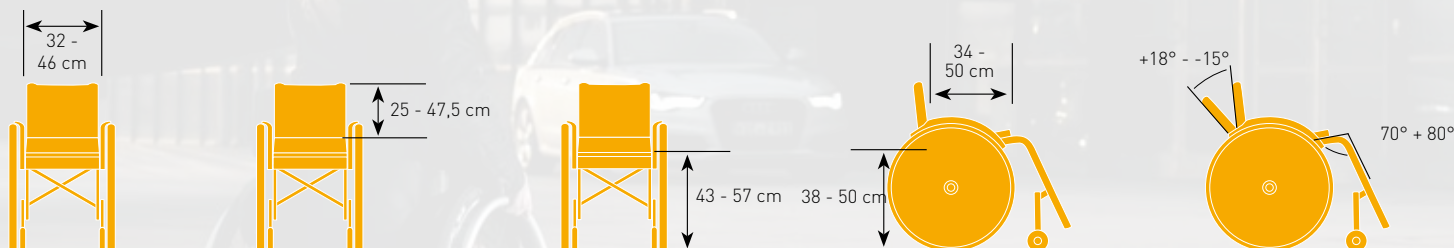

Largeur d'assise	32 - 46 cm	Hauteur sol/siège arrière	38 - 50 cm
Profondeur d'assise	34 - 50 cm	Angle d'assise	0° - 12°
Hauteur de dossier	25 - 47,5 cm	Angle des potences	70° & 80°
Angle de dossier	-15° to +18°	Poids du fauteuil complet	à partir de 9.7 kg
Hauteur sol/siège avant	43 - 57 cm	Poids max. de l'Utilisateur	125 kg

Pack Neutron***

à partir de **10.7 kg**

incluant dossier 90°, potences 80° avec palettes séparées composite, réglables en angle et garde boue aluminium.

Pack Proton***

à partir de **10.2 kg**

incluant dossier 90°, potences 80° avec palettes séparées composite, réglables en angle et garde boue aluminium, plus roues Proton et freins compacts. .

Pack Electron***

à partir de **9.7 kg**

incluant roues Proton, freins compacts, garde-boue carbone ou protège-vêtements carbone - slim style, potences 80° avec palettes séparées composite, réglables en angle, dossier réglable en angle et tubes de dossier fixes en carbone.



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr