



Invacare®

Alu Lite

Léger et compact

Trusted Solutions,
Passionate People



L'*Invacare Alu Lite* est un fauteuil manuel pliant par croisillon très léger (11 kg), grâce à son châssis en aluminium. Ses roues 12" à l'arrière lui confèrent une grande maniabilité et le design de son châssis lui permet de passer toutes les portes.

Les poignées de freins intègrent une position frein de parking ce qui facilite l'utilisation pour la tierce personne.

Facile à transporter et à ranger

Invacare Alu Lite est très facile à manipuler et à transporter grâce à son châssis en aluminium, son design compact et son dossier pliant à mi-hauteur. Il suffit de retirer les potences, de plier le dossier et le châssis, et de le ranger.

Maniable

La maniabilité d'un fauteuil roulant est primordiale, c'est pourquoi *Invacare Alu Lite* a été conçu de manière à être très facile à pousser et à manœuvrer, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Grâce à son faible encombrement (largeur d'assise + 110 mm), il est facilement manœuvrable dans tous types d'espace, mêmes étroits.



Caractéristiques et Options



Dossier pliant à mi hauteur

Permet de réduire la hauteur du fauteuil lors du transport et du rangement.



Palettes relevables et potences escamotables

Permettent un accès facilité au fauteuil roulant lors des transferts.



Châssis pliant par croisillon

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	UL	Angle des potences	Angle de dossier
<i>Invacare Alu Lite</i>	410 / 460 mm	430 mm	490 mm	450 mm	230 mm	340 - 460 mm	3°	0°
	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Largeur hors-tout avec potence	Longueur hors-tout sans potence	Poids du fauteuil	Poids max. utilisateur	Poids de transport	
<i>Invacare Alu Lite</i>	520 / 570 mm	945 mm	1030 mm	760 mm	11 kg	100 kg	10,2 kg	


Coloris du châssis

Bleu



Revêtement du siège

Nylon noir

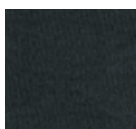

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

Codes

1517737

(largeur 410 mm)

1517738

(largeur 460 mm)