

AQUATEC®

Ocean VIP Ergo Ocean Dual VIP Ergo



Des solutions modulaires pour le maintien à domicile et les collectivités pour des besoins complexes

DESIGN ERGONOMIQUE | SÉCURITÉ | INDÉPENDANCE

INVACARE
Yes, you can.®

Des solutions modulaires pour des besoins complexes de maintien et de positionnement

L'Ocean VIP Ergo et l'Ocean Dual VIP Ergo sont des chaises de douche modulaires inclinables, conçues pour s'adapter aux différents besoins de positionnement des utilisateurs. Ces deux modèles bénéficient d'une inclinaison d'assise à translation de -5° à 40° , et l'Ocean Dual VIP Ergo dispose également d'une inclinaison de dossier par vérins gaz de 5° à 35° , pour les utilisateurs nécessitant des besoins de positionnement plus complexes.


Hautement personnalisable

Comme tous les modèles Ocean Ergo, les modèles VIP et Dual VIP peuvent être adaptés à chaque individu en effectuant des réglages simples ou en ajoutant des accessoires faciles à monter. Leur conception ergonomique assure une facilité d'utilisation pour les soignants tout en offrant une sécurité maximale et un confort optimal à l'utilisateur.

Retrouvez l'ensemble des accessoires sur notre site www.invacare.fr

NOUVELLE assise ergonomique

- ▶ Une forme anatomique pour assurer une position d'assise plus verticale et plus stable.
- ▶ Pente d'assise de 5° permettant de surélever les genoux et ainsi retrouver une position naturelle aux toilettes.
- ▶ Encoches à l'avant pour permettre à l'utilisateur de se repositionner confortablement dans la chaise pour la toilette et la douche.

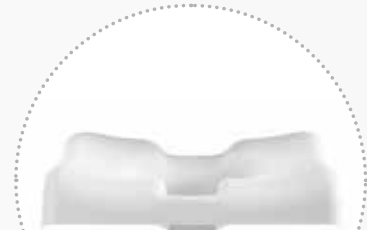

NOUVELLE bascule d'assise ergonomique

- ▶ Le nouveau mécanisme de bascule d'assise permet une inclinaison à translation de -5° à 40° tout en maintenant le centre de gravité de l'utilisateur proche de celui de la chaise. Cela rend l'inclinaison plus facile et plus intuitive pour le soignant et plus douce et plus confortable pour l'utilisateur tout en gardant une stabilité maximale.



**NOU-
VELLES**

FONCTIONNALITÉS

-5° à 40°

1

Stabilité améliorée

- ▶ La stabilité est améliorée pour plus de sécurité et d'assurance

2

Bascule d'assise à translation

- ▶ Permet la répartition des points de pression

3


Assise ergonomique et innovante

- ▶ L'assise anatomique et ergonomique favorise une position verticale pour plus d'indépendance et de confort

4

Empattement réduit

- ▶ L'empattement optimisé facilite les manoeuvres dans les espaces restreints

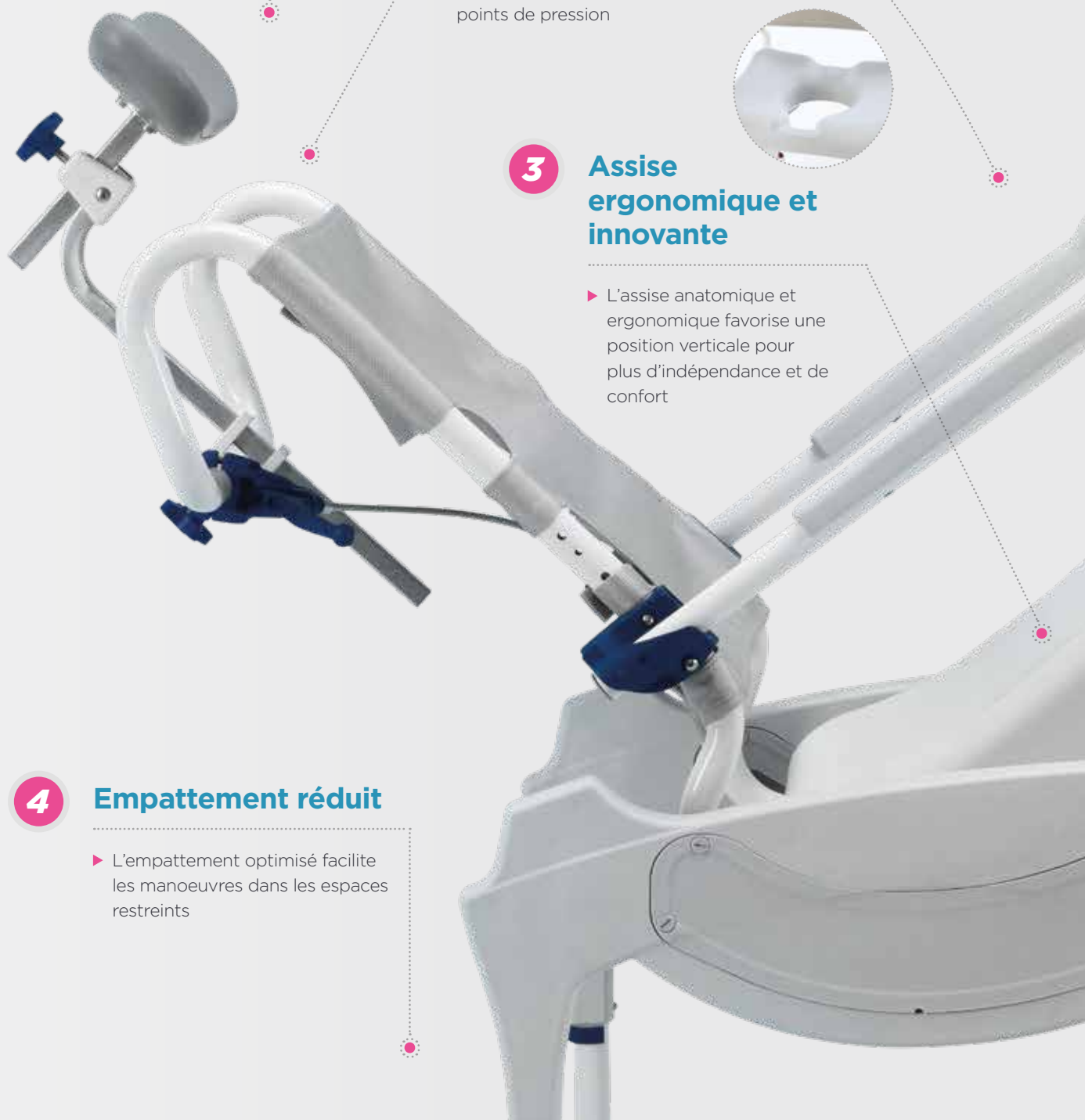

Autres caractéristiques



▲ Châssis anti-corrosion en acier inoxydable



▲ Une roue sur les quatre est équipée d'un verrouillage directionnel afin de suivre une trajectoire droite



▲ Toile de dossier en nylon réglable en tension et lavable en machine à 60°C (toile de dossier confort en vinyl/PVC disponible en accessoire)



▲ Les accoudoirs, le repose-pieds et l'assise sont réglables en hauteur facilement



▲ Inclinaison de dossier de 5° à 35°
Uniquement sur

Dual VIP Ergo

Découvrez l'Ocean VIP Ergo et l'Ocean Dual VIP Ergo

Des chaises de douche modulaires avec bascule d'assise permettant de s'adapter aux besoins de chaque utilisateur



Ocean VIP Ergo

- ▲ Angle d'inclinaison d'assise de -5° à 40°
 - ▲ Appui-tête de série
- Code : 1604019

Ocean Dual VIP Ergo

- ▲ Angle d'inclinaison d'assise de -5° à 40° et inclinaison de dossier de 5° à 35°
 - ▲ Appui-tête et anti-basculé arrière de série
- Code : 1604134

Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.



Largeur d'assise ▼



Profondeur d'assise ▼



Hauteur d'assise ▼



Largeur hors-tout ▼



Profondeur hors-tout ▼

Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	565 mm	1000 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	565 mm	1000 mm



Largeur entre les accoudoirs ▼



Angle d'inclinaison d'assise ▼



Angle d'inclinaison de dossier ▼




Poids ▼



Poids max. utilisateur ▼

Ocean VIP Ergo	455 mm	-5° - 40°	-	27,2 kg	150 kg
Ocean Dual VIP Ergo	455 mm	-5° - 40°	5° - 35°	29,8 kg	150 kg

Coloris de châssis ▼ Données réglementaires ▼

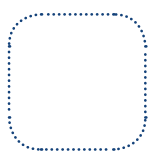

Blanc



Tel. : +33 2 47 62 64 00
 Fax : +33 2 47 42 12 24
 Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S
 Route de Saint Roch
 37230 Fondettes
 France



Yes, you can.®