



Netti[®]
4U CE Plus

UN PLUS POUR LES
SOLUTIONS INDIVIDUELLES

- Un Plus pour les solutions individuelles
- Version standard, version Transit et version Seating System
- Large choix de coussins de dossier réglables en hauteur hauteur 500 ou 600 mm
- Toile de dossier non réglable (Std) ou réglable en tension (Seating System)
- 4 largeurs d'assise différents - réglable sur 80 mm
- Accoudoirs amovibles et démontables d'une seule main
- Poignées de poussée réglables en hauteur
- Revêtement lavable Easy Care standard.

NETTI 4U CE PLUS

PLUS DE FLEXIBILITÉ ET DE FACILITÉ D'UTILISATION

Le Netti 4U CE Plus combine économie et individualité au plus haut niveau. Grâce à la conception du châssis et à la vaste gamme d'accessoires, il est possible de satisfaire aux nombreuses exigences des utilisateurs.

COMPACT
EASY-TO-USE
PLUS



SPÉCIFICITÉS



350-500 mm
Largeur d'assise



S: 375-450 mm
425-500 mm
Profondeur d'assise



500 mm
(600 mm)
Hauteur dossier



465-500 mm
Hauteur d'assise sans coussins



-5° - +20°
Inclinaison d'assise



90° - 135°
Inclinaison de dossier



135 kg
Poids max. utilisateur



27,5 - 29 kg
Poids sans coussins



Max. 135 kg
Crash testé

LÉGER ET COMPACT

La largeur totale des Netti 4U n'est que de 180 mm de plus que la largeur d'assise - 195 mm de plus avec freins accompagnant ... en plus d'être les plus légers du marché.

Tout les Netti 4U sont légers et faciles à utiliser grâce aux fonctions reconnaissables à leur couleur rouge. De plus, les fauteuils 4U sont dotés d'une proclive pour une plus grande sécurité, permettant de s'asseoir et de se relever facilement du fauteuil.

LE DOSSIER

Le dossier est constitué d'une toile et d'un coussin de dossier avec deux hauteurs disponibles. Le dossier anatomique est réglable en hauteur pour un maintien confortable sur toute la partie dorsale.

LARGE CHOIX DE COUSSINS DE DOSSIER

Une sélection de coussins est proposée en fonction du maintien requis : retours latéraux plus ou moins importants, maintien lombaire réglable pour limiter le glissement et prévenir les déviations latérales.

REEMPLACER PAR POIGNÉES DE POUSSÉE

Confortables pour l'accompagnant, réglables en hauteur et escamotables pour gagner en compacité lors du transport ou libérer la partie arrière pour faciliter le transfert.

3 VERSIONS

Version Standard avec coussin d'assise et de dossier Netti Uno Seat et Netti Uno Back.

Version Seating System : coussin d'assise et toile de dossier de positionnement, dossier réglable en tension.

Transit: Version Transit Avec des roues 16".

ACCOUDOIRS DÉMONTABLES D'UNE SEULE MAIN

Les accoudoirs bénéficient d'un nouveau design avec un point de fixation avancé pour une plus grande solidité.





LARGEUR D'ASSISE RÉGLABLE SUR 80 MM

Châssis disponible en 4 largeurs d'assise, avec des élargisseurs d'accoudoirs (livrés de série) qui permettent d'augmenter chaque largeur d'assise de 20 ou 40 mm.



REVÊTEMENT EASY CARE

Ce revêtement se nettoie facilement à l'aide d'une éponge ou avec un désinfectant et respecte les règles d'hygiène en vigueur. Il peut être remplacé par un revêtement 3D nid d'abeille, respirant et lavable en machine (en option).

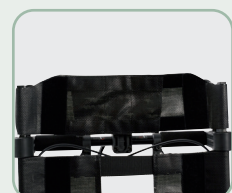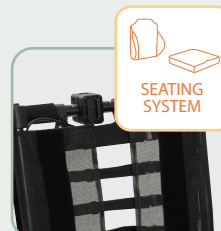

SYSTÈME MODULAIRE

Le Netti 4U CE Plus est équipé d'une toile de dossier souple (réglable en tension ou non, au moyen de six sangles selon les versions) et d'un coussin de dossier interchangeable et réglable en hauteur par velcro. Il peut recevoir l'ensemble des coussins de dossier de positionnement Netti Seating System ainsi qu'une extension de dossier (en option) pour proposer un maintien postural adapté aux besoins de l'utilisateur.



 **Meyra Netti SAS**
11 rue du Bois du Pont,
Lot 2, ZI Béthunes
95310 St Ouen L'Aumône

Division Netti
info@my-netti.com
Tel.: 04 50 27 37 63
Fax: 04 50 60 51 80

www.my-netti.fr
