



Invacare®

# Action<sup>®3</sup> Junior<sup>®</sup>

Votre route, votre look !

Trusted Solutions,  
Passionate People



Ce fauteuil roulant manuel léger et pliant en aluminium a été conçu dans le but de respecter les différents besoins et envies que peuvent avoir les enfants. Il est également très facilement transportable.

L'esthétique de ce fauteuil a été entièrement repensée pour être en adéquation avec les dernières tendances.

**Action<sup>3</sup> Junior<sup>®</sup> Evolutif** est doté d'un système de croisillon pour suivre la croissance de l'enfant.

- Disponible en version évolutive
- Configurable
- Centre de gravité et hauteurs d'assise réglables



#### **Action<sup>3</sup> Junior<sup>®</sup> Evolutif : croisillon télescopique innovant**

Invacare **Action<sup>3</sup> Junior Evolutif** bénéficie d'un croisillon télescopique qui **permet de suivre l'évolution de la morphologie** de l'enfant afin de lui apporter une assise confortable et adaptée. Grâce à sa toile d'assise et de dossier réglable en largeur et en profondeur, les dimensions d'assise peuvent être facilement ajustées, **sans qu'aucune autre pièce ne soit nécessaire !**



#### **Conçu pour être personnalisé**

Le fauteuil a été conçu pour permettre à l'enfant de personnaliser son fauteuil, il ne s'agit pas de répondre uniquement à ses besoins mais aussi à **sa personnalité**. Ce fauteuil offre une multitude de configurations possibles grâce à **un choix important de coloris** allant du plus flashy au plus sobre, ainsi que **3 nouveaux protège-rayons modernes et tendances**. La gamme d'accessoires disponible sur l'**Action<sup>3</sup> Junior** augmente la possibilité de personnalisation pour s'adapter aux besoins de tous : roues avant, accoudoirs, potences et bien d'autres.



#### **Centre de gravité et hauteur d'assise**

Ces fonctionnalités permettent d'améliorer les performances de conduite pour les enfants. En effet, le centre de gravité du fauteuil peut être ajusté. Il offre également trois hauteurs d'assise : 410, 435 et 460 mm. Grâce à toutes ces possibilités de réglages, la propulsion du fauteuil est facilitée.

## Caractéristiques et options



### Sélection de protège-rayons au look moderne

3 nouveaux protège-rayons modernes : “Flocons de neige, Coloriez-moi ou Pixels”, à accorder avec les 6 nouveaux coloris de châssis.

### Roues avant

Trois types de roues avant disponibles : ① 5" x 1" roues bandage lumineuses, ② 5" x 1 3/4" roues bandage et ③ 5" x 1" roues bandage.



### Accoudoirs

Des accoudoirs amovibles et réglables en hauteur ① et des accoudoirs Junior ② sont disponibles ainsi que des protège-vêtements ③ et des garde-boue ④.




### Potences et repose-jambes

① Potences à 90°, ② potences à 80° et ③ repose-jambes réglables en inclinaison de 0° à 80° sont disponibles pour répondre à tous les besoins.



### Toile de dossier ajustable

Ajustable en largeur sur la version **Evolutive**.

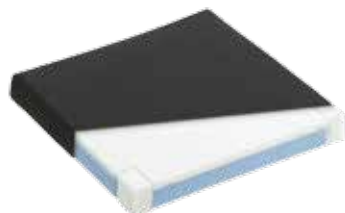

### Coussin d'assise

Le coussin Essential Junior bi-densité d'une épaisseur de 50 mm offre un confort supplémentaire à l'utilisateur et est réglable en profondeur.



### Poignées à pousser multi-réglables en angle

Les poignées ajustables apportent un confort pour la tierce-personne et facilite la poussée du fauteuil. Un tendeur de dossier ajustable en largeur peut être également ajouté pour rigidifier le dossier et également être utilisé comme support pour fixer l'appui-tête pour apporter plus de confort à l'utilisateur.



### Tablettes

Une tablette escamotable est disponible en option pour faciliter les transferts. Sur la version Standard, une tablette amovible est également proposée.



### Abduction des potences

Une abduction de 30° est compatible avec les potences à 80° pour les enfants ayant des problématiques posturales de hanche.



### Types de dossier

Ce fauteuil propose 3 types de dossier : fixe, pliant à mi-hauteur idéal pour le transport et inclinable par vérin ou crémaillère pour plus de confort.



### Kit Stabilizer

Cet élargisseur de voie avant de + 100 mm permet d'augmenter la stabilité du fauteuil.

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Pente d'assise	Hauteur d'assise	Angle de dossier	Hauteur du dossier	Angle des potences
<i>Invacare Action<sup>3</sup> Junior Evolutif</i>	205 - 280 mm / 305 - 380 mm	200 - 250 / 250 - 300 / 300 - 350 / 275 - 325 / 325 - 375 mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	7° / 0° - 30°	370 / 400 / 430 / 350-430 mm	80° / 90° / 0° - 80°
<i>Invacare Action<sup>3</sup> Junior Standard</i>	305 / 330 / 355 mm	250-300 / 300 / 300-350 / 350 mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	7° / 0° - 30°	370 / 400 / 430 / 350-430 mm	80° / 90° / 0° - 80°

	UL	Hauteur des accoudoirs	Largeur hors-tout	Largeur pliée hors-tout	Largeur hors-tout avec potence	Longueur hors-tout sans potence	Hauteur hors-tout
<i>Invacare Action<sup>3</sup> Junior Evolutif</i>	125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	Largeur d'assise + 190 mm	315 mm	740 - 965 mm	510 - 740 mm	870 - 1130 mm
<i>Invacare Action<sup>3</sup> Junior Standard</i>	125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	Largeur d'assise + 190 mm	315 mm	900 - 1000 mm	670 - 770 mm	870 - 1130 mm

	Pente max de stabilité	Rayon de giration	Poids max utilisateur	Poids du fauteuil	Poids de transport
<i>Invacare Action<sup>3</sup> Junior Evolutif</i>	12°	750 mm	80 kg	15 kg	8.5 kg
<i>Invacare Action<sup>3</sup> Junior Standard</i>	12°	750 mm	80 kg	15 kg	8.5 kg




## Coloris de châssis

Blanc Perle



Noir Mat

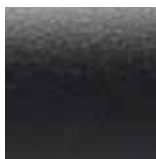

Rouge Mat



Jaune Ardent



Bleu Polaire




Rose Bonbon



NOUVEAU

## Revêtement du siège

Nylon Noir

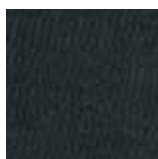

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles ci-dessus.

Tél. : +33 2 47 62 64 00  
 Fax : +33 2 47 42 12 24  
 Email : [contactfr@invacare.com](mailto:contactfr@invacare.com)  
[www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)

INVACARE POIRIER S.A.S  
 Route de Saint Roch  
 37230 Fondettes  
 France



Yes, you can.®

