



\* TOUS DROITS RÉSERVÉS \*

**BREVET  
DÉPOSÉ**

\* TOUS DROITS RÉSERVÉS \*



reddot award 2015  
winner

Invacare® | **Action® 5**

La solution adaptée à votre  
style de vie

Trusted Solutions,  
Passionate People

**INVACARE**

Yes, you can.®

Invacare **Action**<sup>5</sup> a été conçu pour les utilisateurs les plus actifs qui recherchent un fauteuil abordable doté de bonnes performances de conduite et simple à plier pour faciliter sa manipulation, son stockage et son transport. Avec ses deux brevets et sa conception légère, le nouveau **Action**<sup>5</sup> est un fauteuil sur lequel l'utilisateur peut compter. Les principales caractéristiques incluent :

- **Système de pliage unique**
- **Stabilité d'un fauteuil à cadre rigide**
- **Ajustements rapides et précis**
- **Ultra configurable**



### Système de pliage unique



- La conception innovante du fauteuil permet d'avoir un **encombrement réduit** du châssis et un dossier qui se rabat facilement sur l'assise, rendant ainsi le fauteuil **compact**.
- Son système de pliage simple **facilite sa manipulation, son stockage et son transport**.



### La stabilité d'un cadre rigide



- Le système de pliage horizontal en H breveté confère un **niveau de stabilité très élevé**, bien supérieur à la plupart des fauteuils pliant du marché.
- Le verrouillage automatique du système de pliage une fois le fauteuil déplié assure une position d'assise sécurisante et **améliore les performances de conduite** du fauteuil.



### Ajustement rapide et précis du fauteuil sans transfert

- Notre technologie unique et brevetée permet le réglage en angle du dossier **avec l'utilisateur assis dans son fauteuil**.
- Le réglage en continu de l'angle du dossier **facilite les essais et l'adaptation du fauteuil** aux besoins de chaque utilisateur.
- L'échelle de réglage en angle du dossier est intégré au système pour plus de précision.



### Personnalisez-le !

- Donner aux utilisateurs la liberté de personnaliser le look de leur fauteuil selon leur personnalité est possible grâce aux nombreux coloris disponibles.
- **Action**<sup>5</sup> peut également **être personnalisé pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur**, en commençant par le choix entre un look actif avec un châssis à potences fixes ou bien plus de praticité avec des potences escamotables et amovibles idéales pour le stockage et le transport.
- Retrouvez dans les deux prochaines pages plus d'informations sur les nombreuses options disponibles sur **Action**<sup>5</sup>.
- **Action**<sup>5</sup> est également rétro-compatible avec d'autres produits de la gamme Invacare, y compris les kits de motorisation Alber.



### Déjà primé !

- Déjà **récompensé**, le fauteuil Invacare **Action**<sup>5</sup> a remporté le prix Red Dot pour son design
- Le Red Dot Award n'est pas seulement le plus grand concours de produits dans le monde, il est aussi l'un des plus prestigieux prix en terme de design



red**dot** award 2015  
winner



## Configurabilité



### Assise réglable en tension et en profondeur

Ajustement rapide par système de Velcro.



### Centre de gravité

Réglable sur 100 mm par palier de 25 mm. Il est même possible de le peaufiner par palier de 12 mm.



### Carrossage

Réglable de série à 0° ou 2°, il peut également se régler en option à 3° et 4° si nécessaire.

## Potences et repose-jambes



### Potences escamotables

Permet l'escamotage des potences vers l'intérieur et l'extérieur.



### Potences fixes

Un châssis avec potences fixes à 80° est disponible pour les utilisateurs les plus actifs.



### Potences et repose-jambes

Choix parmi des potences escamotables à 70°, 80° et 90°, des repose-jambes de 0° à 80° et un support amputé.

## Accessoires



### Dossier

Inclus une pochette de rangement et des bandes réfléchissantes pour plus de visibilité.



### Roulette anti-bascule active

Peut être activée et désactivée par l'utilisateur comme par la tierce-personne.



### Roues avant

Une sélection de roues avant est disponible de 4" à 7" dont certaines avec jantes aluminium et bandage souple.

## Accoudoirs



### Garde-boue

Les garde-boues élégants sont légers pour limiter le poids global du fauteuil au minimum.



### Accoudoir amovible et réglable en hauteur

Réglable en profondeur par coulissement sur le rail d'assise.



### Gouttière

Apporte plus de maintien à l'utilisateur et offre plus de réglages.

## Nouvel accoudoir relevable et amovible



### Nouvel accoudoir relevable et amovible

Accessible par l'utilisateur et escamotable pour faciliter les transferts




### Réglage en hauteur

Un simple appui sur le bouton permet un réglage facile.



### Gachette de verrouillage

Même avec des fonctions limitées au niveau de la main, l'accoudoir peut facilement être déverrouillé.

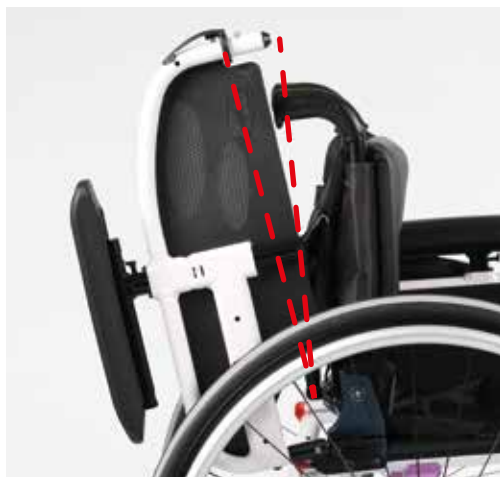

### Relevable

La position de l'accoudoir une fois relevé est ajustable à l'aide d'une simple vis.



### Manchette réversible

Il suffit d'inverser le sens du tube support de manchette pour passer d'une manchette courte à longue et inversement.

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Pente d'assise	Hauteur d'assise	Angle de dossier	Hauteur du dossier	Angle des potences
Invacare Action <sup>5</sup>	305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm	350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm	0 - 9°	Avant : 410 - 510 mm par palier de 25 mm Arrière : 385 - 485 mm par palier de 25 mm	Dossier fixe à 90° Ou dossier réglable en continu 90°, de -15° à +15°	Fixe 300 / 325 / 350 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm Réglable en continu 360 - 400 mm et 410 - 490 mm	Potences fixes 80° Potences escamotables 70° / 80° / 90° Repose-jambes 0-80°

	UL	Hauteur des accoudoirs	Largeur hors-tout	Largeur pliée hors-tout	Largeur hors-tout avec potence <sup>1</sup>	Longueur hors-tout sans potence	Hauteur hors-tout
Invacare Action <sup>5</sup>	Potences escamotables : 200-510 mm Potences fixes : 300-530 mm	186-227 mm 186-266 mm 205-280 mm	Largeur d'assise de +180 mm à +250 mm	320 - 380 mm	845 - 1205 mm	670 - 860 mm	701 - 1108 mm

	Pente max. de stabilité <sup>2</sup>	Rayon de giration <sup>3</sup>	Poids max. utilisateur	Poids du fauteuil	Poids de transport	Dimensions du fauteuil plié <sup>4</sup>
Invacare Action <sup>5</sup>	7°	1050 - 1380 mm	100 & 130 kg	A partir de 12,3 kg	A partir de 8,3 kg	



### Autres données:

Position du support d'accoudoir = 300 - 380 mm  
Diamètre des main-courantes = 490 - 550 mm  
Position axes des roues arrière: 25 - 100 mm

**Espace pour les mouvements de la tierce-personne:** pour les fauteuils roulants ayant une largeur d'assise < à 430 mm, il y a potentiellement un risque pour la tierce-personne de se cogner dû au manque d'espace.


**1. Dimensions hors-tout:** Dans certaines configurations, la largeur ou longueur hors-tout excèdent les limites autorisées et l'accès aux évacuations d'urgence ne sont plus possible.

**2. Valeurs de stabilité**  
Pente maximale d'utilisation de freins de stationnement = 7°  
Stabilité statique en arrière = 14° - 21°  
Stabilité statique en avant = 9,4° - 25,5°  
Stabilité statique latérale = 20° - 24°

**3. Rayon de giration**  
Rayon de giration maximum = 625 mm  
Largeur du pivot = 1050 - 1180 mm

**4. Dimensions du fauteuil plié**  
Hauteur = 450 - 720 mm  
Profondeur = 620 - 1020 mm  
Largeur = 320 - 380 mm

## Coloris de châssis

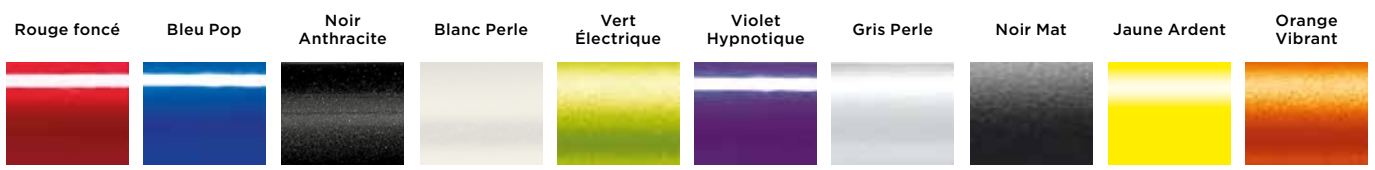

## Revêtement du siège

Nylon Noir / Mesh Gris



## Colour accents

Bleu Violet

