



rea

Confidence in posture solutions

rea

Dahlia[®]

Une myriade d'avantages
tout en un !

Trusted Solutions,
Passionate People



Yes, you can.®

Invacare® Rea **Dahlia**, avec sa faible largeur hors tout et son design moderne, propose de nombreuses possibilités de réglages et d'inclinaisons. Polyvalent, ce fauteuil roulant multi-positions est idéal pour les utilisateurs à la recherche de mobilité et de maniabilité tout en ayant un niveau de confort optimal. Le **Dahlia** dispose de deux angles d'inclinaison d'assise, soit de 30° soit de 45°, et d'une inclinaison de dossier de 30° ce qui améliore les capacités de positionnement et permet de faire varier les points de pression. Le **Dahlia** partage de nombreux éléments avec les autres fauteuils de la famille Rea ce qui facilite sa personnalisation.



Un transfert de poids tout en douceur

La bascule d'assise à 45° permet un soulagement important des zones de pression les plus vulnérables de l'utilisateur.

La conception unique du mécanisme d'inclinaison permet de basculer l'assise en douceur, nécessitant peu de force musculaire pour la tierce personne.


Un fauteuil au service de la mobilité

Le **Dahlia** équipé de la bascule d'assise à 30° est adapté aux utilisateurs plus actifs qui ont notamment la capacité de se propulser. La hauteur sol/siège peut être réduite à seulement 330 mm pour ainsi permettre à l'utilisateur de se déplacer par traction podale. En option, l'utilisateur peut avoir accès à la manette d'inclinaison d'assise pour gérer de manière autonome sa position.

Les nombreux avantages du **Dahlia**

- Facile à manœuvrer par l'utilisateur grâce à des roues arrière positionnées au plus près de l'utilisateur.
- Largeur hors tout réduite (+180 mm par rapport à la largeur d'assise) pour un encombrement limité.
- Empattement réglable en continu pour gérer la position du centre de gravité de l'utilisateur et optimiser la maniabilité du fauteuil.
- Très sûr grâce au système DSS qui assure la stabilité du fauteuil dans toutes les positions de bascule d'assise.
- Facile à incliner grâce à des mécanismes fluides et nécessitant peu d'effort.
- Nombreux éléments compatibles avec les fauteuils Invacare.

Caractéristiques et options

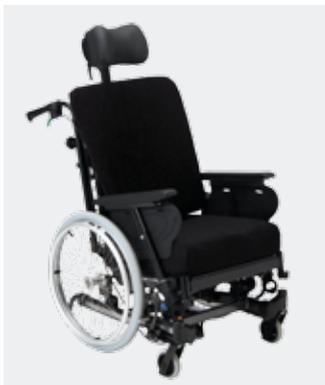

Dahlia 30° avec hauteur d'assise à partir de 330 mm pour permettre la traction podale.



Dahlia 30° avec auto inclinaison d'assise pour l'utilisateur qui peut changer de position de manière autonome. Disponible avec accoudoirs réglables en largeur ou fixes.



Dahlia 45° pour un transfert des points de pression optimal.



Dossier inclinable à 30° avec système de compensation pour limiter les effets de cisaillement.

Caractéristiques et options



Sur le **Dahlia** 30°, les 10 premiers degrés d'inclinaison d'assise se font avec une prise de hauteur limitée au niveau des genoux de l'utilisateur.



Sur le **Dahlia** 45°, bascule d'assise et de dossier électrique en option qui offre plus d'autonomie à l'utilisateur et facilite les inclinaisons pour la tierce-personne.



Dossiers de positionnement **Matrix® Elite, Elite Deep** et **Elite TR** disponibles.



Des entretoises d'extension disponibles en option permettent d'élargir la largeur entre les tubes de dossier indépendamment de la largeur d'assise.



En option: Plaques d'extension de la profondeur d'assise de manière asymétrique permettant une personnalisation optimale de l'assise.



Profondeur et largeur d'assise réglables.



Nouveau dossier réglable en tension Laguna 2.



La largeur hors tout du **Dahlia** rivalise avec les fauteuils actifs les plus étroits ! Sa compacité facilite grandement son utilisation dans des endroits exigus.



Tube basculeur en option.



Le centre de gravité est ajustable pour optimiser la maniabilité et la stabilité du fauteuil.



Les anti-basculés sont escamotables vers l'intérieur par la tierce personne sans se baisser.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	UL	Bascule d'assise
<i>Rea Dahlia</i>	390-440/440-490/ 490-540 mm 16" (390-490/440-540/ 490-590 mm)	430 - 500 mm	30° : 330 - 500 mm 45° : 350 - 500 mm	500 - 800 mm (sans coussin d'assise)	250 - 320 mm	330 - 500 mm	30°: -1 - 30° 45°: 0 - 45°

	Inclinaison de dossier	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Largeur hors-tout avec potence	Poids du fauteuil	Poids max. utilisateur	Poids de transport
<i>Rea Dahlia</i>	0° - 30°	Largeur d'assise + 160 mm (16") + 180 mm (24")	30°: 825 - 1250 mm 45°: 850 - 1250 mm	900 - 1180 mm	>35kg ¹	Max 135 kg	Poids de transport 21/25 kg (largeur d'assise 39 cm)

	Rayon de giration ³	Pente maximale d'utilisation de freins de stationnement
<i>Rea Dahlia</i>	755 mm	7°

Pour plus d'informations concernant les options et les accessoires, consultez la brochure Accessoires *Dahlia*.


1. Poids total avec configuration la plus légère et largeur d'assise de 39 cm
2. Component Cross-Compatibility: nombre éléments communs avec les produits de la famille *Invacare® Rea*.




Rea, Rea Design et DSS Design sont des marques déposées par Invacare International. Le Rea Dahlia est conçu avec le DSS. Il fournit à l'utilisateur stabilité et sécurité lors de l'inclinaison d'assise ou de dossier.

Coloris de châssis

Noir

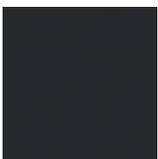

Gris

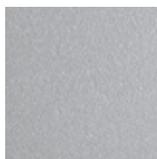

Bleu



Champagne



Rouge




Vert pétrole



Revêtement du siège

Dartex noir
TR26

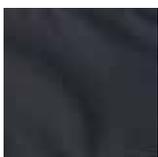

Velour noir
TR35



Mesh micro-aéré
noir TR36



Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.