



rea

Confidence in posture solutions

rea

Azalea[®] Max

La solution pour les
utilisateurs à forte corpulence

Trusted Solutions,
Passionate People



Yes, you can.®

Azalea Max a été développé dans le but de répondre aux besoins des utilisateurs de forte corpulence. Nous préconisons l'utilisation de l'option inclinaisons d'assise et de dossier électriques pour faciliter le changement des inclinaisons. Le **Rea Azalea Max** est un fauteuil complémentaire de la gamme de fauteuils **Invacare Azalea**.

Un membre de la famille Rea

Le **Rea Azalea Max** offre toutes les caractéristiques déjà présentes sur le fauteuil **Rea Azalea**, et reprend notamment le système d'inclinaison à compensation avec maintien du centre de gravité DSS (Dual Stability System). La répartition parfaite du poids du corps entre le dossier et les repose-jambes permet d'assurer une très bonne stabilité.

Poignées à pousser courbées ergonomiques

La forme spécifique de ces poignées à pousser s'adapte parfaitement aux tierce-personnes. Une version alternative avec des poignées plus hautes est également disponible en option.

Caractéristiques et options



Dossier double courbure

Le dossier est réversible, permettant de choisir entre une courbure basse pour les utilisateurs lordosés ou gynoïdes (femmes) ou une courbure haute pour les utilisateurs souhaitant une grande ouverture de bassin ou androïdes (hommes).



Palette spécifique

Repose-pieds escamotable et démontable en trois parties. Partie centrale amovible.



Inclinaisons d'assise et de dossier électriques

Grâce à sa télécommande, l'utilisateur ou la tierce-personne peut facilement changer les inclinaisons du fauteuil.

Données techniques

Pour les personnes ayant une déficience visuelle, toutes les informations sont disponibles sur www.invacare.fr.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise avant	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	UL	Pente d'assise	Angle de dossier
Rea Azalea Max	550; 610 + 50 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 500 mm	1° - 20°	0°-30°
Rea Azalea Max Assist	550; 610 + 100 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 500 mm	1° - 20°	0°-30°


	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Longueur hors-tout avec potences	Poids du fauteuil	Poids max utilisateur	Poids de transport	Pente maximale pour l'utilisation des freins de parking
Rea Azalea Max	L. d'assise+250mm	1020-1240 mm	1050 - 1120 mm	54 kg ¹	max. 180 kg	33 kg	7°
Rea Azalea Max Assist	L. d'assise+220mm	1020-1240 mm	1050 - 1120 mm	54 kg ¹	max. 180 kg	37 kg	7°

1. + 4,2 kg pour un fauteuil équipé de l'option inclinaisons d'assise et de dossier électriques

Coloris de châssis



Revêtement du siège

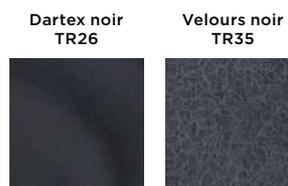

Tél. : +33 2 47 62 64 00
 Fax : +33 2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
 Route de Saint Roch - 37230 Fondettes
 France

