

Invacare® | **Matrix® Flo-tech® Solution Xtra**




Le coussin **Solution Xtra** est un coussin en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m³. La nappe de gel est complète et recouvre toute la base en mousse HR, sa conception est brevetée car dotée de poches individuelles sous chaque ischion pour prévenir les risques de talonnement et assurer un maximum de prévention par immersion dans le gel. Le gel fluide permet d'assurer un positionnement stable tout en assurant une prévention d'escarres pour risque élevé. La base en mousse est galbée pour favoriser le bon alignement des cuisses et est dotée de velcro pour permettre le rajout de cales.

Le traitement anti-bactérien **Ultra Fresh™** est désormais appliqué au coussin **Matrix Flo-tech Solution Xtra**. Ce traitement limite la prolifération des bactéries et rend ainsi la mousse encore plus résistante aux odeurs et aux moisissures.



Yes, you can.®

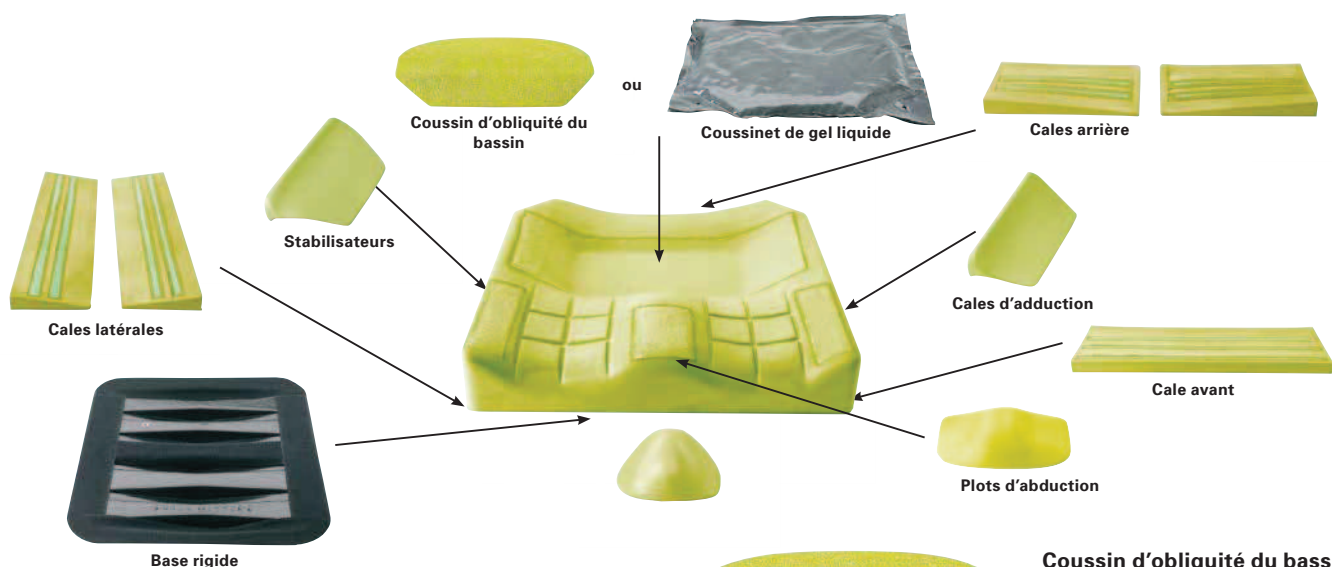

AP1487157

Cale avant

Aide à stabiliser le bassin. Lutte contre une rétroversion éventuelle du bassin. Permet de changer l'angle d'assise. Compatible **Image & Solution Xtra**



AP1487162/AP1487163

Plots d'abduction

"Finalise" l'alignement des 2 fémurs et empêche les 2 faces latérales internes des genoux de se frotter l'une contre l'autre. Maintient les articulations des hanches dans une bonne position. Existe en 2 tailles. Compatibles **Solution Xtra**



AP1487165

Base rigide

Lutte contre l'effet hamac d'une assise en toile. Stabilise le bassin sur un plan horizontal. Compatible **Image & Solution Xtra**



AP1487155

Cales latérales

Améliorent la stabilité latérale pelvienne. Participent à la rotation interne des hanches. Compatibles **Image & Solution Xtra**



AP1487164

Coussin d'obliquité du bassin

Permet de suivre ou de corriger une obliquité du bassin. Compatible **Image & Solution Xtra**



AP1487166

Coussinet de gel liquide

Limite la pression sur les ischions en cas de glissement vers l'avant. Idéal pour lutter ou suivre une faible obliquité du bassin. Compatible **Image & Solution Xtra**



AP1487158

Cales arrière

Empêchent la rotation externe des hanches. Participent à l'alignement des cuisses. Compatibles **Image & Solution Xtra**



AP1487160

Cales d'adduction

Réduit l'abduction et la rotation externe des hanches en guidant l'alignement des fémurs. Stabilisent les fémurs. Compatibles **Solution Xtra**



AP1487161

Stabilisateurs

Favorisent l'alignement des hanches. Le long d'un axe médian en guidant l'alignement des 2 fémurs le long de l'assise. Stabilisent le bassin. Compatibles **Solution Xtra**

Caractéristiques techniques



Matrix Flo-tech Solution Xtra Largeur : 360 à 600 mm



Profondeur : 330 à 550 mm



Hauteur 60 mm



Poids A partir de 3,08 kg



Poids max 140 kg



Lavage machine 80°