



Invacare® | **Action<sup>®3</sup><sub>NG</sub> et Action<sup>®3</sup><sub>NG</sub> Light**

Encore plus léger, compact,  
et multi-configurable !



Le mythique **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** est facile à configurer et offre une large gamme d'options et d'accessoires intercompatibles pour répondre aux différents besoins des utilisateurs.

Grâce à sa plateforme commune et son intercompatibilité avec les autres produits de la famille **Action**, il permet d'être facilement réutilisé et de s'adapter aux besoins des utilisateurs.

- **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light** : le fauteuil roulant le plus léger de la gamme **Action**
- Une meilleure stabilité pour une conduite plus agréable
- Une conception améliorée pour un meilleur positionnement



### Léger et transportable

Déjà le fauteuil roulant manuel le plus léger de sa catégorie, l'**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** peut s'alléger encore de 1.2kg grâce aux supports de fourche allégés et aux nouvelles roues arrière Actives proposées de série sur le modèle **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light**. En plus de son faible poids qui facilite le transport, l'**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light** propose également un dossier rabattable sur l'assise qui permet de réduire un peu plus l'encombrement pour qu'il puisse rentrer dans la plus petite des voitures.

### Confort et fonctionnalité

Le mécanisme du dossier rabattable de l'**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light** rend le transport du fauteuil plus facile. La gâchette de verrouillage des accoudoirs facilite le déverrouillage et les transferts ce qui fait de l'**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** et **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light** un excellent choix pour un maximum de confort.



### Configurable et modulaire

L'intercompatibilité des accessoires et des options à travers toute la famille **Action** fait que chaque fauteuil est configurable et modulaire. Par conséquent, l'**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** s'adapte parfaitement à l'évolution des besoins de l'utilisateur et propose de nombreuses options de personnalisation.

### Créé pour s'adapter

De nouvelles **couleurs tendances** et un nouveau revêtement de dossier apportent encore plus de possibilités de personnalisation pour les utilisateurs. La nouvelle conception optimisée des toiles de dossier bi-matière noires permet désormais de s'adapter parfaitement autour des cannes de dossier pour un plus grand confort. Les toiles de dossier réglables en tension une sangle et quatre sangles bi-matière noires disposent d'une sangle lombaire réglable en hauteur ce qui offre un meilleur positionnement pour les utilisateurs.



### Légereté

Avec un poids standard de 14.2kg et un poids de transport de 7.5kg (sans les repose-jambes, les accoudoirs et les roues arrières) l'**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** répond aux besoins en matière de transport, de stockage et de praticité. De plus, le fauteuil **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light** offrant une configuration plus légère permet d'obtenir un poids de fauteuil complet à partir de 13 kg !



### Poignée de freins

Les poignées de freins de la famille **Action** sont escamotables pour faciliter les transferts latéraux.



### Repose-jambes à compensation

Réglable en inclinaison de 0° à 80° par pas de 5°. Blocage automatique à l'angle souhaité. Appui-mollets réglables en hauteur et en profondeur.



### Protège-vêtements

La nouvelle découpe des protège-vêtements avec leur poignée d'appui ergonomique facilite les transferts.



### Accoudoirs relevables et amovibles

La nouvelle gâchette de verrouillage sur les accoudoirs relevables et amovibles permet un déverrouillage rapide même avec des fonctions limitées au niveau de la main.



### Dossier réglable en angle et rabattable

Notre technologie unique et breveté provenant de l'**Action<sup>5</sup>** permet un réglage en angle du dossier avec l'utilisateur assis dans son fauteuil. Le réglage en continu de l'angle de -15° à +15° du dossier facilite les essais et l'adaptation du fauteuil aux besoins de chaque utilisateur. L'échelle de réglage en angle du dossier est intégrée au système pour plus de précision. La fonction rabattable du dossier permet de réduire l'encombrement du fauteuil pour le stockage.



### 20 positions de roues arrière possibles

Possibilité d'ajuster la hauteur d'assise ainsi que le centre de gravité.



### Dossier inclinable par vérin

Le vérin gaz permet une inclinaison en continu et en douceur pour l'utilisateur et assiste la tierce personne.



## Caractéristiques et options

200x30



150x30



125x30



### Roues avant


Les roues avant sont disponibles en 5", 6" et 8" pneumatique ou bandage avec des largeurs différentes. Désormais les roues de 6" et 8" sont disponibles en bandage noir non marquant.

## Les coussins d'assise

### Les coussins d'assise

Invacare propose une large gamme de coussins d'assise qui répondent aux besoins de chaque utilisateur. La gamme s'étend du coussin à prévention d'escarres modérée aux coussins à très haute prévention comme le coussin de positionnement **Invacare Matrix Libra**.

Retrouvez toute notre gamme de coussins et de dossiers de positionnement sur notre site internet.

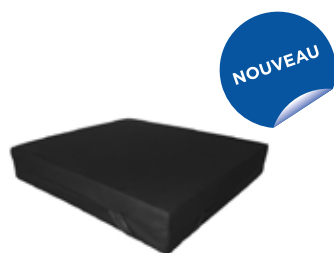

### Coussin d'assise **Classic Visco**

Coussin 100% en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Plat et réversible. Disponible en option montée. 4 tailles au choix qui s'adaptent parfaitement aux dimensions de l'assise du fauteuil.



### Ceintures de positionnement **Bodypoint®**

Ceintures 2 points ou 4 points rembourrées et confortables pour un bon positionnement. Disponibles en option montée.

### Les types de dossiers

En plus du dossier fixe, (0° ou 7°), l'**Action<sup>3</sup> NG** offre 4 types de dossiers différents pour répondre aux besoins des utilisateurs :

- ① Dossier pliant à mi-hauteur
- ② Rabattable et réglable en angle (-15°/+15°)
- ③ Inclinable par crémaillères (0°/30°)
- ④ Inclinable par vérins (0°/30°)



### Toiles de dossier bi-matière noires

Cette nouvelle toile de dossier réglable en tension bi-matière entièrement noire a été optimisée pour épouser entièrement les cannes de dossier. La sangle lombaire est désormais ajustable en hauteur par velcro pour les dossiers réglables en tension une sangle et quatre sangles. Elle permet un meilleur positionnement.



### Les accoudoirs

- ① Relevables et amovibles, ② Relevables, amovibles et réglables en hauteur. ③ ④ et ⑤ Amovibles et réglables en hauteur ⑥ Manchettes confort, ⑦ Gouttières, ⑧ Garde-boues amovibles et réglables en hauteur.

### Accoudoirs tubes

Les nouveaux accoudoirs tubes escamotables peuvent être choisis en option pour donner un look encore plus actif à l'**Action<sup>3</sup> NG Light**. Ils sont systématiquement livrés avec des garde-boues.



### Invacare **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light**

Le fauteuil le plus léger de la gamme **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>**. Il offre de série des roues arrière Actives, des supports de fourche allégés en aluminium et une toile d'assise réglable en tension 4 sangles bi-matière noire. Poids du fauteuil complet à partir de 13 kg !



### Invacare **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Matrix**

Fauteuil équipé des dossiers **Matrix Elite, Elite Deep** et coussins de positionnement **Solution Xtra, Vi** et **Libra**.



### Invacare **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Levier Pendulaire**

Ce système de propulsion apporte aux utilisateurs ayant des capacités musculaires limitées la possibilité de se propulser facilement avec un seul bras.



### Invacare **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Dual HR™**

Système breveté de double main courante doté d'un démontage plus rapide des roues arrière et d'une plus grande précision de conduite grâce à un jeu mécanique réduit au niveau du cardan. La main courante intérieure est réversible pour s'adapter à chaque utilisateur. Ce fauteuil est spécialement conçu pour les utilisateurs hémiplegiques.



### Invacare **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Comfort**

Fauteuil léger configurable de confort. Assise et dossier en Dartex. Dossier enveloppant pour un maintien optimal.



### Invacare **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Transit**

La version Transit offre une hauteur d'assise de 460, 485 et 510 mm avec des roues arrière bandage gris de 12". Largeur hors-tout = largeur d'assise + 160 mm. Disponible en dossier inclinable ou dossier pliant à mi-hauteur.

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Pente d'assise	Hauteur d'assise	Angle de dossier	Hauteur du dossier	Angle des potences
<i>Invacare Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> et Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light</i>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	7° / 0° - 30° / -15° - +15°	325 - 510 mm	80° / 0 - 80°
<i>Invacare Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Transit</i>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	7° / 0° - 30°	430 / 510 mm	80° / 0 - 80°

	UL	Hauteur des accoudoirs	Largeur hors-tout	Largeur pliée hors-tout	Longueur hors-tout avec potence	Longueur hors-tout sans potence	Hauteur hors-tout
<i>Invacare Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> et Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light</i>	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Largeur d'assise + 190 mm	295 mm	980 - 1105 mm	835 - 960 mm	820 - 1050 mm
<i>Invacare Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Transit</i>	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Largeur d'assise + 160 mm	260 mm	950 - 1050 mm	710 - 910 mm	920 - 1050 mm

	Pente max. de stabilité	Rayon de giration	Poids max. utilisateur	Poids du fauteuil	Poids de transport
<i>Invacare Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> et Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light</i>	9°	870 mm	125 kg	14.2 kg <i>Action<sup>3</sup><sub>NG</sub></i> 13 kg <i>Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light</i>	7.6 kg <i>Action<sup>3</sup><sub>NG</sub></i> 7.1 kg <i>Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light</i>
<i>Invacare Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Transit</i>	9°	870 mm	125 kg	13.5 kg	10.7 kg



### Coloris de châssis

Violet Hypnotique



Noir Mat




Bleu Pop




Rouge Mat




Nylon Noir

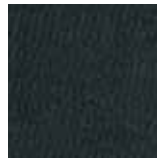

Blanc Perle




Gris Ardoise



Vert Electrique



Noir Anthracite



Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

Tel : +33 2 47 62 64 00  
Fax : +33 2 47 42 12 24  
[contactfr@invacare.com](mailto:contactfr@invacare.com)  
[www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)

Invacare Poirier S.A.S  
Route de Saint Roch - 37230 Fondettes  
France

Trusted Solutions,  
Passionate People

