

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

UNIQUE

Le Champion peut s'adapter facilement en fonction des besoins de son utilisateur. Il offre 9 positions du centre de gravité et des hauteurs d'assise arrière réglables de 390 à 480 mm grâce aux 5 positions différentes de ses platines porte-axes.



HYBRIDE

Grâce à son mécanisme de pliage, le Champion offre d'excellentes performances de conduite. Parfaitement pensé, ce fauteuil pliant dispose de la même rigidité que celle d'un fauteuil à cadre rigide.

SUPER COMPACT

Super compact avec l'option SK "châssis avant rabattable": le châssis se plie sous l'assise pour encore plus de compacité.



CHÂSSIS AVANT HYDROFORMÉ


La nouvelle technologie d'hydroformage offre des poignées ergonomiques sur l'avant du châssis pour aider les utilisateurs à se repositionner et à se transférer.

PERSONNALISATION


1 CHOISISSEZ LE COLORIS DE CHÂSSIS



2 CHOISISSEZ LE STYLE DE DÉCALCOMANIE

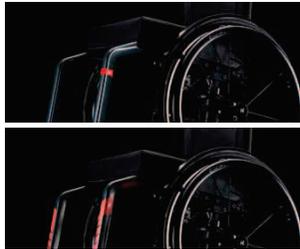

3 CHOISISSEZ LE COLORIS DE DÉCALCOMANIE

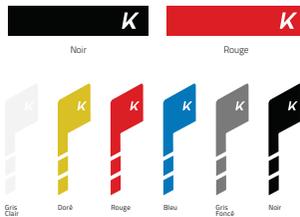

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR D'ASSISE
360 - 480 mm
Par paliers de 20 mm



PROFONDEUR D'ASSISE
340 - 480 mm
Par paliers de 20 mm



DISTANCE UL
320 - 500 mm
Réglage en continu



HAUTEUR DE DOSSIER
300 - 465 mm
Par paliers de 15 mm



ANGLE DE DOSSIER
76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



HAUTEUR D'ASSISE
Avant: 450 - 540 mm
Arrière: 390 - 480 mm
Réglage en continu



ANGLE DE CHÂSSIS
75° / 90°
Châssis droit ou avant rétracté



POSITION DU CENTRE DE GRAVITÉ
9 positions



CARROSSAGE
0° / 1° / 3°



LONGUEUR TOTALE
Châssis 75°: approx. 930 mm
Châssis 90°: approx. 850 mm



LARGEUR TOTALE
Largeur d'assise
+ 160 - 240 mm



LARGEUR TOTALE PLIÉ
Approx. 280 - 340 mm



POIDS TOTAL
Approx. 9,2 kg



POIDS DE TRANSPORT
Approx. 6,7 kg



POIDS MAX DE L'UTILISATEUR
120 kg



Toutes les mesures et poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte possible dans une largeur d'assise de 400 mm et une profondeur d'assise de 400 mm. Les poids et les mesures peuvent changer en fonction de la configuration du fauteuil. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet.



UNLIMIT YOUR WORLD

TÉL : + 33 (0)2 47 62 69 16
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr
www.kuschall.fr

Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

Ce fauteuil roulant est destiné à fournir de la mobilité aux personnes limitées à une position assise et qui se propulsent par elles-mêmes, la plupart du temps. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui relève, au titre de cette réglementation, du marquage CE. Lire attentivement le manuel d'utilisation.

Kuschall est une marque déposée. Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, Invacare International GmbH se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés.
© Juin 2019, Invacare International GmbH. Tous les droits sont réservés. FR - 16282 20

Kuschall®
CHAMPION



UNLIMIT YOUR WORLD**

Chez Kuschall, nous pensons que rien n'est impossible lorsque vous avez le pouvoir de l'atteindre. Le Kuschall Champion vous offre une solution. Plus aucune limite pour vos aventures, vos performances, **Unlimit your world.**

KÜSCHALL CHAMPION

Le Kuschall Champion est le premier fauteuil **hybride** offrant des performances de conduite comparables à celles d'un fauteuil à cadre rigide tout en bénéficiant des avantages d'un fauteuil pliant. C'est l'association optimale entre un design moderne et des performances déjà reconnues. Avec l'option SK : "châssis avant rabattable", le Champion est encore **plus compact** : de la taille d'un sac à dos, et devient le compagnon de voyage idéal pour vos aventures.

HYDROFORMAGE

Rigidité et robustesse. Le châssis avant hydroformé sur le Kuschall Champion améliore les performances de conduite, augmente la rigidité et offre des poignées ergonomiques pour les transferts.

* Votre monde sans limite

CHÂSSIS AVANT HYDROFORMÉ

■ Performances de conduite optimisées grâce à moins de déformation, et une plus grande rigidité au niveau du châssis.

FREIN ACTIF LÉGER

■ Design épuré, précision dans les moindres détails.

SUPER COMPACT

■ L'option SK : "châssis avant rabattable" permet au Champion d'être aussi compact qu'un sac à dos.

Kuschall® CHAMPION

MAINS-COURANTES CARBOLIFE

■ La forme innovante et ergonomique de la main-courante vous permet de gagner en efficacité lors de la propulsion.

MÉCANISME DE PLIAGE HYBRIDE

■ Pliage du fauteuil complet, y compris le dossier, en un seul geste.

RÉGLAGES PRÉCIS

■ Position du centre de gravité et hauteur d'assise réglables pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.

KEEP ON TRACK**

■ Nouveau système de réglage de fourche pour une conduite précise.

** Réglage du parallélisme

