




FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT
BLOOD SAMPLING CHAIR

Deneo®.Lab

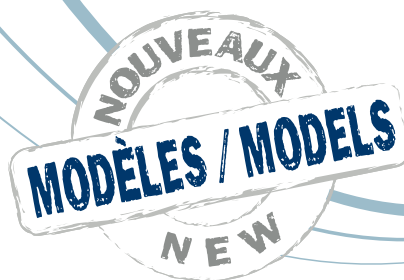

Version : 03-2014




DENE0® est un concentré d'innovations pour permettre une meilleure accessibilité du patient aux soins et un plus grand confort pour le patient et le praticien. La conception du DENE0® est le résultat d'un long travail de recherche et de nombreuses rencontres sur le terrain avec les professionnels des laboratoires. Cette recherche s'est concrétisée par une demande de brevet et le dépôt de modèles.

DENE0® is a very innovative product allowing the best patient accessibility to care and the greatest comfort for both the practitioner and the patient. The design of DENE0® is the result of a long research work and numerous tests in the field with phlebotomy professionals. This research ended up with several patents.

CONFORT COMFORT

- Rotation 360° (sur certains modèles)
- Encombrement réduit, optimisation de l'espace
- Sellerie **Bodyshape®** : positionnement naturel
- 360° rotation (on specific models only)
- Reduced volume, optimized space
- **Bodyshape®** upholstery: natural body position

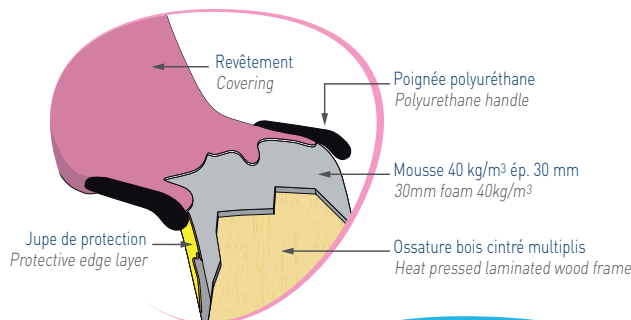

HYGIÈNE HYGIENE

- Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- Nettoyage facilité
- Sellerie sans couture
- Poignées amovibles
- Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)
- Easy to clean
- Seamless upholstery
- Removable handles



SÉCURITÉ / SAFETY

- Position d'urgence facilitée, sans effort et rapide
- Appui-bras sur le dossier et poignées intégrées → longévité
- Base circulaire : stabilité du fauteuil
- Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- Capacité patient : 200 kg
- Easy, effortless and rapid emergency position
 - Armrests on the backrest and integrated handles → long service life
 - Circular base: chair stability
 - M1 fire retardant upholstery (depending on the color, see color chart)
 - Maximum capacity: 200 kg

Modèle déposé
Registered model

ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- Concept **Sit'n Go®** : position d'accueil à 50 cm du sol (selon modèles)
- Angle de l'appui-jambes modifié pour un accès facilité
- **Sit'n Go®** concept: welcome position at 50 cm from the ground (specific models)
- New legrest angle for easier access

Concept **Sit'n Go®** (selon modèles) / **Sit'n Go®** concept (specific models)



Le patient s'appuie sur les 2 poignées latérales et le fauteuil se met en position d'accueil.
The patient positions his hands on the lateral grips and the seat lowers to facilitate the entry.



Le fauteuil reprend sa position sans aucune intervention du praticien.
When the patient leans back, the chair automatically swings back to a comfortable position.



La **position d'urgence** peut être obtenue à n'importe quel moment tout en maintenant la position des bras par rapport au corps.
Effortless, the **emergency position** is obtained at any time, without effort for the practitioner.



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur fixe (assise 50 cm)
et hauteur variable hydraulique (assise réglable de 51 à 71 cm)
Structure et base circulaire en acier finition époxy gris nuage
(sauf réf. 80010-02R et 80015-02R)
2 poignées polyuréthane intégrées au niveau de l'assise
Sellerie monobloc sans couture, revêtement M1
mousse épaisseur 30 mm, densité 40 kg/m³
2 appui-bras amovibles, incurvés sur rotules
avec mousse et revêtement M1 thermoformé sans couture
Poids maximum du patient autorisé 200 kg
(testé en statique à 500 kg)

STANDARD FEATURES

Fixed height (seat at 50 cm)
and hydraulic variable seating height from 51 to 71 cm
Light grey epoxy covered steel for the base and structure
(except ref. 80010-02R and 80015-02R)
Two lateral polyurethane hand grips integrated to the seat
One-piece structure seamless upholstery
foam thickness 30 mm, density 40 kg/m³
Two removable formed armrests. Swivel adjusting system.
Seamless heat formed M1 covering
200 kg patient weight capacity
(tested at a static weight of 500 kg)




NOUVEAUX
MODÈLES / MODELS
NEW


Modèles Models	Hauteur fixe base circulaire Fixed height circular base	Hauteur fixe base 4 roues ø 50 mm Fixed height base 4 castors ø 50 mm	Hauteur variable hydraulique Hydraulic variable height	Avec rotation With rotation	Concept Sit'n Go®
80000-02R	●			●	●
80010-02R		●		●	●
80070-02R			●	●	●
80005-02F	●				
80005-02R	●			●	
80015-02R		●		●	
80075-02R			●	●	

Tous ces modèles bénéficient du nouvel angle de l'appui-jambes pour faciliter l'accès.
All these models feature the new legrest angle for easier access.

Optimiser l'espace Optimize space

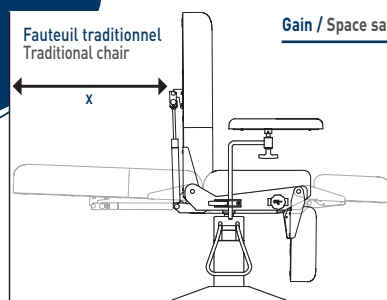

Gain / Space saving

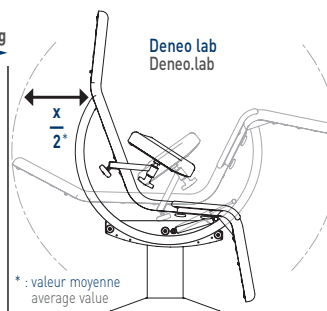

* : valeur moyenne
average value

La rotation 360° permet
au praticien de prélever
sur l'un ou l'autre bras
sans se déplacer.

The 360° rotation
allows easy transition to
the opposite side of the
patient without
moving.




Accessoires Accessories



167-10
Porte-rouleau
(long. maxi 50 cm, ø 20 cm)
Paper roll holder
(length max 50 cm, ø 20 cm)



964
Plateau seul
Stainless steel pan
(240 x 180 x 30 mm)

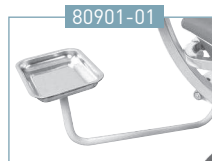


80901-01
Plateau avec bras rigide
pivotant (droite / gauche)
S/S pan with swivelling arm
(right / left)



80902-01
Plateau avec bras flexible
pivotant (droite / gauche)
S/S pan with flexible
swivelling arm (right / left)



80905-01
Protection plastique
(côté jambes)
Plastic covering (leg
section)

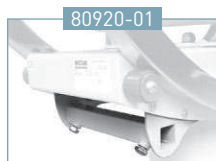

80920-01
Support pour étaux
(côté jambes ou tête)
Clamp support
(leg or head side)



80921-01+80920-01
Étau pour accessoires
ø 16 mm
Clamp for accessories
ø 16 mm



Lampes
Lamps
80921-01+80920-01
Se référer à la
documentation
Refer to the literature



2985-01+80921-01
Tige porte-sérum
autobloquant 2 crochets
Auto-locking 2 hook IV pole



80523-01
Tabouret
Stool
hauteur/height
mini : 47 cm / maxi : 66 cm



80542-01
Pouf
Pouffe
hauteur/height
52 cm



80906-01
Protection plastique
(côté tête)
Plastic covering
(head section)

Choix de selleries non-feu M1
Antibactérien
 Choice of M1 fire retardant
 and antibacterial upholstery

Classic

32 - BLEU / BLUE

93 - COTTAGE / COTTAGE

35 - ROUGE / RED

34 - JAUNE / YELLOW

91 - BLANC / WHITE

92 - MARINE / MARINE

56 - OBSCURE / DARKNESS

57 - ANTISTATIQUE / ANTISTATIC
 Non classé M1 / Not classified M1

Vitamin

64 - RAISIN / GRAPE

67 - LAGON / LAGOON

66 - BONBON / SWEET

63 - CEDRAT / CEDRAT

Cosy

80 - CIEL / SKY

81 - VERT D'EAU / SEA GREEN

65 - LILAS / LILAC

96 - ETAIN / TIN

82 - GRIS SOURIS / MOUSE GREY

83 - NATUREL / NATURAL

84 - CHOCOLAT / CHOCOLATE

Selleries RITTER
 RITTER upholstery
 Non classé M1
 Not classified M1

C1 - NAVY

C2 - DUSTY BLUE

C3 - MOSS

ANTIBACTÉRIEN / NON FEU M1 - ANTIBACTERIAL / M1 FIRE RETARDANT



Hauteur fixe
 Fixed height

Poids net
 Net weight
 53 kg

Poids brut
 Gross weight
 67 kg

Volume 1,164 m³


Hauteur variable hydraulique
 Hydraulic variable height

Poids net
 Net weight
 60 kg


Poids brut
 Gross weight
 74 kg

Volume 1,164 m³


Hauteur fixe / Fixed height

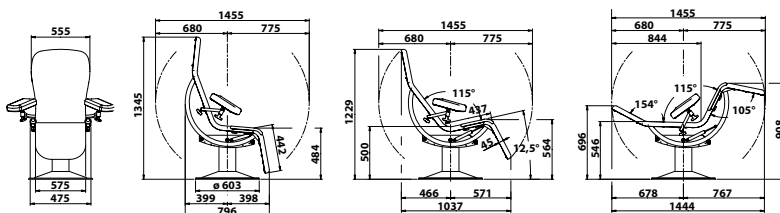


Hauteur variable hydraulique / Hydraulic variable height

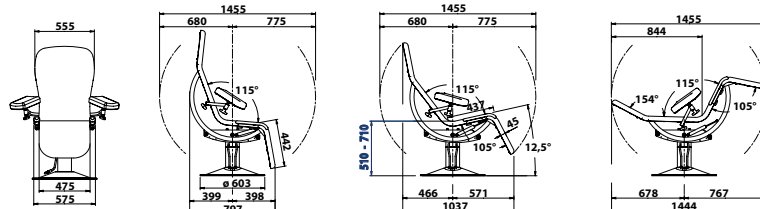

Hauteur fixe sur base 4 roues / Fixed height with 4 castors base

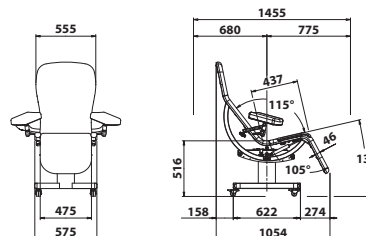

FE-12/14

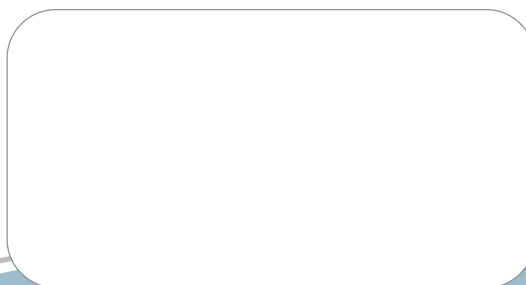

Midmark Europe SAS
 22, rue de Saint-Denis - 53500 Ernée
www.promotal.com

