



TABLE GYNÉCOLOGIQUE ÉLECTRIQUE
ELECTRIC GYNECOLOGICAL TABLE

ELANSA



Version : 03-2014




ELANSA

L'EFFICACITÉ
ET LA SIMPLICITÉ D'UTILISATION
THE EFFICIENCY EASY TO USE

CONFORT COMFORT

- 1 moteur électrique
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Ancrages bilatéraux pour colposcope
- Mouvement combiné de l'élévation et du dossier
- Commande au pied (commande programmable en option)
- 1 actuator
- Gas-spring assisted backrest
- Bilateral receptacle for optional colposcope holder
- Combined motion of the height and backrest
- Foot control (programmable foot control as an option)

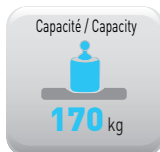

SÉCURITÉ SAFETY

- Capacité 170 kg
- Position d'urgence 11°
- Borne d'équipotentialité : permet l'égalisation des potentiels entre différents dispositifs électromédicaux
- Capacity 170 kg
- Emergency position 11°
- Equipotential bonding conductor: enables to equalise the potentials between different electromedical devices




HYGIÈNE HYGIENE

- Sellerie anatomique sans couture monobloc
- Sellerie amovible
- Structure inox époxy sous assise
- Carters ABS sur la base
- Support rouleau papier
- Bac ABS stérilisable
- Bac coulissant et amovible
- Coussin d'assise étanche
- Roulettes à freins (option)
- Formed seamless upholstery in one piece
- Removable upholstery
- S/S epoxy coated structure under the seatrest
- ABS carter on the base
- Paper roll holder
- Sterilisable ABS bowl
- Sliding and removable bowl
- Waterproof seatrest
- Casters with brakes (option)

Modèle présenté avec options/accessoires
Products shown with options/accessories

ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- Hauteur variable électrique de 46 à 106 cm
- Décrochement de la base pour s'approcher du patient
- Possibilité de pratiquer un examen général (coussin en accessoire)
- 3 modèles pour s'adapter à toutes les pratiques (Étriers, Goepel, Repose-pieds)
- Variable height from 46 to 106 cm
- Cutout in the base for more accessibility to patient
- Versatility of the table (gynecology and general examination with the cushion as accessory)
 - 3 models to adapt to various practices (Stirrup, Goepels, Footrests)

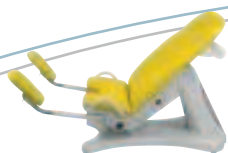

Accueil
Welcome



Examen général
General examination



Gynécologie
Gynecology



Position d'urgence
Emergency position

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur variable électrique de 46 à 106 cm
Mouvements combinés de l'élévation et du dossier (1 moteur)
Inclinaison du dossier par vérin à gaz
Commande par pédale
Patins de réglage sous piètement
Bac ABS stérilisable, coulissant et amovible (capacité 6 litres)
Ancrage bilatéral pour option support colposcope
Structure inox avec finition époxy gris nuage sous assise
Carter ABS gris clair
Sellerie anatomique amovible sans couture
Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm - ø 12,5 cm)
Poids maximum du patient autorisé 170 kg
(testé en dynamique à 210 kg et en statique à 680 kg)

STANDARD FEATURES

Electric height adjustment from 46 to 106 cm
Combined height and backrest movements (1 actuator)
Gas-spring assisted backrest adjustment
Foot control
Adjustable levers under the base
Sterilisable, sliding and removable ABS bowl (capacity 6 litres)
Bilateral receptacle for optional colposcope holder
Stainless steel structure, under the seatrest, with light grey epoxy finish
Light grey ABS carter
Removable formed seamless upholstery
Paper roll holder (max. length 50 cm - ø 12,5 cm)
170 kg maximum patient weight capacity (tested at a dynamic weight of 210 kg and a static weight of 680 kg)

Modèles Models	Goepfels	Goepfels	Étriers Stirrups	Repose-pieds Footrest
11614-01				
11610-01				
11615-01				

Options*

* A demander impérativement
lors de la commande,
montage usine /
Plant installed, must be
ordered with initial order



1739
Commande par pédale
programmable
Programmable foot control



81036
4 roulettes ø 5 cm avec freins
(Hauteur + 5 cm)
4 castors ø 5 cm with brakes
(Height + 5 cm)

Accessoires Accessories



11910-01
Support accessoire ø 16 mm
Accessory holder ø 16 mm



+11910-01
Se référer à la
documentation
Refer to the literature




2985-01+11910-01
Tige porte-sérum autobloquant
2 crochets
Auto-locking 2 hook IV pole



11272-01
Coussin de pied amovible
avec son support mural
Removable leg cushion
with wall support
(pour/for 11610-01 & 11614-01)



11679-01
Appui-tête
Headrest

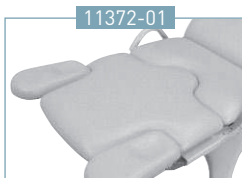

11372-01
Coussin d'obtuteur
avec support
Fill-in cushion with support
(pour/for 11615-01)



12677-01
Grille anti-éclaboussures
Splash guard cover



8850-01 8851-01
Support colposcope Olympus
Olympus colposcope holder
8850-01 : droit - right
8851-01 : gauche - left
Seulement pour 11614-01
Only for 11614-01



11840-01
Support colposcope Zeiss ø 38
Zeiss colposcope holder ø 38



11810-01
Support colposcope Leisegang
Leisegang colposcope holder

D'autres modèles
de supports colposcopes
sur demande
Other colposcope holders
available on request

**Choix de selleries non-feu M1
Antibactérien**
Choice of M1 fire retardant
and antibacterial upholstery

Classic

32 - BLEU / BLUE

93 - COTTAGE / COTTAGE

35 - ROUGE / RED

34 - JAUNE / YELLOW

91 - BLANC / WHITE

92 - MARINE / MARINE

56 - OBSCURE / DARKNESS

57 - ANTISTATIQUE / ANTISTATIC
Non classé M1 / Not classified M1

Vitamin

64 - RAISIN / GRAPE

67 - LAGON / LAGOON

66 - BONBON / SWEET

63 - CEDRAT / CEDRAT

Cosy

80 - CIEL / SKY

81 - VERT D'EAU / SEA GREEN

65 - LILAS / LILAC

96 - ETAIN / TIN

82 - GRIS SOURIS / MOUSE GREY

83 - NATUREL / NATURAL

84 - CHOCOLAT / CHOCOLATE

Selleries RITTER
RITTER upholstery
Non classé M1
Not classified M1

C1 - NAVY

C2 - DUSTY BLUE

C3 - MOSS


ANTIBACTÉRIEN / NON FEU M1 - ANTIBACTERIAL / M1 FIRE RETARDANT




Poids net
Net weight
95 kg

Poids brut
Gross weight
135 kg

Volume
0,92 m³

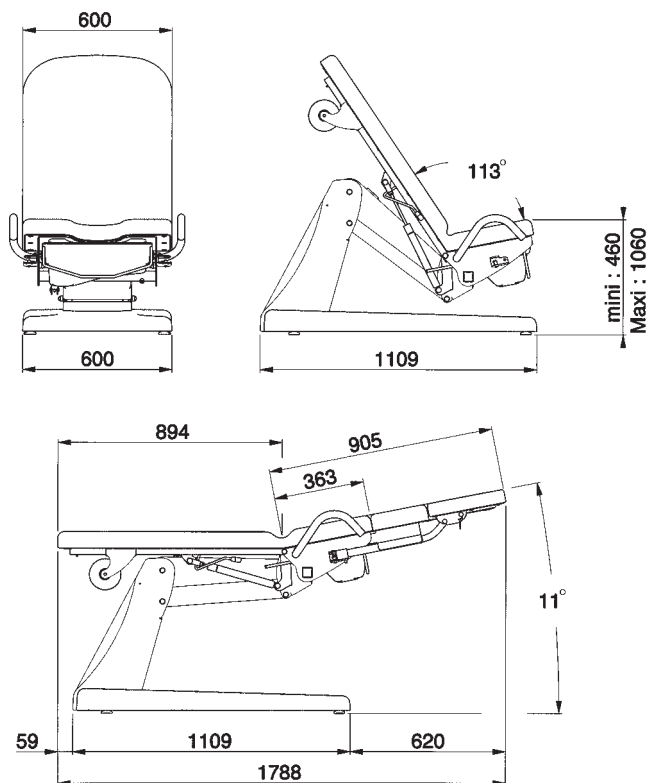

FE-12/14

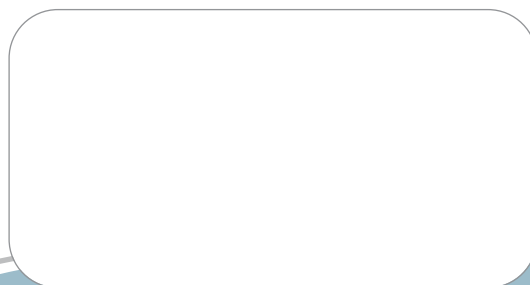

Midmark Europe SAS
22, rue de Saint-Denis - 53500 Ernée
www.promotal.com

