

Escape-Chair® VOLT

Chaise d'évacuation 100% électrique...

Qu'est-ce qu'une Escape-Chair® VOLT?

Une Escape-Chair® VOLT est une solution entièrement électrique pour évacuer des personnes en position assise sur les marches de l'escalier et dans les couloirs en toute sécurité. La simplicité d'utilisation vous permet d'être prêt en seulement quelques secondes.

Comment fonctionne une Escape-Chair® VOLT?

L'Escape-Chair® Volt est actionnée à l'aide d'un display fixé sur la poignée. Après l'avoir déplié, l'Escape-Chair® VOLT est immédiatement prête à l'emploi.

Le display avec ses boutons de commande est très facile à manier. L'opérateur n'a qu'à pousser la poignée de commande dans la direction des escaliers.

Lorsque vous arrivez aux escaliers, l'Escape-Chair Volt® descend la personne à évacuer sans effort particulier grâce à ses chenilles en caoutchouc.

Les avantages de l'Escape-Chair® VOLT :


- La motorisation électrique simplifie énormément une évacuation en montant les escaliers.
- Idéal pour une évacuation rapide (4 vitesses).
- La batterie est suffisante pour ±40 étages.
- Manipulation par une seule personne.
- Prête à l'emploi en quelques secondes.
- Facile à utiliser.
- Grands roues pour plus de confort
- Equipée de repose-pieds et accoudoirs
- Poignée réglable en hauteur sur 4 positions
- Indicateur de batteries.
- Eclairage LED pour l'évacuation dans un environnement sans lumière.
- L'Escape-Chair® VOLT est certifiée CE.

Notre conseil :

Assurez-vous de la présence d'une Escape-Chair® VOLT dans votre organisation. Comme ça vous êtes toujours prêt pour une évacuation rapide, optimale et en toute sécurité.

« La seule chose plus difficile qu'être préparé à une situation d'urgence est d'expliquer pourquoi on ne l'était pas »



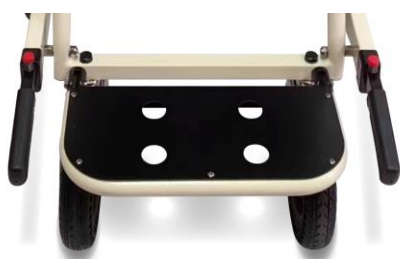

Spécifications	Escape-Chair® VOLT
Référence	10050
Dimensions pliées	109 x 63 x 29 cm
Charge maximale	180 kg
Angle maximal d'escalier	40°
Poids	±37,5 kg
Autonomie (batterie complètement chargée)	± 2 heures (± 40 étages)
Courroie dentelée:	Pour grip supérieure
Système de anti-blocage:	✓
Durée de vie de la batterie	± 2 –3 ans
Batterie supplémentaire	Optionnel
Support de montage pour crash test 10G pour les véhicules	Optionnel
Vitesses multiples	4
Prêt à l'emploi en quelques secondes	✓
Repose-pieds	✓
Accoudoirs	✓
Clairage LED	✓
Poignée télescopique à 4 positions	✓
Housse de protection résistants aux flammes	Optionnel
Poignées avant et arrière	✓
Certifié CE	✓
Livraison incl. Système pour fixation au mur	✓
Garantie, sauf pièces d'usure	1 ans (batterie 6 mois)

Sous réserve de modifications techniques intermédiaires. Nous ne sommes pas responsables d'éventuelles erreurs ou fautes d'impression.



Escape Mobility International BV

Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14 • NL 6416 SG • Heerlen • les Pays-Bas

T +31 (0)45 528 0670

info@escape-mobility.com

www.escape-mobility.com/fr