

permobil

COUSSIN ROHO®
HYBRID ELITE SR™



**LA STABILITÉ DE LA MOUSSE.
LA PROTECTION DE L'AIR.**

LE COUSSIN ROHO HYBRID ELITE SR A ETE CONÇU POUR DES PERSONNES QUI :

- ont des antécédents ou actuellement des lésions de la peau
- ont besoin d'aide pour régler leur coussin
- ont une sensibilité altérée
- souhaitent une plus grande stabilité d'assise
- nécessitent une base plus stable pour effectuer leurs transferts
- souhaitent avoir les membres inférieurs alignés



FONCTIONNALITÉS

Confiance et indépendance grâce au Smart Check

Ne vous souciez plus du niveau de gonflage de votre coussin. Même si votre corps change, le Smart Check vous permet de vérifier le niveau de gonflage afin de garantir des performances et une protection optimales.

**Positionnement**

La base en mousse profilée permet l'alignement et le contrôle des membres inférieurs et du bassin.

**Protection de la peau**

L'insert air du coussin Hybrid Elite SR enveloppe les tubérosités de l'ischion et la partie arrière des grands trochanters de ceux qui sont sujets aux escarres. La partie en mousse réduit l'effet de friction et de coupure, aidant à vous protéger contre les lésions cutanées. Il permet jusqu'à 7cm d'immersion.

**Stabilité**

La base en mousse profilée apporte un support rigide sous le bassin et les extrémités inférieures, afin d'améliorer l'équilibre et la posture assise. Ceci peut également permettre des transferts plus simples vers et hors de votre fauteuil roulant.



CARACTÉRISTIQUES

Constitution

L'insert air ROHO DRY FLOATATION est composé de cellules en néoprène remplies d'air. Il est ajustable et dispose d'un port de connexion rapide et d'une valve de gonflage en laiton nickelé. La base profilée du coussin est en mousse alvéolée dense de polyéthylène et résistante aux liquides. L'insert en mousse est en mousse polyuréthane HR et intégré dans une housse imperméable.

Livré avec:

Coussin Hybrid Elite SR, housse stretch réversible, insert en mousse, pompe de gonflage manuelle, kit de réparation et mode d'emploi. L'option Smart Check est disponible avec ou séparément.


Taille, Poids, Garantie

Taille : gamme large, s'ajuste aux largeurs de fauteuil allant de 14" à 24" / 36cm à 61cm

Poids du coussin : varie en fonction de la taille, environ 1,4 kg (pour les coussins de 17" x 18" / 43cm x 45,5cm)

Poids max utilisateurs : 225 kg

Garantie : coussin 2 ans / housse 6 mois / Dispositif Smart Check : 2 ans

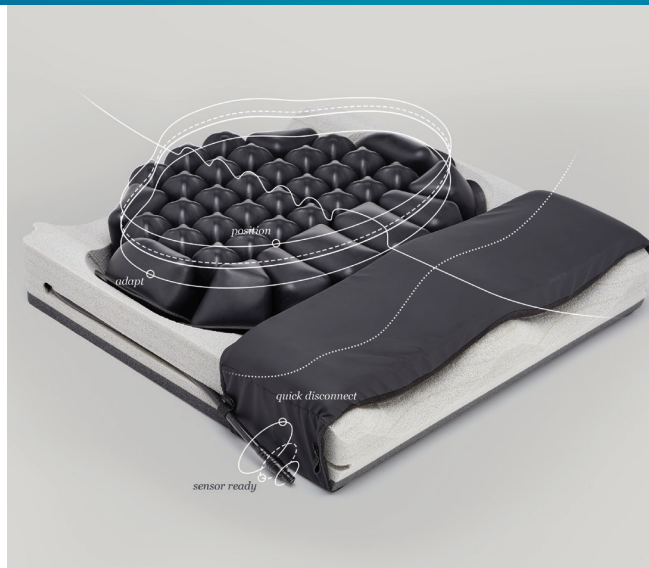

ROHO, Inc.: DRY FLOATATION®, Hybrid Elite SR™, Sensor Ready®, Shape Fitting Technology®, and Smart Check®, and ROHO®.



The Quality Management System of ROHO, Inc. is certified to ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.

permobil

Permobil France | 23-25 Rue de Villeneuve | 94150 RUNGIS | Tél : +33 1 73 09 1234
info@permobil.fr | permobil.fr

ROHO, Inc. has a policy of continual product improvement and reserves the right to amend in this document.

