


DISPOSITIFS D'AIDE À LA POSTURE EN MICROBILLES OU MICROFIBRES

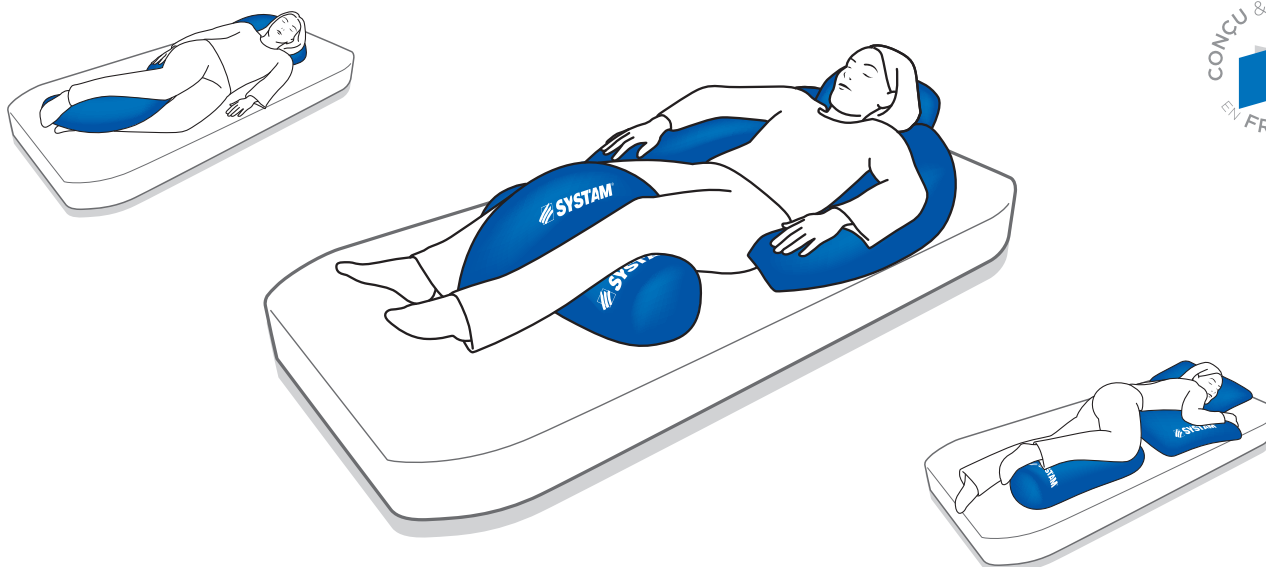

► DESCRIPTIF

Coussins de positionnement en Microbilles en Polystyrène Expandé de faible granulométrie ou fibres polyester.

► INDICATIONS

Aide à la posture.

► MATÉRIAUX DISPONIBLES



MICROBILLES EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

→ Matériau utilisé très léger : des microbilles en polystyrène expansé de très faible granulométrie pour un meilleur confort et une grande adaptabilité des supports à la morphologie des patients.
→ Traitement d'ignifugation

OU



MICROFIBRES POLYESTER

→ Matériau : fibres polyester
→ Les fibres emprisonnent l'air pour une sensation de moelleux et un confort accru.
→ Traitement d'ignifugation

MODÈLE	REF MICROBILLES	REF MICROFIBRES	Longueur	Largeur	Hauteur
Coussin universel small P9700B / P9750F (livré avec housse amovible)	P9700B1HW	P9750F1HW	45 cm	30 cm	
Coussin universel standard P9701B / P9751F (livré avec housse amovible)	P9701B1HW	P9751F1HW	56 cm	40 cm	
Coussin cylindrique P9702B / P9752F (livré avec housse amovible)	P9702B1HW	P9752F1HW	∅ 20 cm	60 cm	
Coussin demi-bouée d'abduction P9703B / P9753F (livré avec housse amovible)	P9703B1HW	P9753F1HW	32 cm	62 cm	
Coussin bouée P9704B / P9754F (livré avec housse amovible)	P9704B1HW	P9754F1HW	50 cm	50 cm	
Coussin demi-lune P9705B / P9755F (livré avec housse amovible)	P9705B1HW	P9755F1HW	135 cm	85 cm	
Coussin de décubitus semi latéral 30° P9707B / P9757F (livré avec housse amovible)	P9707B1HW	P9757F1HW	180 cm	55 cm	
Coussin demi-lune + plot P9708B / P9758F (livrés avec housses amovibles)	P9708B1HW	P9758F1HW	135 cm 58 cm	85 cm 40 cm	
Coussin de décharge P9709B / P9759F (livré avec housse amovible)	P9709B1HW	P9759F1HW	85 cm	25 cm	15 cm
Coussin triangulaire P9710B / P9760F (livré avec housse amovible)	P9710B1HW	P9760F1HW	60 cm	40 cm	30 cm
Coussin d'abduction P9711B / P9761F (livré avec housse amovible)	P9711B1HW	P9761F1HW	30 cm	10 / 30 cm	15 cm
Coussin de déclive P9712B / P9762F (livré avec housse amovible)	P9712B1HW	P9762F1HW	46 cm	30 cm	10 cm
Coussin de décharge occipitale P9763F (livré avec housse amovible)	-	P9763F1HW	48 cm	43 cm	10 cm
Coussin universel extra small P9714B / P9764F (livré avec housse amovible)	P9714B1HW	P9764F1HW	30 cm	20 cm	
Sac de transport (avec poche porte document A4)	PKDEMOSAC01		90 cm	80 cm	30 cm

* Ce dispositif médical de Classe 1 est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



GARANTIE 2 ANS



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Entretien housses POLYMAILLE®



PROPRIÉTÉS DE LA HOUSSE

HOUSSE POLYMAILLE® :

TOTALEMENT RESPIRANTE ET IMPERMÉABILISÉE

- Enduction de Polyuréthane anallergique sur jersey polyester traité antibactérien, antimicrobien, antifongique.
- POLYMAILLE® est bi-extensible, permettant ainsi de réduire les effets de cisaillements et de frictions.
- POLYMAILLE® est hyper-respirant et contribue de ce fait à la diminution de l'effet de macération.
- POLYMAILLE® est également imperméabilisée pour une hygiène maîtrisée.
- Lavable à 95°C, décontamination par produit de pulvérisation à froid.




DISPOSITIFS LIVRÉS EN STANDARD

AVEC 2 HOUSSES DONT UNE AMOVIBLE

- Facilité d'entretien
- Meilleure hygiène
- Meilleure durabilité du support
- Adapté en environnement multi-patients.

COUSSINS DE POSITIONNEMENT UNIVERSELS STANDARD, SMALL & EXTRA SMALL

- C'est le support universel par excellence : aide au calage du patient, décharge de l'appui des talons, protection des faces latérales internes des genoux, des chevilles, utilisé comme oreiller...
- Utilisé seul ou en association.
- Disponible en trois tailles, Small, Standard et Extra Small.

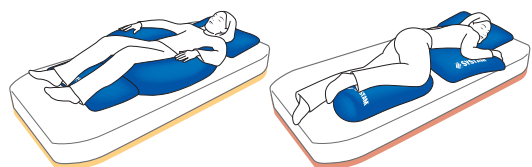

Réf. P9700B1HW
ou P9750F1HW



Réf. P9701B1HW
ou P9751F1HW



Réf. P9714B1HW
ou P9764F1HW

COUSSIN DE POSITIONNEMENT DEMI-BOUÉE D'ABDUCTION DES GENOUX

- L'association des coussin demi-bouée d'abduction et coussin de positionnement cylindrique assure un calage confortable du patient en position Semi Fowler (dossier et bassin à 30°) et décubitus dorsal par un maintien stable du bassin et des segments en abduction grâce à la demi-bouée d'abduction.
- Réduction des appuis au niveau des malléoles internes et des faces latérales internes des genoux.




Réf. P9703B1HW
ou P9753F1HW

COUSSIN DE POSITIONNEMENT CYLINDRIQUE

- Peut être utilisé de multiples manières, notamment placé sous les genoux pour positionner les membres inférieurs en semi-fowler.
- Associé à la demi-bouée d'abduction, il assure un maintien stable des segments en abduction tout en préservant les faces latérales internes des genoux.




Réf. P9702B1HW
ou P9752F1HW

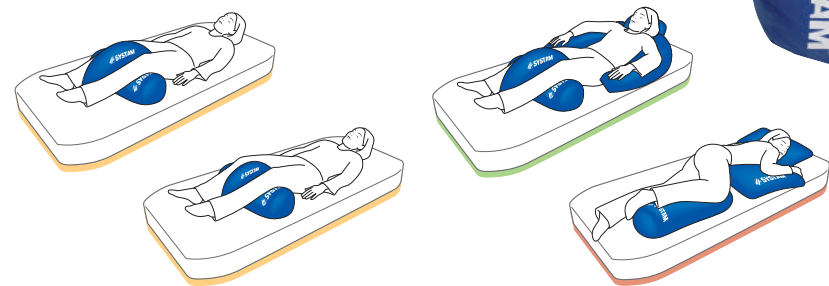

- Système de fixation par bande auto-agrippante
- Simple et efficace.


COUSSIN DE POSITIONNEMENT BOUÉE

- Système de fixation aisé par bande auto-agrippante.

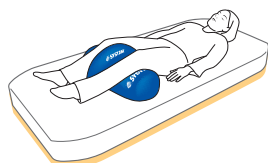


Réf. P9704B1HW
ou P9754F1HW

Réf. P9705B1HW
ou P9755F1HW

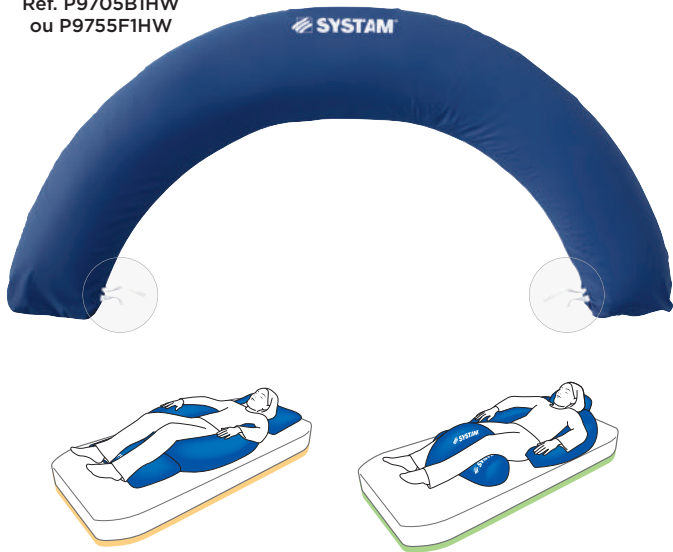

COUSSIN DE POSITIONNEMENT DEMI-LUNE & PLOT DE POSITIONNEMENT POUR DEMI-LUNE

- Assure le maintien, le calage du tronc et du bassin du patient en position décubitus dorsal et semi Fowler.
- Soulage la pression d'appui au niveau des coudes.
- Doté d'un système d'accroche pour fixer le plot complémentaire.
- Peut-être également employé sur fauteuil roulant.

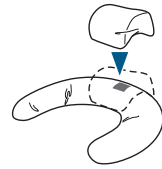



- Système de fixation par bande auto-agripante
- Simple et efficace.



Réf. P9708B1HW
ou P9758F1HW

COUSSIN DE DECUBITUS SEMI-LATÉRAL 30°


- Doté d'un oreiller intégré pour un confort optimal.
- Il assure un confort de positionnement des genoux, du bassin, et du tronc en décubitus semi-latéral 30°.
- Une seule taille de dispositif, compatible avec toutes tailles de patients.

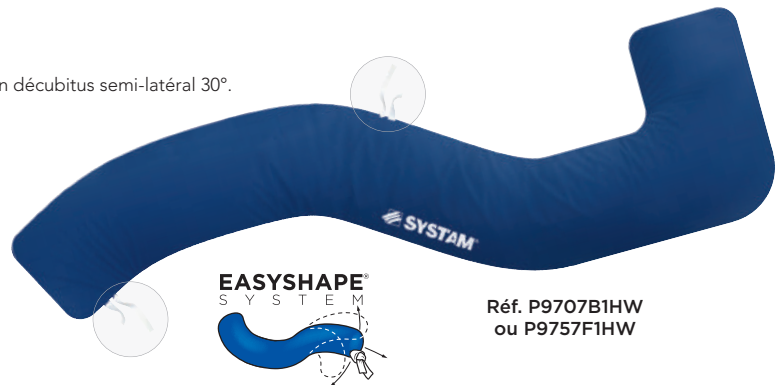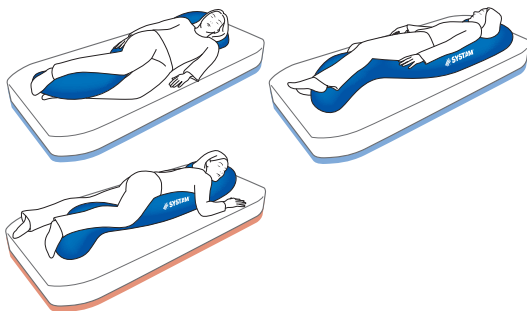

Réf. P9707B1HW
ou P9757F1HW





SPÉCIFICITÉ DU COUSSIN DE POSITIONNEMENT DEMI-LUNE ET DU COUSSIN DE POSITIONNEMENT DE DÉCUBITUS SEMI LATÉRAL 30°

EASYSHAPE®
SYSTEM

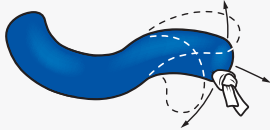


EASYSHAPE® : SYSTÈME D'AJUSTEMENT EXCLUSIF SYST'AM®

- Les liens incorporés à la housse des coussins de positionnement Demi-lune et Semi-latéral 30° permettent d'ajuster et surtout de maintenir le support dans une position adaptée à la morphologie du patient, améliorant ainsi le confort de celui-ci et optimisant l'ergonomie des supports.
- Il suffit de tendre les liens pour accentuer la courbure du support et de les nouer pour maintenir durablement la position souhaitée.
- Simple et efficace, le système EasyShape® permet d'ajuster le dispositif pour mieux l'adapter à la morphologie de chaque patient et de garantir ce positionnement de façon durable.

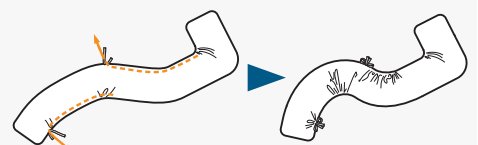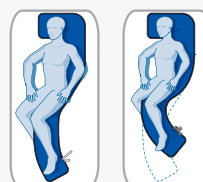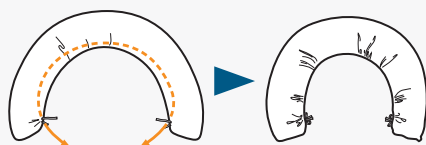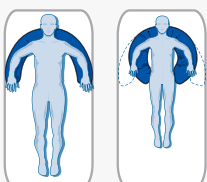

Réf. P9709B1HW
ou P9759F1HW

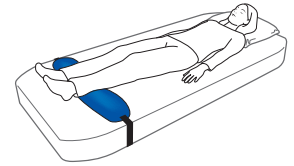


COUSSIN DE DÉCHARGE

- Assure le positionnement des hanches et des genoux ainsi que la décharge totale des talons
- Sangle réglable de maintien au matelas

COUSSIN TRIANGULAIRE


- Calage du patient et positionnement semi-fowler

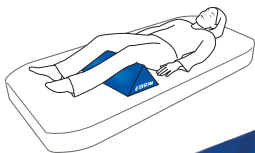

Réf. P9710B1HW
ou P9760F1HW

COUSSIN D'ABDUCTION

- Mise en abduction des hanches pour limiter les phénomènes de friction et de cisaillement des membres inférieurs.

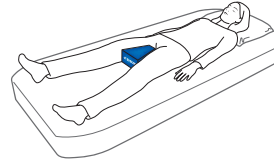

Réf. P9711B1HW
ou P9761F1HW




COUSSIN DE DÉCLIVE

- Assure le positionnement des membres supérieurs ou inférieurs
- La déclive permet un transfert des pressions qui contribue à soulager les points d'appuis au niveau des talons ou de la main



Réf. P9712B1HW
ou P9762F1HW

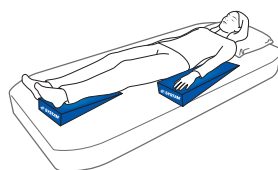

COUSSIN DE DÉCHARGE OCCIPITALE

- Décharge des pressions en zone occipitale.



Réf. P9763F1HW

