

ESPRIT *Action*[®]

DÉCOUVRIR. EXPLORER. VIVRE.



Le **NOUVEAU** fauteuil électrique pliant et léger

Doté d'une technologie gyroscopique innovante



Yes, you can.[®]

Nouveau design avancé.

Notre Esprit Action® a progressé sur bien des points techniques.

Chaque élément de sa nouvelle conception a été amélioré.

Un programme de conception complet, mené auprès des utilisateurs, est à l'origine de cette dernière génération. Le nouvel Esprit Action, léger et pliant, intègre des roues motorisées

Alber à un châssis aluminium configurable de la célèbre famille Action. Le résultat est inédit. Le temps est venu de profiter de la liberté et de l'ingéniosité de l'Esprit Action.



Se transporte aisément dans une voiture



S'utilise dans des pentes jusqu'à 6°

Pliable avec des parties amovibles



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Négocier des passages plus étroits

Allié à un innovant gyroscope qui permet de réduire l'empattement, l'Esprit Action® offre une meilleure maniabilité pour que les espaces les plus réduits soient simples à aborder. Les roues arrière ont été avancées pour une meilleure traction et un rayon de giration plus court.



Gérer les inclinaisons sans effort

Les pentes jusqu'à 6° se montent sans effort, en douceur et en toute stabilité. La technologie du gyroscope réduit l'accélération en fonction du degré d'inclinaison et détecte instantanément la position du fauteuil pour une conduite en toute sécurité.

15kg*

*poids de transport min.

14" Roues
motorisées
Alber



Performances de conduite améliorées

Les roues arrière de 14" associées à des pneumatiques arrière et avant offrent une conduite souple et confortable. Pour une conduite encore plus adaptée à un environnement extérieur, la nouvelle motorisation propose une vitesse jusqu'à 8 km/h disponible en option.





Pliant et facile à transporter

Conçu à partir d'un châssis pliant et léger de la famille Action®, l'Esprit Action® est équipé de roues arrière motorisées et d'une batterie amovible. Aucune pièce n'excède 15 kg. Pas besoin de rampe ou de véhicule adapté pour le transporter.



8km/h

option de vitesse



Intercompatibilité

Les nombreuses pièces communes aux différents fauteuils de la gamme Action permettent des adaptations rapides. L'Esprit Action® peut être facilement personnalisé à des besoins spécifiques.

Options



Support manipulateur escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable



En option, des roulettes anti-basculade offrent une fonction de levage pour un démontage simplifié des roues



Un confort et un maintien durable

Un positionnement optimal est obtenu grâce à de nombreuses possibilités de configuration et d'options. L'Esprit Action® peut être discrètement ajusté pour correspondre aux différents besoins.

Découvrir.

Un nouveau design

Explorer.

De nouvelles possibilités

Vivre.

De nouvelles sensations

Découvrez la nouvelle génération

Esprit Action®. Un remarquable nouveau design utilisant une combinaison innovante de technologie, de performance et d'élégance soigneusement étudiée.





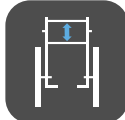
ESPRIT Action® Junior

L'Esprit Action® permet aux enfants d'apprécier une vie active en toute indépendance. La nouvelle version Junior encourage les enfants à être des enfants, à être heureux, actif tout en ayant confiance en eux.

Qu'il s'agisse de se connecter avec ses amis en ligne, à l'intérieur, ou de se retrouver et de jouer à l'extérieur, chaque enfant peut pleinement profiter de la vie et se sentir bien avec son Esprit Action. Avec un design tendance et un choix de trois combinaisons de couleurs, l'Esprit Action permet aux enfants de personnaliser leur fauteuil. Plus de possibilités pour plus de plaisir.

Données techniques

Pour plus d'information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation et de maintenance disponibles sur www.invacare.fr

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur sol / siège	Hauteur de dossier	Longueur UL	Inclinaison d'assise	Inclinaison du dossier
Esprit Action®	 380 - 605 mm	 400 - 500 mm	 460 ou 485 mm	 390 - 510 mm	 340 - 470 mm	 3°	 0° - 30°
Esprit Action® Junior	305 - 380 mm	325 - 375 mm	460 ou 485 mm	390 - 510 mm	200 - 330 mm	3°	0° - 30°
	Largeur hors tout base motrice	Hauteur totale	Longueur hors tout avec repose-jambes	Longueur hors tout sans repose-jambes	Poids du fauteuil	Poids max. utilisateur	Batteries
Esprit Action®	 Largeur d'assise + 180 mm	 945 - 1000 mm	 980 - 1115 mm	 640 - 970 mm	 40.4 - 45 kg ¹	 125 kg	 36 V (3 x 12V)/ 7.65 Ah
Esprit Action® Junior	Largeur d'assise + 180 mm	945 - 1000 mm	925 - 1075 mm	640 - 970 mm	40.4 - 45 kg ¹	80 kg	36 V (3 x 12V)/ 7.65 Ah
	Diamètre de giration	Franchissement	Pente max. sécurité	Puissance des moteurs	Autonomie	Vitesse	Accoudoirs réglables
Esprit Action®	 1430 - 1960 mm	 30 mm	 6°	 6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	 15km	 6 km/h ou 8 km/h	 +50 mm
Esprit Action® Junior	1430 - 1960 mm	30 mm	6°	6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	15km	6 km/h ou 8 km/h	+50 mm

¹ Le châssis représente la partie la plus lourde, soit 15 kg

Coloris de châssis

Adulte



Gris
Ardoise



Bleu
Pop

Adulte et Junior



Noir
Anthracite



Violet
Hypnotique

Junior



Bleu
Acqua

Touches de couleur



Jaune
Citron



Noir

Tél. : +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37320 Fondettes
France



Yes, you can.®

© 2021 Invacare International GmbH. Tous droits réservés. Indications données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit. FR - 05/21