

18.64L



78 - 84 cm



92 cm



72 cm



44 - 50 cm



36 - 38 - 40 - 42 - 44 cm



8°



59/79 cm



78 cm



42/52 cm



34 - 42 cm



90 - 102°



4 cm



75 - 120 kg



22 kg



18.64L.

Fauteuil verticalisateur activa

Ligne au design épuré et actif.

Structure en duraluminium avec finition brillante. Assise réglable en profondeur (jusqu'à +8 cm) et en hauteur (de 50 cm à 55 cm). La verticalisation se fait en tournant un levier sur la partie avant des accoudoirs vers le haut et/ou vers le bas. Cette manipulation entraîne l'activation par un levier du verin à gaz ce qui va permettre d'accompagner avec un moindre effort la verticalisation de l'utilisateur.

Les roues avant et arrière peuvent être déplacées afin de régler la hauteur d'assise et afin d'assurer une stabilité et un équilibre optimaux à l'utilisateur. L'inclinaison de l'assise peut varier de 0° à 12° dans sa partie arrière.


Le dossier est réglable en tension et est muni d'un coussin rembourré fixé sur des velcros, l'assise est équipée d'un coussin rembourré sur fond rigide en aluminium.

Largeurs d'assise disponibles: 36 cm (Junior) 38 - 40 - 42 - 44 - 46.

Poids maximum 100 kg (75 kg pour la version Junior).



Vue en détail de la verticalisation manuelle assistée par le verin à gaz.

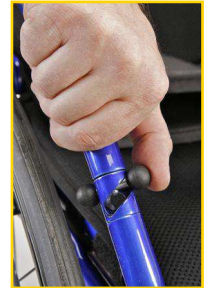

HI LO® 18.64M HI LO



90 - 102 cm



110 cm



68 - 78 cm



50 cm



36 - 42 - 46 cm



40 - 52 cm



10°



56 - 62 - 66 cm



77 cm



40 - 55 cm



90 - 102°



4 cm



120 kg



38 kg



Nouveau système de verrouillage de l'appui sous rotulien sur tous le fauteuils HI-LO



14.92LM
Dossier inclinable électrique



13.22LM
Bascule d'assise électrique



Illustration de l'inclinaison du dossier et de la bascule d'assise



Illustration de la verticalisation



Illustration de la bascule d'assise à son niveau maximum avec la verticalisation

18.64M HI-LO Fauteuil verticalisateur à propulsion manuelle. Verticalisation électrique

Grâce à ce fauteuil, on peut se déplacer de façon active et élargir son espace de vie. Ce fauteuil est parfaitement adapté aux personnes ayant une activité professionnelle ou autre et peuvent en retirer tous les bienfaits.

La position verticale améliore la circulation sanguine et la structure osseuse.

En utilisant ce fauteuil dans la vie de tous les jours, le patient gagne en autonomie; il peut se verticaliser, se déplacer et s'asseoir grâce à la télécommande fixée à l'accoudeur. La verticalisation se fait en harmonie avec les articulations du patient. Le châssis du fauteuil verticalisateur permet de régler la largeur d'assise, la profondeur et l'angle d'inclinaison du dossier. L'appui sous rotulien est réglable et amovible.

La sangle thoracique est fournie. Accoudeurs réglables et amovibles. Disponible en trois versions: 36 Junior, 42 et 46 cm.

VASSILLI
FRANCE

SARL VASSILLI FRANCE
1889, Route de Labéjeau - 31340 LE BORN - FRANCE
Tél: +33 05 61 09 73 55 - Fax: +33 05 61 09 72 99
E-mail: info@vassillifrance.fr - www.vassillifrance.fr
N. SIREN 495294753 - N. SIRET 49529475300019 - RCS TOULOUSE 495294753 - CODE NAF 514N

Le fabricant se réserve le droit de modifier et a améliorer les produits sans avertissement. Il se réserve également la propriété des produits avec interdiction de les reproduire même partiellement.