

# Q300R

Fauteuil électrique compact propulsion  
aussi à l'aise à l'intérieur qu'à l'extérieur.



# NE RENONCEZ PAS A VOS AVENTURES PARCE QUE VOUS VOULEZ UN FAUTEUIL ÉLECTRIQUE COMPACT.

Avec le **Q300 R**, vous n'avez pas à faire de compromis. À l'intérieur, il est très agile et maniable : sa base super étroite est idéale pour manœuvrer dans les espaces restreints. Mais si vous aimez les aventures en plein air, ce fauteuil possède une excellente traction, des moteurs puissants et des performances de conduite qui rivalisent avec celles des fauteuils électriques plus imposant.

Et c'est notre conception de la propulsion qui fait toute la différence. Le fauteuil électrique Q300 R dispose d'une base motrice méticuleusement testée et affinée qui offre l'équilibre parfait entre stabilité et taille. C'est aussi une base qui permet d'ajuster le centre de gravité et donc de positionner votre poids pour maximiser l'adhérence et donc la traction et ainsi pouvoir conquérir les grands espaces. Vous préférez l'agilité en intérieur ? Choisissez les roues motrices 12" et vous profiterez d'une base encore plus compacte (seulement **55 cm** de large) pour les virages et les manœuvres les plus serrées.

Quel que soit votre choix, son système d'assise perfectionné **SEDEO LITE** fournit le support clinique dont vous avez besoin. Disponible avec diverses fonctions d'assise électriques, des couleurs de carénage accrocheuses et des inserts de couleur pour éblouir, le fauteuil roulant électrique Q300 R est incroyable à l'intérieur comme à l'extérieur !



**PERFORMANCE TOTALE**

---

# VOUS PENSIEZ QUE TOUS LES FAUTEUILS PROPULSION SE CONDUISAIENT DE LA MÊME MANIÈRE ? DÉTROMPEZ-VOUS.

**Lorsque vous essayez le Q300 R, vous remarquez la différence. La façon dont il s'accroche au sol. La superbe tenue de route. Mais ... comment ce fauteuil réalise-t-il ce que les autres fauteuils ne peuvent pas faire ?**

Simple, grâce à base optimisée. En testant, affinant et en réglant avec soin des centaines d'ajustements de la largeur, de la longueur, de la position des roues et de l'assise, nous avons trouvé la géométrie de base la plus petite possible, sans compromettre la stabilité et la traction.

La grande stabilité du Q300 R lui permet également de supporter une plus grande plage de réglage du centre de gravité. Ainsi, la position de votre assise peut être déplacée vers l'avant ou l'arrière pour mieux équilibrer votre poids et augmenter la traction et les performances de conduite. De plus, vous obtenez un fauteuil compact qui fonctionne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur!



**Q300 R**



**Q300 R**

roues motrices 12" et roues directrices 8"

## PERFORMANCE EN EXTÉRIEUR

# OBTENEZ UNE MEILLEURE TRACTION.

Avec une base mesurée avec précision et orientée vers les performances en extérieur, le Q300 R possède toutes les performances d'adhérence et de maniabilité dont vous avez besoin pour vous déplacer dans un centre ville animé ou sortir des sentiers battus.



### SURMONTER LES OBSTACLES

Avec l'option monte-trottoir, le Q300 R peut franchir en douceur des trottoirs allant jusqu'à **10 cm**. Plus rien ne se met en travers de votre route et vous n'aurez plus à prendre le chemin le plus long.



### ROUES MOTRICES 14"

Vous recherchez de pures performances en plein air ? Les roues motrices 14" assurent une meilleure traction et stabilité sur les terrains les plus difficiles. Et tout ceci avec une largeur totale de **58 cm seulement**.



## 32 km

### D' AUTONOMIE

Alimenté par de puissantes batteries de **63 Ah** (en option), il vous permettra d'aller partout où vous le souhaitez sans avoir à vous dépêcher de revenir, avec une autonomie pouvant atteindre **32 km**.



### **CONTRÔLE DE LA TRAJECTOIRE AVEC LE MODULE GYRO**

Comme il y a moins de roues pivotantes à remettre dans le sens de la marche dans les virages, le fauteuil roulant Q300 R offre un excellent comportement de conduite en ligne droite à grande vitesse en couvrant la distance plus rapidement. Mais lorsque vous rencontrez une surface non plane, le module de trajectoire Gyro (en option), effectue automatiquement des corrections de direction pour vous maintenir en ligne droite. Cela est particulièrement utile si vous utilisez des commandes spécialement conçues pour diriger votre fauteuil roulant ou si vous avez une mauvaise coordination des mains.

### **SUSPENSION ARRIÈRE**

La suspension arrière du Q300 R réduit la quantité de chocs et de vibrations transmis par le fauteuil roulant, offrant un amortissement agréable lors de la conduite sur un terrain irrégulier ou bosselé. Profitez d'une conduite souple et confortable avec le Q300 R.



MANOEUVRABILITÉ EN INTÉRIEUR

# A L'INTÉRIEUR ET A L'EXTÉRIEUR.

Couloirs étroits, bureaux occupés... Il n'y a aucun petit espace que la base étroite de 58 cm du Q300 R ne puisse négocier avec aisance. Avec une excellente tenue de route et une propulsion arrière intuitive, vous le trouverez incroyablement facile à manœuvrer.

**43 cm**

**HAUTEUR D'ASSISE AU SOL**

Passez confortablement sous les tables ou conduisez votre véhicule adapté assis dans votre fauteuil roulant électrique sans aucun problème grâce à la hauteur d'assise très basse de 43 cm par rapport au sol.



**180 cm**

**DIAMÈTRE DE GIRATION**  
(avec roues motrices de 14")

**110 cm**

**LONGUEUR DE LA BASE MOTRICE**  
(avec roues motrices de 14")

Avec une longueur ultra-compacte, le Q300 R s'adapte aux ascenseurs et aux lieux les plus petits, de sorte que vous n'avez plus à vous soucier de l'espace.



### ROUES MOTRICES 12"

Vous avez besoin d'un fauteuil encore plus compact ? Le Q300 R offre la possibilité de roues arrière de 12", ce qui réduit la largeur totale du fauteuil roulant à seulement 55 cm.

**55 cm**

LARGEUR TOTALE BASE  
(avec roues 12")

**170 cm**

DIAMÈTRE DE GIRATION  
(avec roues motrices de 12")



**106 cm**

LONGUEUR DE LA BASE MOTRICE  
(avec roues motrices de 12")

### RAPPROCHEZ-VOUS GRÂCE AU REPOSE-PIEDS CENTRAL

Grâce au repose-pied central, vous pouvez non seulement vous rapprocher des tables ou des comptoirs, mais aussi effectuer des virages plus serrés.

## OPTIONS ÉLECTRIQUES

# SEDEO LITE, UN VÉRITABLE SYSTÈME D'ASSISE MODULAIRE.

Un système d'assise réglable et configurable offrant la plus large gamme d'options de supports et de positionnement, SEDEO LITE est la solution pour les utilisateurs ayant des besoins posturaux légers à modérés. L'assise SEDEO LITE se règle avec un seul outil, idéal pour des ajustements rapides et faciles.



### RAILS D'ASSISE INTÉGRÉS

Les rails d'assise intégrés offrent de nombreuses possibilités de montage pour des éléments de positionnement tels que les cales tronc, les cales cuisses ou les cales genoux. Il vous suffit de les placer et de les faire glisser à la position désirée.



### APPUI-TÊTE UNIVERSEL

Le support d'appui-tête intégré est compatible avec les appuis-tête SEDEO et WHITMYER et a été créé pour répondre à une variété de besoins, du plus simple à un contrôle multipoint.



### RÉPOSE-JAMBES ESCAMOTABLES A COMPENSATION

Réglables en longueur pour un réglage optimal, ces repose-jambes s'escamotent pour faciliter les transferts. Egalement disponibles en version élévation électrique et à montage central.

# DOSSIER SEDEO PRO FLEXIBLE

Équipez votre Q300 R de ce dossier unique qui combine un soutien dorsal complet, réglable sans effort et un support latéral du tronc avec un niveau d'immersion si élevé que vous devrez le sentir pour le croire.

## S'ADAPTE À VOTRE COLONNE VERTÉBRALE

Contrairement aux dossiers rigides, le dossier flexible SEDEO PRO s'enroule et épouse la forme de votre colonne vertébrale pour offrir un contact total, un grand confort et une stabilité optimale. Les supports latéraux intégrés épousent votre buste, ce qui permet à la mousse d'épouser vos courbes anatomiques et de soutenir votre tronc de façon stable et alignée.

**Il est si enveloppant et immersif, qu'il convient aux postures cyphotiques modérées à sévères. Il fournit un soutien léger pour les attitudes scoliotiques.**




## VOUS AVEZ DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D'ASSISE?

Le système d'assise SEDEO LITE est également compatible avec le dossier **JAY J3**. Adapté aux postures modérées à complexes, le dossier JAY J3 offre la plus large gamme de tailles, de galbes et d'options pour s'adapter précisément et créer une assise qui vous est propre.

## OPTIONS ÉLECTRIQUES

# TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE FAUTEUIL

Le Q300 R offre non seulement de **GRANDES** performances, mais aussi de **GRANDES** fonctionnalités pour répondre à vos besoins cliniques et s'adapter à votre style de vie.

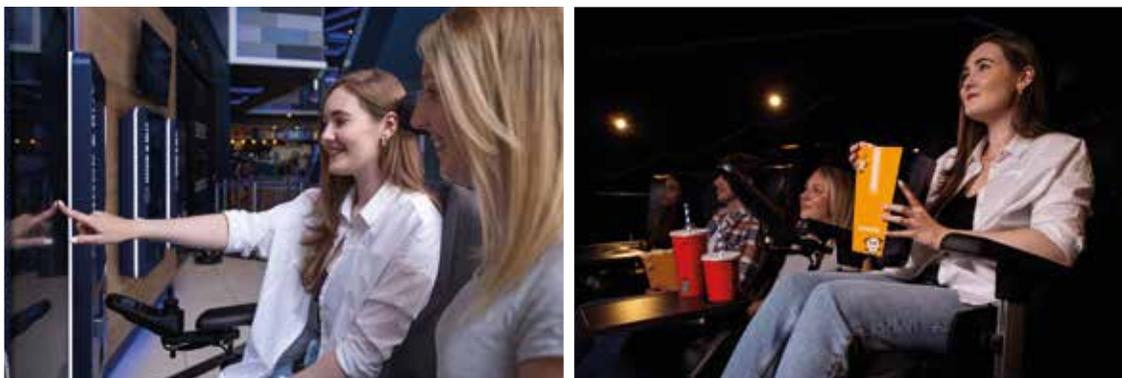

### LIFT ET BASCULE D'ASSISE ÉLECTRIQUE


Atteignez de nouveaux sommets avec cette option qui vous permet de relever l'assise de votre fauteuil roulant jusqu'à **30 cm**. Vous pouvez ainsi atteindre des objets du quotidien qui seraient autrement hors de portée et faciliter vos transferts grâce à une position plus élevée ou même vous mettre debout. Et ressentez le confort, la relaxation et les avantages de la redistribution de la pression grâce à l'inclinaison de **30°**.





### BOITIER DE COMMANDE R-NET ADVANCED

Équipez votre fauteuil de la meilleure technologie grâce au boîtier de commande Advanced, doté d'un grand écran couleur LCD facile à lire et de commutateurs simples à utiliser. Sa technologie Bluetooth et i-device intégrée offre la possibilité de se connecter à vos appareils, le tout sans quitter le confort de votre Q300 R.

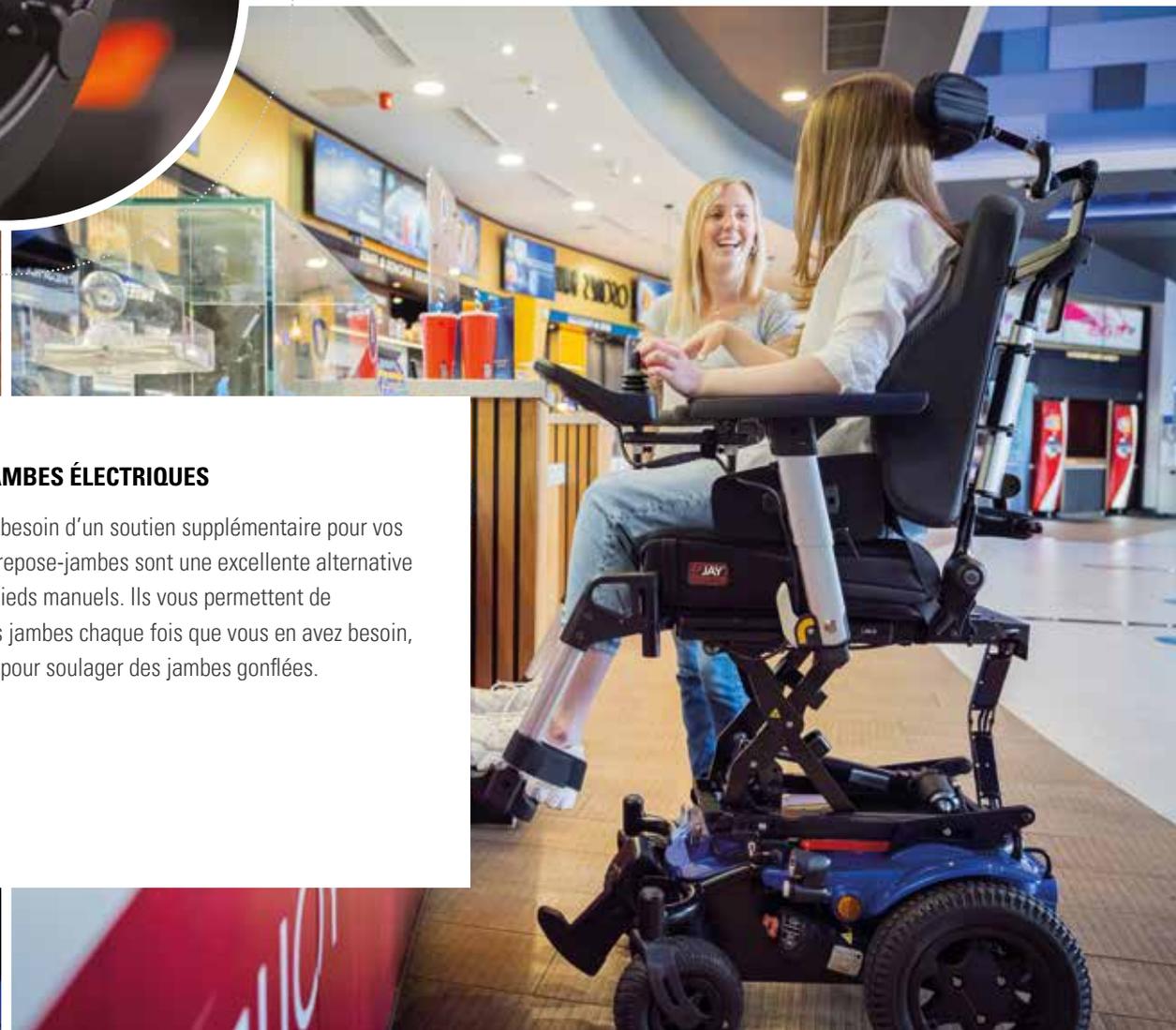

### INCLINAISON ÉLECTRIQUE DE 30°

Vous avez besoin de soulager la pression et de redistribuer votre poids tout au long de la journée ? Le dossier inclinable électriquement vous permet de régler l'angle entre l'assise et le dossier de la même manière que vous inclinerez un siège dans une voiture.

### REPOSE-JAMBES ÉLECTRIQUES

Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire pour vos jambes, ces repose-jambes sont une excellente alternative aux repose-pieds manuels. Ils vous permettent de surélever vos jambes chaque fois que vous en avez besoin, par exemple pour soulager des jambes gonflées.



C-ME

## ÉLEVEZ-VOUS ET CONDUISEZ AVEC C-ME

Dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous retrouver dans une multitude de situations qui ne sont pas adaptées à la hauteur d'un fauteuil roulant. C'est pourquoi C-Me vous permet de vous élever jusqu'à 30 cm tout en roulant à une vitesse maximale de 4,5 km/h, tout cela en même temps ! Ainsi, vous pouvez suivre vos amis et votre famille et les regarder dans les yeux sans la frustration d'être à la traîne. Atteignez les hauteurs qui étaient auparavant hors de portée et faites en sorte d'être vu à tout moment.



### SUSPENSION MÊME LORSQUE L'ASSISE EST RELEVÉE

Avec la fonction C-Me, la suspension du fauteuil roulant électrique reste active même lorsque vous êtes en position élevée. Vous bénéficiez donc de la même douceur et de la même stabilité, quelle que soit la hauteur du siège.



### **ÉLEVATION PENDANT LA CONDUITE GRÂCE A L'ASSIGNATION DE BOUTONS**

Vous en avez assez des mouvements interminables du joystick ou de devoir vous arrêter pour relever le siège ? Avec les boutons assignables brevetés QUICKIE du manipulateur R-Net, il suffit d'assigner C-Me à n'importe quel bouton pour monter ou descendre d'une simple action. C'est si facile, vous pouvez même le faire en conduisant.

STYLE

# PRÉPAREZ-VOUS A IMPRESSIONNER

Transformez les rues en un défilé de style et éblouissez avec sa gamme soigneusement sélectionnée de 5 couleurs pour le carénage de votre Q300 R. Vous pouvez même compléter ou contraster ce choix avec 7 couleurs d'inserts.

BLEU

VIOLET

JAUNE

ROUGE

NOIR

En raison des limitations d'affichage sur écran, les couleurs reproduites ci-contre peuvent varier par rapport au rendu final sur le carénage. En conséquence, ces coloris sont donnés à titre indicatif.

## INSERTS DE COULEUR



NOIR



BLEU



VERT



ORANGE



ROUGE



ARGENT



BLANC

# DONNÉES TECHNIQUES

**Q300 R**

<b>Largeur d'assise</b>	38,5 à 51 cm
<b>Profondeur d'assise</b>	41 à 51 cm
<b>Hauteur d'assise</b>	43 à 49 cm
<b>Hauteur de dossier</b>	46 à 51 cm
<b>Segment jambier</b>	30,5 à 46 cm
<b>Bascule d'assise</b>	0° à 6° manuelle / 0° à 30° (-5° à 25°) électrique
<b>Inclinaison de dossier</b>	de 86° à 106° (par palier de 4°) manuelle / 85° à 120° électrique
<b>Largeur totale</b>	55 cm (avec roues 12") / 58 cm (avec roues 14")
<b>Longueur totale</b>	A partir de 106 cm (avec roues 12") / A partir de 110 cm (avec roues 14")
<b>Diamètre de giration</b>	170 cm (avec roues 12") / 180 cm (roues 14")
<b>Pente maximale de sécurité</b>	6°
<b>Franchissement maximal</b>	10 cm (avec monte-trottoir)
<b>Autonomie (ISO 7176-4)*</b>	32 km
<b>Poids du fauteuil (batteries 50Ah)</b>	à partir de 125 kg
<b>Poids max. utilisateur</b>	136 kg
<b>Roues motrices</b>	12" / 14"
<b>Roues directrices</b>	8" / 9"
<b>Vitesses</b>	6 km/h - 10 km/h
<b>Batteries</b>	50 / 63 Ah
<b>Électronique</b>	R-Net

### Crash testé selon ISO 7176-19

Certifié comme pouvant être utilisé comme siège face à la route dans les véhicules à moteur. Fixation: 4 points d'ancrage au fauteuil + système de retenue à sangle, 6 points (2 sangles à l'avant, 4 sangles à l'arrière). Aucune ceinture de sécurité ancrée autorisée.

### Station d'arrimage DAHL

Base préparée et approuvée pour la conduite d'un véhicule selon la norme ISO 7176-19

### Usage prévu et environnement

Pour personne à mobilité réduite; auto-propulsion ou à pousser par une tierce personne. Usage mixte: intérieur/extérieur. Classe d'usage: B

\*L'autonomie est calculée conformément à la norme ISO 7176 partie 4. Le poids de l'utilisateur, les conditions du terrain, l'utilisation et la capacité de conduite ainsi que les conditions météorologiques peuvent affecter les performances

**Sunrise Medical se soucie de votre sécurité. Veuillez lire votre manuel d'utilisation pour connaître les instructions d'utilisation en toute sécurité et les directives d'entretien. Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, Sunrise Medical se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Pour obtenir les dernières informations, veuillez consulter le site [www.sunrisemedical.fr](http://www.sunrisemedical.fr).**

«Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d'utilisation ».



Sunrise Medical SAS  
ZAC de la Vrillonnerie  
17 Rue Michaël Faraday  
37380 Chambray-Lès-Tours  
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00  
E-Mail: [info@sunrisemedical.fr](mailto:info@sunrisemedical.fr)  
[www.sunrisemedical.fr](http://www.sunrisemedical.fr)