

# Q500<sup>®</sup> H

SEDEO<sup>®</sup> PRO

Une nouvelle génération de fauteuil roulant électrique



Séries Q  
Fauteuils Roulants Électriques

Ingénierie de pointe. Adaptée à vos besoins.



Q500 H  
SEDEO PRO

# Q500 H SEDEO PRO

Pour la première fois, QUICKIE vous propose une **combinaison UNIQUE**: sa redoutable propulsion arrière et sa technologie inégalée en traction centrale. Cette combinaison offre des performances impressionnantes à l'extérieur, associées à une maniabilité et un confort exceptionnels à l'intérieur.

## Base Motrice Hybride

### Conduite en toute stabilité

Les bras fixes des roues directrices du Q500 H SEDEO PRO empêchent le fauteuil de basculer vers l'avant tandis que le système de suspension dynamique maintient les roues motrices et les roulettes anti-bascule en contact avec le sol. Des anti-bascule innovantes et actives garantissent que les 6 roues restent en contact avec le sol pour une meilleure traction et stabilité.

De plus, le Q500 H SEDEO PRO équipé de série de moteurs 4 pôles offre une motorisation 6, 8 ou 10 km/h et une capacité de franchissement jusqu'à 85 mm.

### Manoeuvrabilité optimisée

Contrairement aux bases motrices conventionnelles propulsion, la nouvelle position des roues motrices du Q500 H SEDEO PRO assure un rayon de braquage plus petit pour une meilleure maniabilité à l'intérieur mais sans compromettre la stabilité et les performances à l'extérieur.

### Confort exceptionnel

Le système de suspension dynamique innovant absorbe efficacement les impacts contre les bordures et les terrains accidentés. Le confort de conduite en est significativement amélioré, de même que la stabilité d'assise. Ainsi la fatigue de l'utilisateur est moindre lui permettant de rester plus longtemps assis dans son fauteuil.



## Système d'assise **SEDEO PRO**®

Cadre d'assise hautement réglable et configurable avec un large choix de coussins de confort et d'options de positionnement.

Le fauteuil roulant Q500 H SEDEO PRO est équipé du nouveau système d'assise SEDEO PRO, qui combine un cadre d'assise hautement réglable et configurable avec un vaste choix d'options de positionnement, y compris une large gamme de coussins d'assise et de dossier SEDEO PRO.

Il peut être facilement personnalisé pour répondre aux besoins individuels et s'adapter rapidement à l'évolution des besoins.

### Hautement ajustable

Tous les réglages, y compris la profondeur et la largeur de l'assise, l'angle et la hauteur du dossier, l'angle du repose-jambes, la longueur de jambes, la hauteur et la profondeur des accoudoirs et la hauteur de l'appui-tête peuvent être effectués rapidement, pour créer la posture assise idéale et s'adapter aux besoins évolutifs de l'Utilisateur.

### Hautement configurable

Configurez le système d'assise SEDEO PRO pour une parfaite adéquation avec les besoins de l'Utilisateur:


- Inclinaison de dossier électrique avec compensation sinusoïdale de 100 mm. Egalement disponible: inclinaison manuelle par platine et par vérins à gaz
- Accoudoirs relevables offrant un espace dépourvu de toutes pièces facilitant les transferts latéraux. Egalement disponibles: accoudoirs escamotables et accoudoirs amovibles, tous compatibles avec cinq modèles de manchettes.
- Repose-jambes électriques avec compensation pour atteindre la meilleure position. Autres possibilités: potences escamotables 70°, repose-jambes manuels.

## **R-NET** Technologie de Pointe

Le Q500 H SEDEO PRO est équipé de série de la technologie avancée R-Net. Différents manipulateurs pour répondre aux besoins les plus simples au plus complexes, tel que le boîtier R-Net LED aux fonctionnalités classiques ou le modèle R-Net Advanced aux multiples fonctions intégrées, comme le Bluetooth et l'infrarouge.

## **SWITCH-IT** Commandes Innovantes

Activez confortablement les 5 positions d'assise avec le boîtier Ctrl+5. Il permet d'accéder directement à la position d'assise souhaitée sur simple pression d'un bouton. Si la conduite avec un joystick traditionnel n'est pas la meilleure option, un large choix de commandes spéciales SWITCH-IT permettent de profiter pleinement des capacités et des avantages de votre fauteuil.

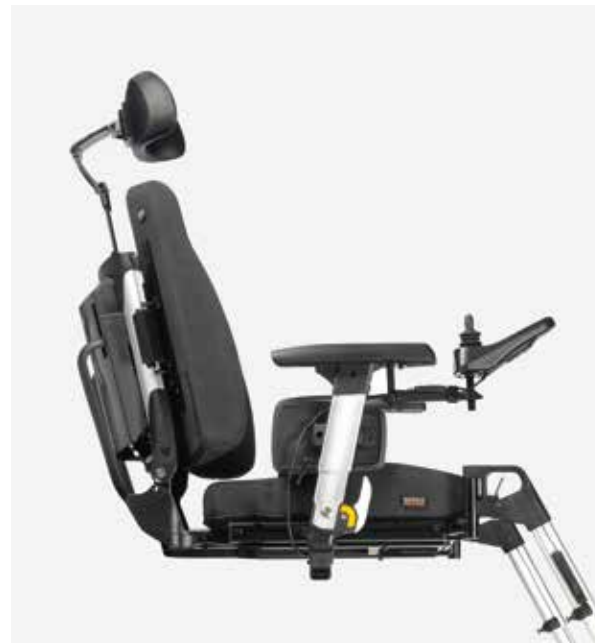

# Données Techniques / Q500 H SEDEO PRO



Sunrise Medical SAS  
ZAC de la Vrillonnerie  
17 Rue Michaël Faraday  
37170 Chambray-Lès-Tours  
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00  
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03  
E-Mail: info@sunrisemedical.fr  
www.SunriseMedical.fr

## Q500 H SEDEO PRO

<b>Poids max. Utilisateur</b>	160 kg	<b>Franchissement</b>	max. 85 mm
<b>Largeur d'assise</b>	380 – 560 mm	<b>Autonomie</b>	max. 40 km (batteries 80 Ah, 6 km/h)
<b>Profondeur d'assise</b>	400 – 560 mm	<b>Rayon de braquage</b>	910 mm
<b>Hauteur d'assise</b>	415 – 490 mm	<b>Largeur max. pour 1/2 tour</b>	1260 mm
<b>Hauteur de dossier</b>	530 – 720 mm	<b>Poids fauteuil</b>	mini 128 kg (sans batteries)
<b>Inclinaison de dossier</b>	90° à 130°		
<b>Largeur totale</b>	620 mm (roues motrices 13'') - 640 mm (roues motrices 14'')		
<b>Longueur totale</b>	max. 1195 mm (repose-pieds latéraux)		
<b>Hauteur totale</b>	max. 1400 mm		
<b>Fonctions d'assise</b>	bascule d'assise, lift, inclinaison de dossier		
<b>Hauteur d'assise</b>	minimum 415 mm		

### Crash Test



Homologué comme pouvant être utilisé comme siège face à la route dans les véhicules à moteur (ISO 7176-19). Fixation: 4 points de fixation au fauteuil avec 2 double sangles à l'arrière & 2 sangles simples à l'avant. Aucune ceinture de sécurité ancrée autorisée. La facilité d'accès et de maniabilité dans un véhicule dépend de la taille du fauteuil roulant.

Pour plus d'informations, sur les fonctions, options et accessoires, veuillez vous référer à la fiche de mesure. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier les données techniques de ses produits sans préavis.