



FAUTEUIL ÉLECTRIQUE VELVET

Adaptable nombreuses options disponibles

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers

Facile d'utilisation, positions programmées électriquement

Le VELVET est un fauteuil électrique de repos adapté à différents pôles hospitaliers.

Sa conception ergonomique et son esthétique hôtelière apportent un confort exceptionnel au patient.

Le VELVET est un fauteuil polyvalent proposant toutes les fonctions nécessaires aux opérations des équipes médicales.

Sa composition a été pensée pour faciliter l'utilisation courante du fauteuil de soins, mais aussi pour simplifier son entretien usuel.



VELVET

DIMENSIONS VELVET

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	100 cm (replié) 177 cm (ouvert) 185 cm (déclive)	82 cm (avec accoudoirs ALU) 74 cm (avec accoudoirs pleins)	125 cm en position assise
ASSISE	53 cm	57 cm	51 cm
REPOSE-JAMBES	40 cm	57 cm	
DOSSIER	82 cm	57 cm	
REPOSE-TÊTE	32 cm	55 cm	

POIDS PRODUIT : 40 Kg
 POIDS MAX PATIENT : 145 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 160 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSORISÉS

Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Fauteuil électrique avec structure en acier. L'intégralité des coussins sont escamotables pour le nettoyage ou les réparations.

- Relève-buste et repose-jambes indépendants électriques. (Vérins électrique)
- Châssis en tube d'acier renforcé, revêtement époxy
- Appui-tête orientable par système à crémaillère
- Assise sur ressorts hélicoïdaux à déplacement combiné
- Accoudoirs avec rembourrage de 7 cm en mousse HR et "à mémoire de forme" fixés sur structures en aluminium
- Assise frontale
- Dégagement total de la partie "jambes" sous l'assise
- Hauteur fixe
- Piètement étoile sur roulettes ø 75 mm à freins indépendants
- Porte télécommande
- Coussins d'assise et de relève-buste en mousse HR 35Kg de densité
- Gamme de coloris VALENCIA : Revêtement M2 non feu, 10 coloris




Piètement étoile sur roulettes ø 75 mm à freins indépendants



Dégagement total de la partie "jambes" sous l'assise



Relève-buste et repose-jambes indépendants électriques.

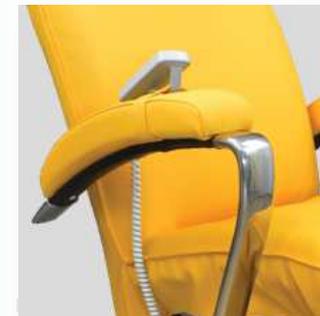


Accoudoirs en aluminium avec sangle pour télécommande

VELUET

Appui-tête orientable par système à crémaillère



Coussins d'assise et de relèvement-buste en mousse HR 35Kg de densité

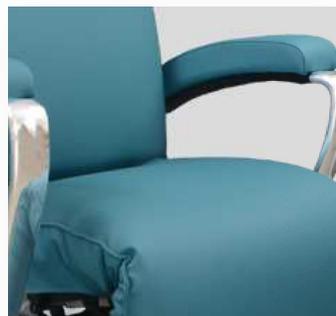

Revêtement M2 non feu



Revêtements Simili : VALENCIA M2

APAISANT



RAFRAICHISSANT



ÉNERGISANT



Composition : Tricot polyester avec enduction PVC ignifugé dans la masse sur une face
Épaisseur : 1,1 mm
>300.000 cycles Martindale
Finitions anti-tâches et résistant aux tâches de sulfure
Efficace contre les bactéries
Sans Phtalates
Finition antistatique



Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
FA006	Déclive électrique d'urgence sur télécommande
FA007	Lampe de lecture + Port USB
FA0088V	Support bilatéral pour tige porte sérum (incompatible FA022)
FA011	Porte-rouleau de drap d'examen
FA015B	Accoudoirs aluminium escamotables 2 positions
FA022	Accoudoirs "pleins" de confort AMOVIBLES (la paire) incompatible avec FA018V-G/D
FA031	Coussin cylindrique de calage de la nuque
FA009P	Petite tablette repas : 42 x 32 cm (FA018V-D ou FA018V-G obligatoire)
FA009G	Grande tablette repas : 81 x 41 cm (FA018V-D ou FA018V-G obligatoire)
FA018V-D	Support pour tablette repas à droite du patient (compatible avec le FA018V-G)
FA018V-G	Support pour tablette repas à gauche du patient (compatible avec le FA018V-D)
FA025	Piètement tubulaire avec 4 roulettes à freins indépendants Ø50mm
FA033	Piètement tubulaire 2 roulettes arrière + 2 patins avant
FA019	Piètement socle en inox Ø 690 mm
FA034	Protection crystal pour relève-jambes
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette (FA0088VE obligatoire)
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette (FA0088VE obligatoire)

ACCESSOIRES



Lampe de lecture + port USB
FA007



Coussin cylindrique de calage de la nuque
FA031



Déclive électrique d'urgence sur télécommande
FA006



Petite tablette repas : 42 x 32 cm
(FA018V obligatoire)
FA009P



Grande tablette repas : 81 x 41 cm
(FA018V obligatoire)
FA009G



Support tablette repas seul pour VELVET
FA018V-D ou FA018V-G



Porte-rouleau de drap d'examen
FA011



Accoudoirs aluminium escamotables 2 positions
FA015B



Accoudoirs «pleins» de confort AMOVIBLES (la paire)
Incompatible avec FA018V
FA022



Supports bilatéraux pour tige porte sérum
FA008VE



Protection crystal pour relève-jambes
FA034



Piètement tubulaire avec 4 roulettes à freins indépendants Ø50mm
FA025



Piètement tubulaire 2 roulettes arrières + 2 patins avant
FA033



Piètement socle en inox Ø 690 mm
FA019

