

LUMINAIRES DE TRAITEMENT **TRIANGO 100**





Plafond



Mur





Piètement à roulettes avec câble

Le luminaire médical TRIANGO 100 de Derungs est le produit premium. Avec un éclairage de 100 000 lux à un mètre, il est le plus puissant luminaire de Derungs. Il est particulièrement adapté pour les traitements, les interventions mini-invasives ou les examens avancés. Le modèle avec mode Endo offre une lumière optimale pour les traitements endoscopiques. Grâce à ses caractéristiques supérieures, comprenant un indice de rendu des couleurs de 95 et des LED à deux températures de couleur différentes, il offre également un soutien au personnel médical des domaines comme la dermatologie, la gynécologie et l'urologie. Des modèles spéciaux avec focalisation variable offrent davantage d'applications.



reddot winner 2020

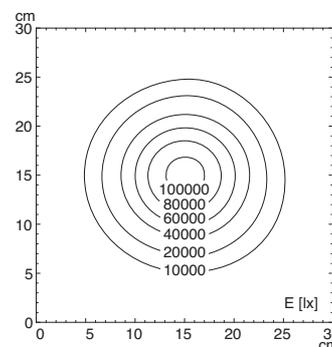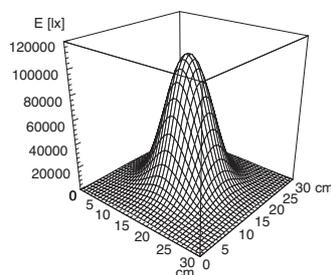

Puissance lumineuse

* -10 % / +20 % de tolérance

TRIANGO 100 Données techniques


Rendement lumineux *	100 000 lux à 1,0 m
Température de couleur *	Fixe 4 300 K Réglable : 3 700 K / 4 300 K / 4 700 K
Champ d'éclairage à 1,0 m *	Fixe 18 cm Focalisable : entre 18 et 28 cm *
Profondeur d'éclairage	1,2 m
Indice de rendu des couleurs	95
Commande	Interrupteur à membrane sur la tête de la lampe
Accessoires	Poignée stérilisable, gaine de poignée jetable, réhausse plafond
Classe de protection	I
Normes	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Indice de protection	IP 43 (tête du luminaire)

Particularités
4 niveaux de gradation, 3 températures de couleur (en option), focalisable (en option), mode Endo (en option), sans entretien



derungs.swiss/triango100

* -10 % / +20 % de tolérance

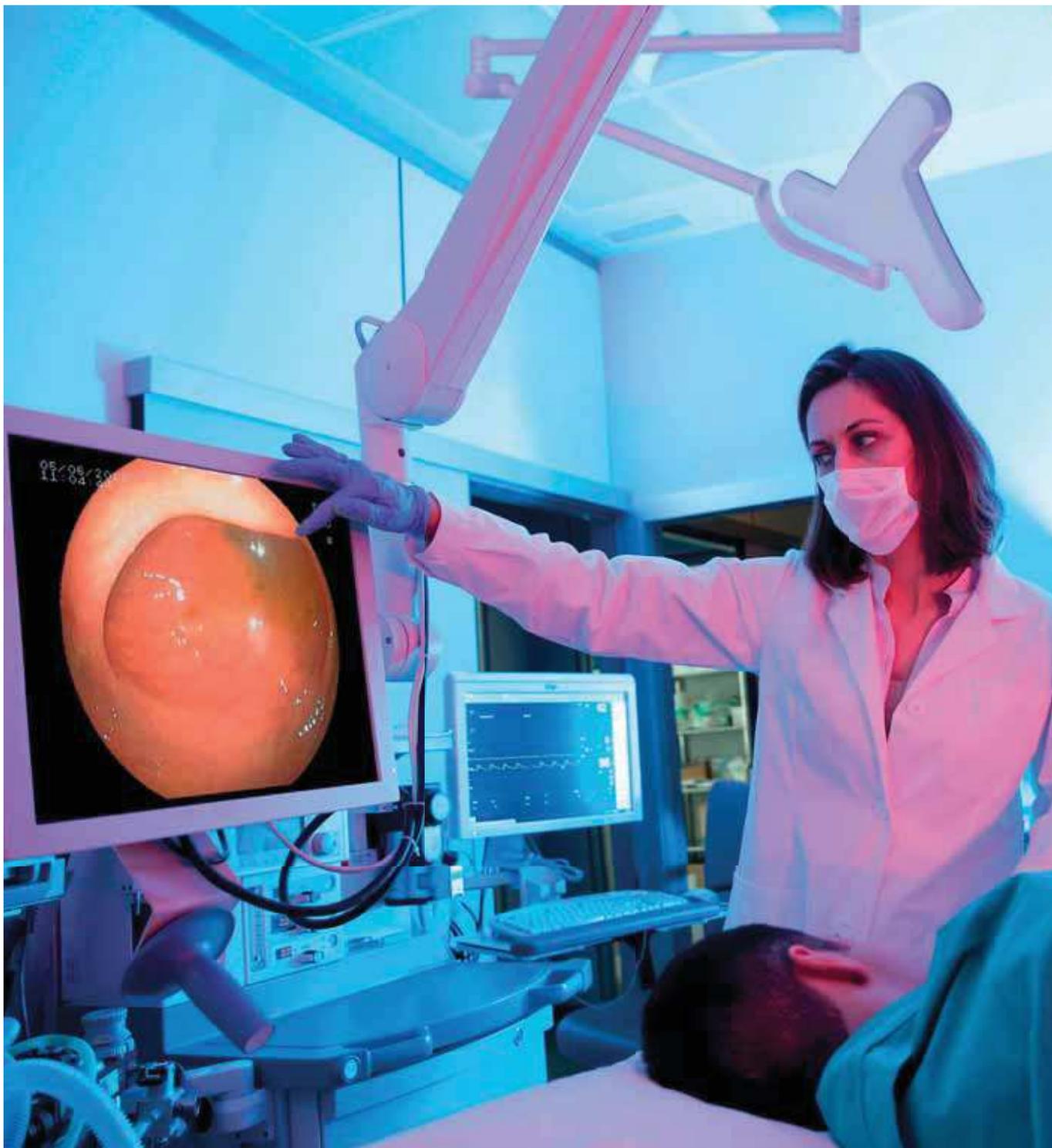


Mode Endo.

Lorsqu'un médecin effectue un traitement par l'intermédiaire d'un écran, la puissance lumineuse doit être adaptée, de sorte à ne pas gêner la vue par un éblouissement ou des réflexions. Si des complications se présentent pendant l'intervention, et que le patient doit, en fin de compte, être opéré, un simple appui sur un bouton permet d'activer la pleine puissance de 100 000 lux.

Focalisation variable.

Un champ d'éclairage réglable donne au médecin la flexibilité dont il a besoin au quotidien. La lumière se règle parfaitement en fonction de la taille et de la surface traitée. En particulier, pour les traitements sur le visage du patient, un petit champ d'éclairage évite au patient le désagrément d'un éblouissement. Pour le traitement de grandes surfaces, un large champ d'éclairage réduit le besoin de repositionner le luminaire.

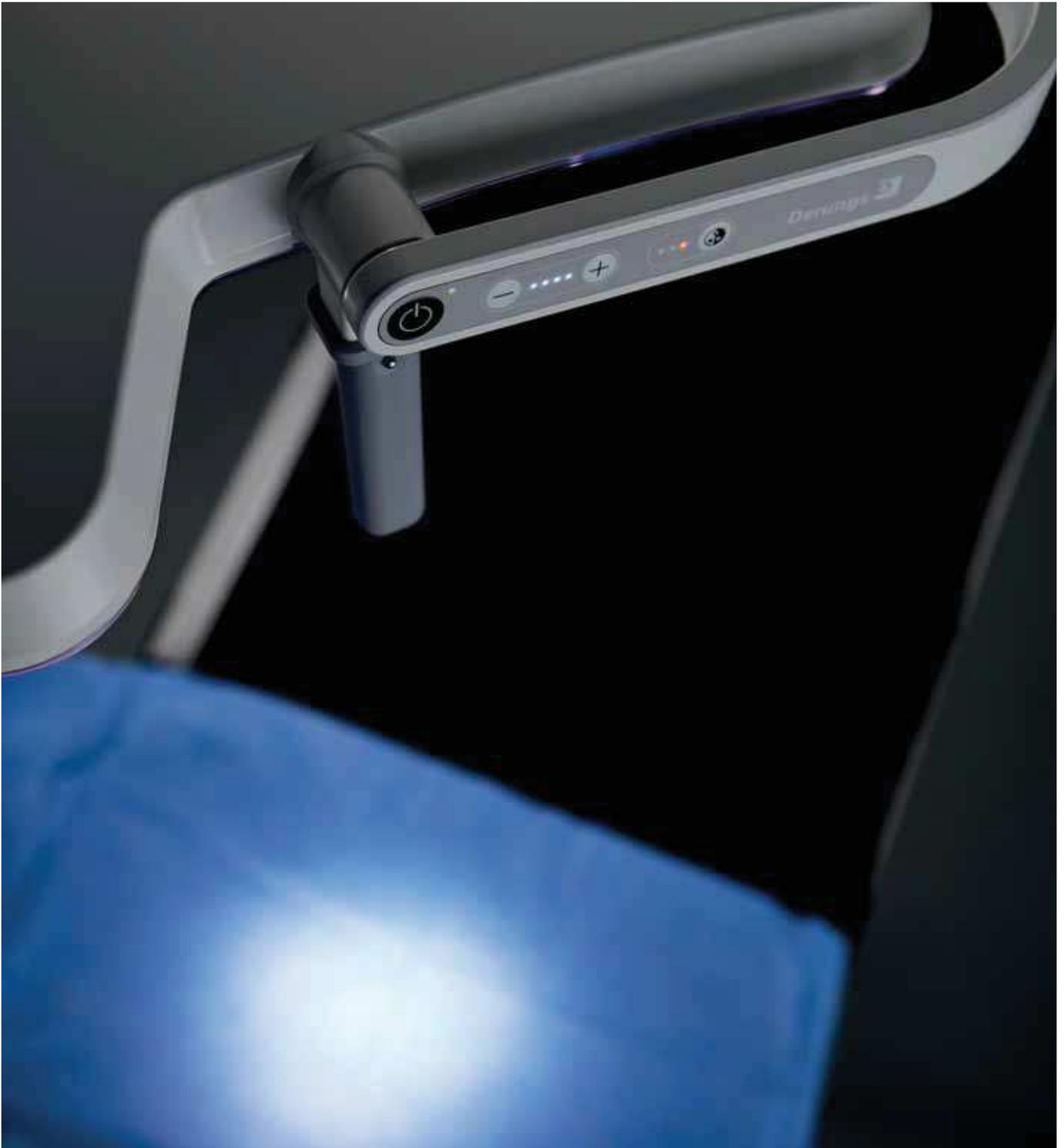

Utilisation intuitive
Commande aisée et à portée de main, grâce à l'interrupteur à membrane



Température de couleur idéale
Réglable sur trois niveaux en option (3 700 K / 4 300 K / 4 700 K)*




Optique diamant
Pour un éclairage homogène avec 100 000 lx à 1,0 m




Systèmes de bras exclusif
Excellent maintien et grand rayon d'action

TRIANGO 100


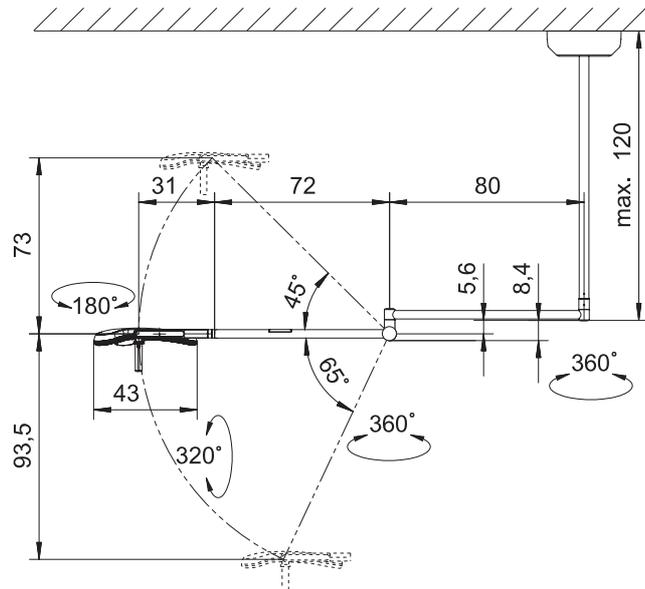


TRIANGO 100 – Version plafond	Raccordement	Particularités	N° de commande
TRIANGO 100-1 C	raccordement direct sans fiche	gradable	D15.884.000-00802695
TRIANGO 100-3 C	raccordement direct sans fiche	gradable, 3 températures de couleur	D15.885.000-00803113
TRIANGO Fokus 100-1 C	raccordement direct sans fiche	gradable, focalisable	D15.886.000-00803685
TRIANGO Fokus 100-3 C	raccordement direct sans fiche	gradable, focalisable, 3 températures de couleur	D15.887.000-00803686
TRIANGO Endo 100-1 C	raccordement direct sans fiche	gradable, mode Endo	D15.972.000-00803704



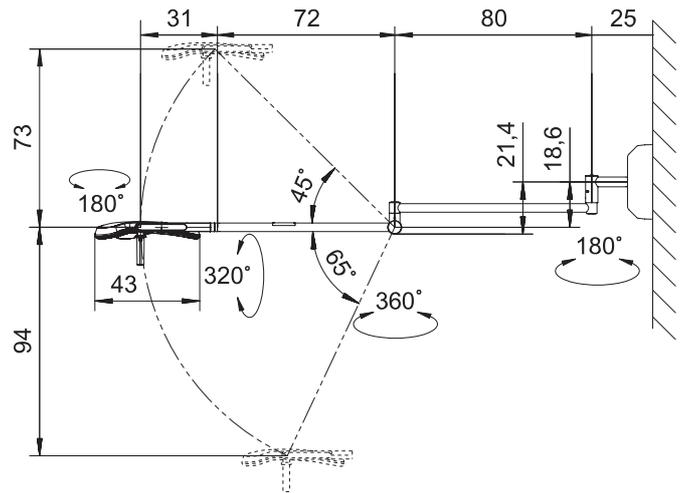

TRIANGO 100 – Version murale	Raccordement	Particularités	N° de commande
TRIANGO 100-1 W	raccordement direct sans fiche	gradable	D15.888.000-00803663
TRIANGO 100-3 W	raccordement direct sans fiche	gradable, 3 températures de couleur	D15.889.000-00803114
TRIANGO Fokus 100-1 W	raccordement direct sans fiche	gradable, focalisable	D15.890.000-00803687
TRIANGO Fokus 100-3 W	raccordement direct sans fiche	gradable, focalisable, 3 températures de couleur	D15.891.000-00803688
TRIANGO Endo 100-1 W	raccordement direct sans fiche	gradable, mode Endo	D15.973.000-00803706

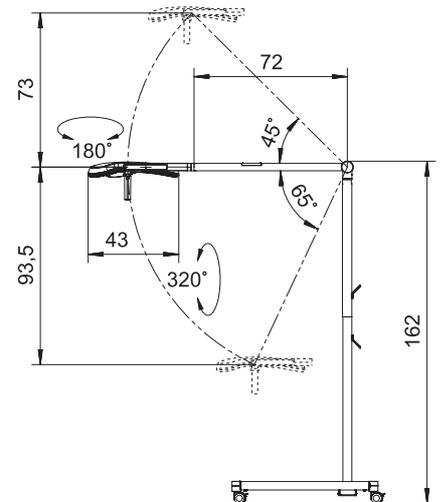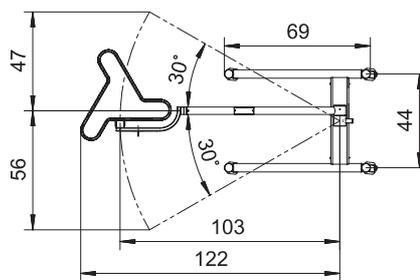

TRIANGO 100 – Piètement à roulettes	Raccordement	Particularités	N° de commande
TRIANGO 100-1 F	câble de 3,0 m, fiche 2P+T	gradable	D15.923.000-00803670 - CH D15.892.000-00803664 - SCHUKO D15.911.000-00803665 - UK
TRIANGO 100-3 F	câble de 3,0 m, fiche 2P+T	gradable, 3 températures de couleur	D15.924.000-00803671 - CH D15.893.000-00803115 - SCHUKO D15.912.000-00803187 - UK
TRIANGO Fokus 100-1 F	câble de 3,0 m, fiche 2P+T	gradable, focalisable	D15.925.000-00803698 - CH D15.894.000-00803689 - SCHUKO D15.913.000-00803700 - UK
TRIANGO Fokus 100-3 F	câble de 3,0 m, fiche 2P+T	gradable, focalisable, 3 températures de couleur	D15.926.000-00803699 - CH D15.895.000-00803690 - SCHUKO D15.914.000-00803188 - UK
TRIANGO Endo 100-1 F	câble de 3,0 m, fiche 2P+T	gradable, mode Endo	D15.978.000-00803711 - CH D15.974.000-00803707 - SCHUKO D15.975.000-00803708 - UK