


LUMINAIRES DE TRAITEMENT **TRIANGO 80**







Plafond

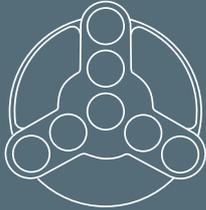

Mur

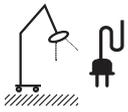

Piètement à roulettes avec câble


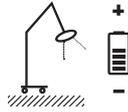


Piètement à roulettes avec batterie

Toujours mieux : nous avons optimisé la TRIANGO 30, qui a fait ses preuves depuis sa création. Ce luminaire s'appelle désormais TRIANGO 80 et convient aux interventions mineures. L'éclairage a été augmenté à 80 000 lux à une distance d'un mètre. Le diamètre du champ lumineux a également été augmenté à 18 cm. Un système optique nouvellement développé fournit un éclairage lumineux et homogène du champ de traitement et d'examen. Le nouveau bras permet un alignement facile et précis de la tête de lampe. La poignée spéciale permet aux droitiers et aux gauchers de positionner la lampe plus facilement.



reddot design award
winner 2012

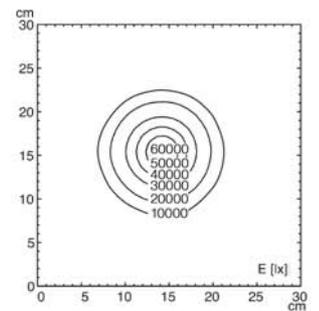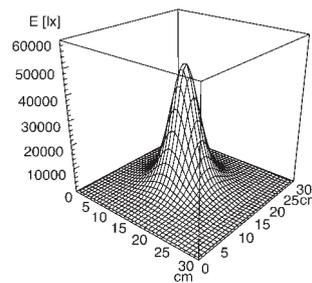

Puissance lumineuse
* -10 % / +20 % de tolérance

TRIANGO 80 Données techniques


Rendement lumineux *	80000 lx à 1,0 m
Température de couleur *	env. 4500 K
Champ d'éclairage à 1,0 m *	Ø 18 cm
Profondeur d'éclairage	2.4 m
Indice de rendu des couleurs	95
Commande	bouton rotatif sur la tête de lampe
Accessoires	poignée stérilisable, revêtement pour poignée jetable, réhausse plafond
Classe de protection	I
Normes	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Indice de protection	IP 43 (tête du luminaire)
Particularités	gradable en continu, sans entretien




derungs.swiss/triango80

* -10 % / +20 % de tolérance

TRIANGO 80

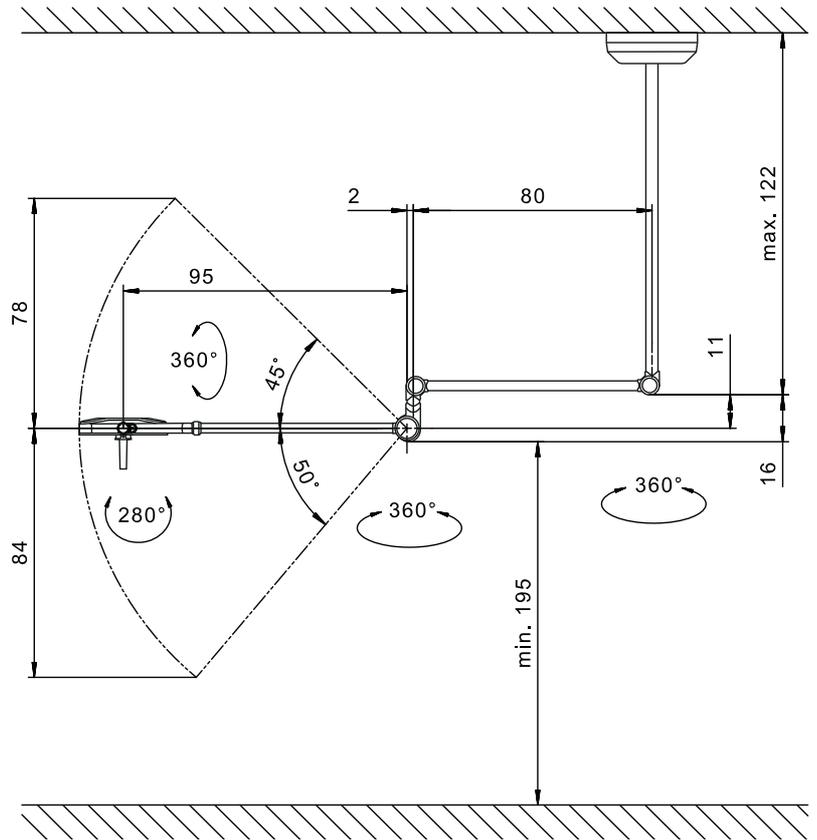


TRIANGO 80 – VERSION PLAFOND	Raccordement	Particularités	N° de commande
TRIANGO 80-1 C	raccordement direct sans fi che	gradable	D16.131.000-00808951

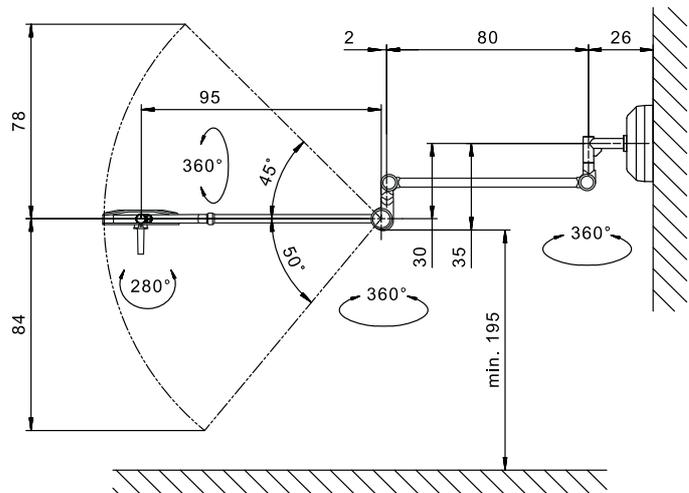

TRIANGO 80 – VERSION MURALE	Raccordement	Particularités	N° de commande
TRIANGO 80-1 W	raccordement direct sans fi che	gradable	D16.136.000-00808986



Piètement à roulettes

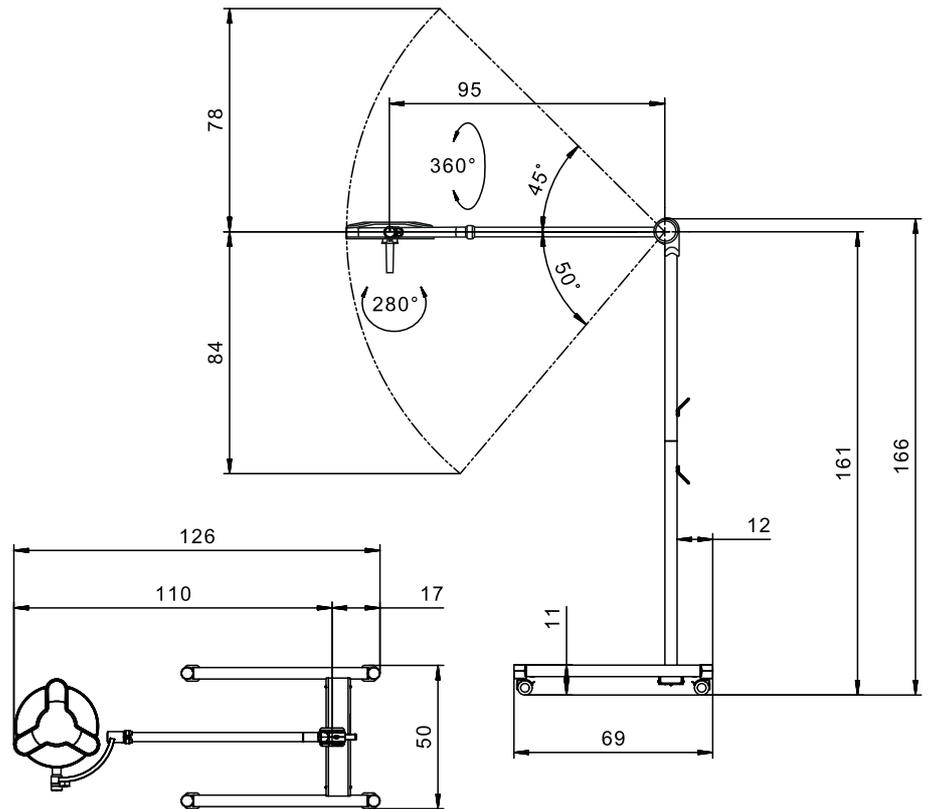

TRIANGO 80 – Piètement à roulettes	Raccordement	Particularités	N° de commande
TRIANGO 80-1 F	câble de 3,0 m, fiche 2P+T	gradable	D16.132.000-00808982 - blanc pur - 2P+T D16.133.000-00808983 - blanc pur - CH D16.134.000-00808984 - blanc pur - UK

Autres variantes de fiches disponibles sur demande.

