

ILLICO

Le lit **ILLICO** est un lit médicalisé conçu pour être à la fois facile et rapide à monter, mais aussi pour être évolutif. En effet, il ne faudra que quelques minutes pour l'installer ou le faire évoluer en le passant de 2 à 3 fonctions et inversement en un clin d'oeil. Plusieurs configurations à la commande vous permettront d'adapter les panneaux, barrières et autres options selon vos besoins.

Montage facile, rapide et sans outils

Notre lit **ILLICO** fera le bonheur des installateurs de lit grâce à son montage facile et ultra-rapide.



Un lit modulable à souhaits

Le lit **ILLICO** a été conçu pour être facilement modulable, il est extrêmement facile et rapide d'installer ou retirer un 3^e moteur ou encore de transformer une plicature en repose-jambes électrique complet.



Nouveau design pour les panneaux oxide

Pour un look toujours plus moderne et pour faciliter la pose de compresseurs pour matelas à air, nous avons redessiné les panneaux standards de notre lit, de ce fait, ils sont également encore plus design et esthétiques.





1 Télécommande pré-équipée 3 fonctions simple et verrouillable.



2 Roues de haute qualité avec frein.




3 Système de verrouillage des panneaux rapide sans outils.



4 Système de fixation des barrières rapide et sécurisé




5 De 2 à 3 fonctions (et inversement) en un clin d'oeil !

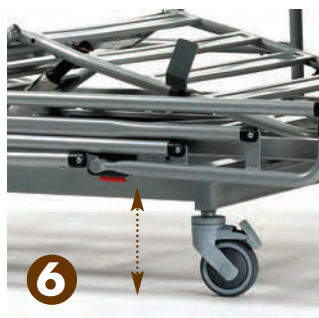

6 Hauteur variable électriquement de 29 cm à 82 cm (une des plus fortes amplitudes du marché).

**Montage facile,
rapide et sans outils
la preuve en images**

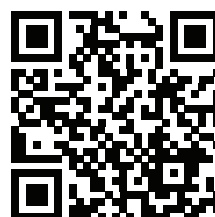

Scannez ce code
ou rendez-vous sur notre
chaîne Youtube :
VERMEIREN France

Configurez votre lit à la carte !

NOMBRE DE FONCTIONS



2 fonctions (hauteur et dossier),
repose-jambes complet manuel



3 fonctions : hauteur, dossier et plicature
électrique (transformable en reposer-jambes
complet électrique en quelques minutes)



3 fonctions : hauteur, dossier et
repose-jambes complet électrique (transformable en
plicature électrique en quelques minutes)

SOMMIER



Metal (standard)



ABS (option)

BARRIERES & PANNEAUX



Panneaux Wave et Barrières Métal
(version standard)



Panneaux Beech + Barrières Metal



Panneaux Oxide + Barrières Bois



Panneaux Beech + Barrières Bois

ILICO



Option Freinage centralisé

sur les 4 roues (option CB4)
sur 2 roues (option CB2)
sur 2x2 roues (option CB2x2)



Protection Murale

(option WP)



Kit de transport sur roues pour stockage facile (standard)




Kit de transport horizontal (en option)



Possibilité de stocker deux lits l'un sur l'autre

ÉGALEMENT DISPONIBLES :

- Option B52 Porte Serum
- Option rallonge de lit de 20cm

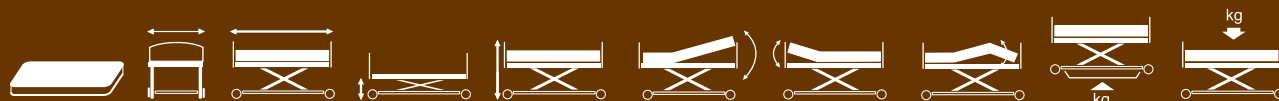

900x2000x120
max. 20 kg

1024

2080

298-828

783-1313

36,8°

70°

-17,2°

83,5*

140