



Rota Pro Active

Lit médicalisé rotatif & releveur

Rota Pro
Active

180 Kg

Objectif Patient

- Le Rota Pro Active permet de palier à la perte d'autonomie de la personne médicalisée,
- Le Rota Pro Active permet un maintien à domicile pour des personnes atteintes de pathologies musculaires évolutives,
- Gestion autonome des différentes fonctions du lit



Maintien à domicile



Etablissements de santé :
Toute unité de soins

Accoudoirs amovibles :
pour faciliter les
différents transferts

Rotation : possible vers la droite ou vers la gauche et jusqu'à 90° pour une position assise

Télécommande : pour la gestion de la hauteur de lit, pour l'inclinaison, la rotation

Roues : 4 Roues jumelles pivotantes (PVC avec frein - Ø10cm)

Barrières latérales : en aluminium conformes à la norme sécurité IEC60601-2-52
– position haute ou basse

Siège : inclinable vers l'avant pour faciliter les transferts de la position assise à la position debout

Objectif Aidant

- Le Rota Pro Active réduit les risques de développement des Troubles Musculo Squelettiques,
- Le Rota Pro Active permet à l'aidant de faciliter les transferts, les levées sans effort, sans contraintes.




Rota Pro Active

Lit médicalisé rotatif & releveur.

Mode d'action



1 **Barrières latérales** aluminium conformes à la norme sécurité IEC60601-2-52 – position haute ou basse

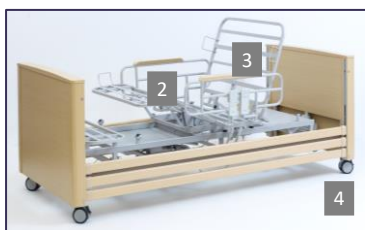

2 **Accoudoirs amovibles** pour faciliter les différents transferts

3 **Réglages électriques pour :**

- Variation de la hauteur de 48 cm à 88 cm
- Inclinaison du relève-buste (70°), du relève-jambe (35°)

4 4 Roues jumelles pivotantes (PVC avec frein - Ø 10 cm)



5

- **Rotation électrique jusqu'à 90°** pour une position assise
- **Rotation possible vers la droite** ou vers la **gauche**




6 **Siège inclinable** vers l'avant pour **faciliter les transferts** de la position assise à la position debout

Bouton fonction **Auto-Contour** : **synchronisation** fluide & fiable **du relève-buste et de la plicature des genoux** pour une position assise confortable et éviter les phénomènes de friction et cisaillement.

Dispositif de sécurité empêchant le lit de s'incliner avant la rotation complète

Fonction **Auto-Régression** : **inclinaison du relève-buste** de 0° à 70°, garantit une **pression minimale** sur la région sacrée, prévention des escarres

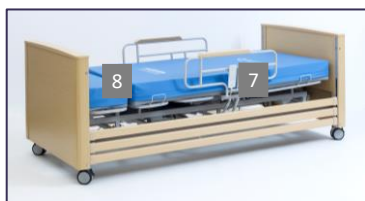

7 Télécommande : Pour la gestion de la hauteur de lit et pour l'inclinaison, la rotation

8 Pack literie complet comprenant matelas mousse visco, oreiller, jeu de drap-housse

Caractéristiques

Poids limite patient	180 Kg
Dimension lit Dimensions du sommier	235 cm x 105 cm 210 cm x 90 cm
Section Jambes extensible	Kit rallonge de la longueur 2m à 2m20 en option
Systèmes d'actionneurs & Vérins LINAK	Permettent un réglage harmonieux, ergonomique et silencieux de la hauteur, des relève-jambes et du buste, ainsi que de nombreuses fonctions à forte valeur ajoutée pour les lits médicalisés
Garantie	5 ans à compter de la date d'achat contre tout vice de fabrication