

# BENOIT SYSTEMES



## MINOTOR<sup>2</sup>




[WWW.BENOITSYSTEMES.COM](http://WWW.BENOITSYSTEMES.COM)



# LE MINOTOR<sup>2</sup>


Le MINOTOR<sup>2</sup> est une motorisation légère destinée à tous les utilisateurs occasionnels ou permanents de fauteuils roulants manuels.

Il est fabriqué sur mesure selon la largeur d'assise en France par BENOIT SYSTEMES depuis 1994. Ce système vous offre la possibilité de motoriser très facilement en quelques secondes votre fauteuil roulant.

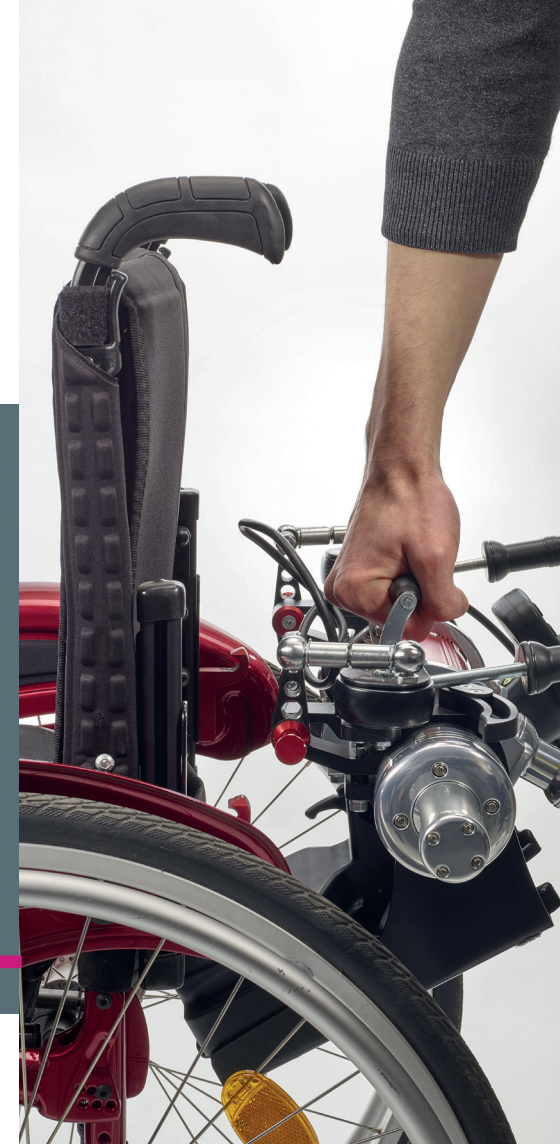


**LE MINOTOR<sup>2</sup> S'INSTALLE EN MOINS DE 15 SECONDES,**  
IL SE CONDUIT AVEC UN JOYSTICK.

# COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

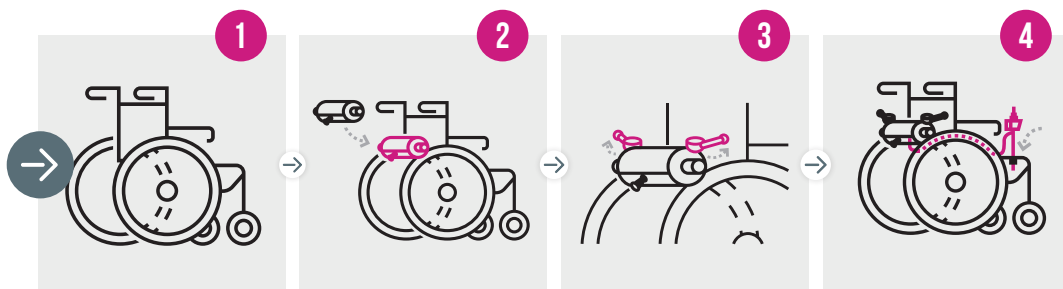

VOTRE FAUTEUIL ROULANT — POSE DE LA MOTORISATION — BLOCAGE DES MANETTES — POSE DU JOYSTICK

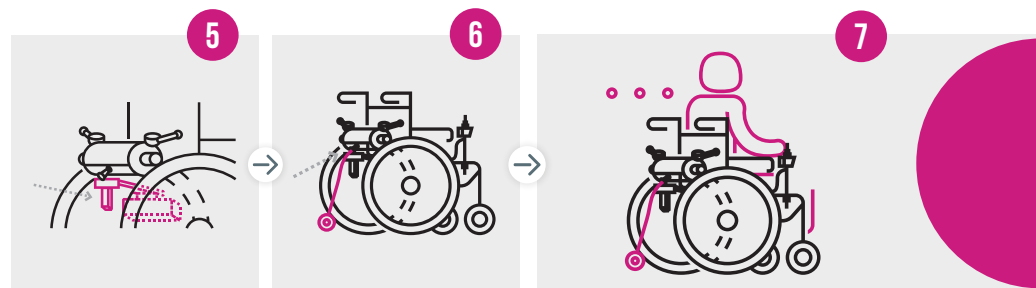

MISE EN PLACE DE LA BATTERIE — INSERTION DE L'ANTI-BASCULE — EN ROUTE !



Débrayez la motorisation en un mouvement et retrouvez ainsi l'usage classique du fauteuil roulant

Jean-Claude  
Utilisateur depuis 2016 - atteint de sclérose en plaques depuis 2003

“ Mon MINOTOR<sup>2</sup> me sert toute l'année à faire les courses avec mon épouse, à me balader dans les centres commerciaux et aux beaux jours à me promener dans les videgreniers et les marchés. Depuis que j'ai mon MINOTOR<sup>2</sup> je suis plus autonome, je n'ai plus besoin d'être accompagné tout le temps.





“ Avec le MINOTOR<sup>2</sup> osez  
de nouveaux horizons ”

# LES ATOUTS DU MINOTOR<sup>2</sup>



LÉGER ET FACILEMENT  
TRANSPORTABLE



S'ADAPTE À TOUS  
LES FAUTEUILS



MISE EN PLACE  
EN 15 SECONDES



INTÉRIEUR /  
EXTÉRIEUR



TRANSPORTABLE  
EN AVION\*



DISCRET ET  
SOBRE



TOUT  
CHEMIN



PARTICIPATION  
FORFAITAIRE DE LA  
SÉCURITÉ SOCIALE

\* La batterie 12Ah est compatible avec les règles IATA en vigueur.



Le MINOTOR<sup>2</sup> est  
LÉGER ET FACILEMENT  
TRANSPORTABLE

# LE MINI MINOTOR<sup>2</sup>



**Le MINOTOR<sup>2</sup> pour les plus petits.**

Le Mini MINOTOR<sup>2</sup> est modulable et s'adaptera aux divers fauteuils (croissance de l'enfant, changement de type de fauteuil).

Le fauteuil ainsi équipé restera très facile à embarquer en voiture.

Grâce à lui l'enfant aura la possibilité de rouler aisément sur toutes sortes de terrains (pentes raides, herbe, graviers). La marche arrière l'aidera à franchir les obstacles les plus importants tels que petites marches ou trottoirs.



# LE MAXI MINOTOR<sup>2</sup>



**Le MINOTOR<sup>2</sup> s'adapte et devient Maxi MINOTOR<sup>2</sup>.**

Le Maxi MINOTOR<sup>2</sup> est conçu pour les utilisateurs de fauteuils roulants dont le poids est supérieur à 130 kg.

Equipé de 4 moteurs de 130 W il vous permettra de profiter des avantages des motorisations légères.

Il s'adapte sur tous les fauteuils pliants quelle que soit la largeur et grâce à la batterie Lithium de 18 Ah vous avez une autonomie d'au moins 20 km.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nos motorisations sont compatibles avec la plupart des fauteuils roulants manuels pliants ou fixes à partir de 32 cm d'assise et 40 cm entre les roues arrière.

**Consultez nous !**

	Poids maximum de l'utilisateur	Poids maximum admissible du dispositif	Poids de la motorisation
<b>MINOTOR<sup>2</sup></b>	120 kg	150 kg	8,8 kg
<b>Mini MINOTOR<sup>2</sup></b>	120 kg	150 kg	7,4 kg
<b>Maxi MINOTOR<sup>2</sup></b>	240 kg	260 kg	16 kg

<b>Vitesse maximale</b>	10 km/h programmable
<b>Moteur</b>	2 moteurs de 130 W avec freins
<b>Moteur Maxi MINOTOR<sup>2</sup></b>	4 moteurs de 130 W avec freins
<b>Hauteur d'obstacle max franchissable</b>	6 cm avec et sans élan
<b>Pente maximale de sécurité</b>	6° (11%)
<b>Garantie</b>	24 mois pour la motorisation et la batterie

Nos motorisations existent en



**LA BATTERIE 12AH EST COMPATIBLE AVEC LES RÈGLES IATA EN VIGUEUR POUR LES VOYAGES AÉRIENS**

<b>Modèle</b>	<b>Poids</b>	<b>Autonomie</b>
- Batterie Lithium	- 3,85 kg	- 15 à 18 km



*D'autres options et informations sont disponibles sur notre site internet*



09/2019 - Réalisation - EcoLINK - Photos non contractuelles - Photos - Philippe Prot

**VOTRE REVENDEUR**

DEMANDEZ VOTRE **ESSAI GRATUIT !**

📍 7 Rue du Pont,  
21450 Billy Les Chanceaux FRANCE  
☎️ (+33) 3 80 96 51 25  
@ [contact@benoitsystemes.com](mailto:contact@benoitsystemes.com)



Le MINOTOR<sup>®</sup> est conforme à la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.