

Hydriade Fast

RÉDUISEZ VOS ÉTAPES DE STÉRILISATION !

SANS HYDRIADE FAST

- ↓ UTILISATION
- ↓ DÉSINFECTION
- ↓ NETTOYAGE
- ↓ RINÇAGE
- ↓ SECHAGE
- ↓ CONDITIONNEMENT
- ↓ CONTRÔLE & STÉRILISATION



AVEC
HYDRIADE
FAST



L'Hydriade Fast est le premier dispositif automatique pour la préparation à la stérilisation.
Adapté à toutes les spécialités, l'Hydriade Fast 4 en 1 accomplit les principales étapes de pré-stérilisation :

DÉSINFECTION, LAVAGE À ULTRASONS, RINÇAGE ET SÉCHAGE



Simplicité d'utilisation

Il suffit de lancer le cycle programmable souhaité.



Gain d'argent

Durabilité renforcée des instruments & coût des équipements réduit.



Sécurité & hygiène

Conformité avec la chaîne de stérilisation et aucun risque pour le personnel.



Gain de temps

Gestion automatique du processus pour plus de temps consacré aux soins.



Fiabilité

Élimination des risques infectieux, chimiques et bactériologiques.



Gain de place

Chaîne de stérilisation réduite à 45 cm³.

Hydriade Fast



Remplissage
liquide détergent
(dilution 1 %)

Raccordement
au réseau d'eau
Vidange directe

Jets d'eau pour rinçage

Système de séchage

Cuve 9 l

Charge en eau 6 l

Ecran de commandes

► Facile d'utilisation et d'installation, HYDRIADE FAST nécessite un raccordement au réseau d'eau et un siphon d'évacuation des eaux usées.

Réf. HYDRIADEFAST

Caractéristiques :

- 3 configurations préprogrammées des cycles
- Dimensions Hydriade Fast : L 412 x H 415 x P 450 mm
- Dimension hauteur couvercle : 750 mm
- Dimensions de la cuve : L 332 x H 120 x P 227 mm
- Poids à vide : 20 kg
- Absorption max : 1,5 kW
- Ultrasons : 39 KHz / 4 transducteurs
- Tension : 230V-50Hz
- Bac conçu pour contenir des plateaux usuels ou chirurgicaux et des instruments de précision à rotation

Choisissez parmi **3 cycles préprogrammés d'une durée de 5 à 20 min** (phases de nettoyage). Les paramètres des cycles préprogrammés peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques d'utilisation.



Hydriade Fast vendu avec :

1 détergent spécifique
Réf. DETERH



1 panier inox pour fraises
(D 70 mm x H 60 mm)



1 panier inox
(L 280 x P 180 x H 60 mm)

Le détergent certifié (réf. DETERH) 1 litre est spécifiquement adapté à Hydriade Fast pour nettoyer, désinfecter et protéger l'instrumentation.




Chauffage :
L'appareil procède au chauffage et à première décontamination statique des instruments.




Dégazage :
Ce processus élimine les gaz dissous dans l'eau afin d'éviter toute interférence avec les ultrasons et d'améliorer l'efficacité du processus.



Nettoyage par ultrasons :
La cavitation permet d'éliminer les résidus chimiques et organiques du matériel plongé dans le bac. La charge bactérienne est ainsi éliminée à plus de 95 %.

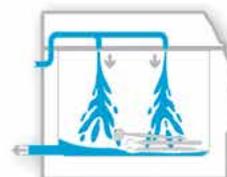

Evacuation :
Hydriade Fast vidange automatiquement tous les liquides contenus dans la cuve.

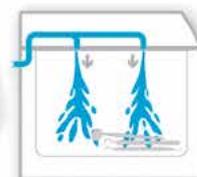

Rinçage à ultrasons :
Hydriade Fast procède au rinçage par injection d'eau sous pression à travers les buses situées dans le couvercle. Vidange automatique de l'eau injectée.



Séchage :
La combinaison d'un ventilateur et d'une résistance engendre un jet d'air chaud pour éliminer l'humidité sous forme de vapeur.