



# Défibrillateur de formation *Trainer*

Le **i-PAD NF1200 Trainer T** est un défibrillateur simulateur conçu pour imiter le fonctionnement du i-PAD NF1200 (Def-i) et du NF1201 (Auto-Def). Il peut simuler des fonctions telles que la charge et la délivrance d'un choc de défibrillation.

Il contient des scénarios de sauvetage préprogrammés conformes au protocole de sauvetage recommandé par les instances internationales de décision en matière de sauvetage telles que l'American Heart Association (Association américaine de cardiologie), l'European Resuscitation Council (Conseil européen de réanimation)...




8 scénarios différents simulent les conditions de sauvetage sur le terrain : rythme nécessitant un choc ; délivrance d'un choc ; rythme sinusal normal sans choc ; administration du massage cardiaque 30/2 (30 compressions thoraciques suivies de 2 respirations artificielles) ; délivrance d'un deuxième choc ; délivrance d'un troisième choc... etc.

Une télécommande permet de commander le **i-PAD NF1200 Trainer** à une distance maximum de 2 mètres. Fonctions de la télécommande à infrarouge: simule la fixation des électrodes ; simule l'état de charge de la batterie ; augmente ou diminue le volume d'écoute ; sélectionne le scénario préprogrammé.

## Descriptif de l'appareil

- L'appareil est livré avec :
- une batterie,
  - un jeu d'électrodes pour adulte,
  - une télécommande,
  - une notice d'utilisation.
- GARANTIE : 2 ans  
- Réf. CC 801 0090

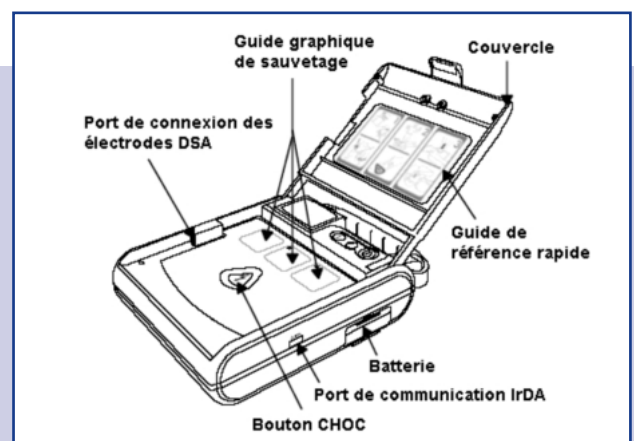

C 080 0114 2

