



Invacare® | **Action<sup>®4</sup>NG**

Rigide, robuste et plus léger !



Le nouvel **Action<sup>4</sup><sub>NG</sub>** s'allège, il bénéficie d'une réduction de poids d'environ 1Kg comparé à son prédécesseur. L'**Action<sup>4</sup><sub>NG</sub>** réduit son poids tout en s'appuyant sur les fonctionnalités remarquables du modèle précédent. Doté de son double croisillon, l'**Action<sup>4</sup><sub>NG</sub>** offre une plus grande rigidité et une facilité de conduite incomparables. Par ailleurs, il est facilement configurable et ajustable comme tous les autres fauteuils de la famille **Action** et partage des éléments communs ce qui permet de profiter d'une intercompatibilité pour de nombreuses pièces et accessoires.

- **Un fauteuil plus léger**
- **Des fonctionnalités améliorées**
- **Un nouveau design et une large gamme de couleurs**



### Réduction de poids significative

Sans compromettre les fonctionnalités ou la facilité de réglage du fauteuil, le poids de l'**Action<sup>4</sup><sub>NG</sub>** a été réduit d'environ 1kg. C'est en majeure partie grâce à ses supports de fourche allégés et à ses nouveaux paliers de roues arrière, tout deux en aluminium. Ces nouveaux changements montrent encore une fois que l'**Action<sup>4</sup><sub>NG</sub>** redéfinit la norme. L'**Action<sup>4</sup><sub>NG</sub>** devient encore plus facile à transporter tout en conservant sa qualité de roulage.

### Une attention particulière portée aux détails

L'équipe *Invacare* a retravaillé le design de l'**Action<sup>4</sup><sub>NG</sub>** dans de multiples domaines. Une nouvelle conception de fourche offre un look plus actuel, la toile de dossier a été améliorée et la nouvelle gamme de couleurs de châssis fait évoluer le style de l'**Action<sup>4</sup><sub>NG</sub>**. Vous pouvez remarquer l'attention particulière donnée aux détails de chaque composant de ce fauteuil, reflétant ainsi notre objectif de fournir un style unique !

### Des fonctionnalités améliorées

De nouvelles fonctionnalités intelligemment conçues rendent l'**Action<sup>4</sup><sub>NG</sub>** encore plus facile à utiliser que son prédécesseur. Une gâchette de verrouillage a été ajoutée sur les accoudoirs relevables et amovibles qui permet un déverrouillage aisé même avec des fonctions limitées au niveau de la main. Les accoudoirs relevables et amovibles sont désormais dotés d'une découpe au niveau des protège-vêtements ainsi que de poignées d'appui ergonomiques permettant d'optimiser les transferts.

De plus, la nouvelle conception optimisée des toiles de dossier permet désormais de s'adapter parfaitement autour des cannes de dossier pour un plus grand confort. Les toiles de dossier bi-matière noires réglables en tension une sangle et quatre sangles ont été également retravaillées, il est maintenant possible d'ajuster en hauteur la sangle lombaire ce qui offre un meilleur positionnement et un réglage plus précis en fonction de l'épaisseur du coussin d'assise.

Nous avons ajouté toutes ces fonctionnalités car nous savons que les détails sont importants dans la vie de tous les jours.

### Facilement configurable et interchangeable

Avec ces nouvelles améliorations, l'**Action<sup>4</sup><sub>NG</sub>** réussit à être totalement compatible avec les autres membres de la famille **Action**, cela signifie que tous les nouveaux composants du fauteuil roulant s'adaptent aux modèles précédents.







### Légèreté

L'**Action<sup>4</sup><sub>NG</sub>** possède un poids de base de 14,4 kg et un poids de transport de 8,4 kg (sans repose-jambes, accoudoirs et roues arrière).



### Nouveaux paliers de roues arrière

Les nouveaux paliers de roues arrière en aluminium combinent légèreté et fonctionnalité.



### Supports de fourche et fourches

Les nouveaux supports de fourche en aluminium combinés au nouveau design des fourches allient style et légèreté.



### Les accoudoirs relevables et amovibles

Ces deux types d'accoudoirs offrent une gâchette de verrouillage, une découpe au niveau du protège-vêtement et une poignée ergonomique permettant de faciliter les transferts.

200x30



150x30



125x30



### Roues avant

Les roues avant sont disponibles en 5", 6" et 8" pneumatique ou bandage avec des largeurs différentes. Désormais les roues de 6" et 8" sont disponibles en bandage noir non marquant pour un style encore plus moderne.



### **Coussin d'assise RECFrance Profil'Air**

Coussin à air à cellules pneumatiques, mono-compartiment, hauteur 70 mm.  
Disponible en option montée.  
Destiné à la prévention des escarres pour les patients à risque élevé ou très élevé.



### **Coussin d'assise Classic Visco**

Coussin 100% en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Plat et reversible.  
Disponible en option montée.  
4 tailles au choix qui s'adaptent parfaitement aux dimensions de l'assise du fauteuil.



### **Ceintures de positionnement Bodypoint®**

Ceintures 2 points ou 4 points rembourrées et confortables pour un bon positionnement.  
Disponibles en option montée.



### **Repose-jambes à compensation**

Réglables en inclinaison de 0° à 80°. Blocage automatique à l'angle souhaité. Appui-mollets réglables en hauteur et en profondeur.



### **Dossier inclinable**

Le dossier inclinable par cremaillères permet aux soignants ou à la tierce personne d'effectuer des réglages rapides et simples, tout en limitant le poids total du fauteuil par rapport à un dossier inclinable par vérins gaz.





Invacare **Action<sup>4</sup><sub>NG</sub> Levier Pendulaire**

Disponible en hauteurs d'assise 510, 485 et 460 mm.



Invacare **Action<sup>4</sup><sub>NG</sub> XLT**

Version renforcée pour un poids max utilisateur de 160 kg.

Disponible en largeurs d'assise de : 505, 555 et 605 mm en dossier fixe ou inclinable par vérins.



Invacare **Action<sup>4</sup><sub>NG</sub> Dual HR™**

Système breveté de double main courante doté d'un démontage rapide des roues arrière et d'une plus grande précision de conduite grâce à un jeu mécanique réduit au niveau du cadran. La main courante intérieure est réversible pour s'adapter à chaque utilisateur. Le cadran télescopique peut être retiré permettant le pliage du fauteuil.




Invacare **Action<sup>4</sup><sub>NG</sub> Matrix**

Fauteuil équipé des dossiers **Matrx Elite, Elite Deep** et coussins de positionnement **Solution Xtra, Vi et Libra**.

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.
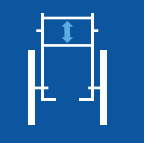
|                                                 | Largeur d'assise                                                                                                                             | Profondeur d'assise                                                                                        | Pente d'assise                                                                                    | Hauteur d'assise                                                                                                                      | Angle de dossier                                                                                    | Hauteur du dossier                                                                                  | Angle des potences                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Invacare Action<sup>4</sup><sub>NG</sub></i> | <br>380/405/430/<br>455/480/505/<br>555/605 <sup>1</sup> mm | <br>400 / 450 /<br>500 mm | <br>0° / 3° / 6° | <br>360 / 385 / 410 /<br>435 / 460 / 485<br>/ 510 mm | <br>7° / 0° - 30° | <br>325 - 510 mm | <br>80° / 0° - 80° |

|                                                 | UL                                                                                                                              | Hauteur des accoudoirs                                                                                                                | Largeur hors-tout                                                                                                 | Largeur pliée hors-tout                                                                     | Longueur hors-tout avec potence                                                                     | Longueur hors-tout sans potence                                                                      | Hauteur hors-tout                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Invacare Action<sup>4</sup><sub>NG</sub></i> | <br>200 - 400 /<br>330 - 460 /<br>440 - 510 mm | <br>200 - 280 /<br>240 / 170 - 300 /<br>210 - 350 mm | <br>Largeur d'assise<br>+ 190 mm | <br>305 mm | <br>995 - 1170 mm | <br>850 - 1025 mm | <br>810 - 1040 mm |

|                                                 | Pente max. de stabilité                                                                   | Rayon de giration                                                                            | Poids max. utilisateur                                                                                          | Poids du fauteuil                                                                             | Poids de transport                                                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Invacare Action<sup>4</sup><sub>NG</sub></i> | <br>18° | <br>850 mm | <br>125 / 160 kg <sup>1</sup> | <br>14.4 kg | <br>8.4 kg |

1. *Invacare Action<sup>4</sup><sub>NG</sub> XLT*



### Coloris de châssis

Violet Hypnotique



Noir Mat




Bleu Pop




Rouge Mat




Nylon Noir

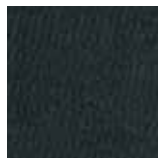

Blanc Perle




Gris Ardoise



Vert Electrique



Noir Anthracite



### Revêtement du siège

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

Tel : +33 2 47 62 64 00  
Fax : +33 2 47 42 12 24  
[contactfr@invacare.com](mailto:contactfr@invacare.com)  
[www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)

Invacare Poirier S.A.S  
Route de Saint Roch - 37230 Fondettes  
France

Trusted Solutions,  
Passionate People



2017 Invacare International Sàrl. Tous droits réservés. Indications données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit. Action4NG - FR- 07/2017