

Tabouret/chaise de douche Etac Swift

Swift est une gamme primée de tabourets/chaises de douche, conçue pour être simple et fonctionnelle. Le tabouret de douche de base peut facilement être transformé en une chaise de douche complète, en ajoutant des accoudoirs et un dossier.

Stable sur tous les sols

Etac Swift présente un design unique qui s'ajuste aux sols irréguliers grâce à des pieds flexibles. Les embouts souples de grande qualité suivent la surface du sol et assurent une bonne stabilité. Toutes ces caractéristiques contribuent à la sécurité de l'utilisateur.

Changements en fonction des circonstances

Le modèle Swift répond à divers besoins. L'utilisateur peut commencer par s'en servir comme tabouret de douche, puis, si les circonstances changent, y ajouter des accoudoirs et un dossier. Swift se positionne facilement à la hauteur requise au moyen des pieds télescopiques. Il peut être réglé un niveau plus bas à l'avant pour avoir un siège légèrement incliné et pouvoir se mettre debout avec moins de difficulté. Des coussins d'assise souples spécialement mis au point pour la douche sont disponibles pour plus de confort.

Facile à manipuler

Swift est facile à manipuler en raison de son faible poids. Livré démonté, il s'assemble aisément, sans aucun outil. De plus, en aluminium et polypropylène, il est 100% anti-corrosion !



Etac Swift

	Vert	Gris	Bleu
– tabouret de douche	81701010	81701410	81701510
– chaise de douche avec dossier et accoudoirs	81701030	81701430	81701530
– tabouret de douche version basse		81701450	
– chaise de douche version basse avec dossier et accoudoirs		81701460	

Dimensions

Hauteur totale avec dossier : 80–95 cm
Hauteur totale version basse avec dossier : 72,5–80 cm
Largeur totale du tabouret : 54 cm
Largeur totale avec les accoudoirs : 54,5 cm
Profondeur totale : 50 cm
Profondeur totale version basse : 46,5 cm
Distance entre les accoudoirs : 45 cm
Hauteur du siège : 42–57 cm
Hauteur du siège version basse : 34,5–42 cm
Surface du siège : 54 cm x 41 cm

Matériaux

Polypropylène, aluminium

Poids maximal de l'utilisateur

130 kg

Poids

Tabouret de douche Swift : 3,1 kg
Tabouret de douche Swift version basse : 2,9 kg
Chaise de douche Swift : 4,7 kg
Chaise de douche Swift version basse : 4,5 kg

Couleurs



reddot



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

Caractéristiques



Facilement adaptable

Grâce à la fonction de verrouillage par bouton-poussoir, régler les pieds ou les retirer se fait facilement.




Embouts avec prise ferme

Les embouts évacuent l'eau et s'adaptent parfaitement au sol.



Possibilités de prise ferme

En l'absence d'accoudoirs, les ouvertures offrent une prise ferme.

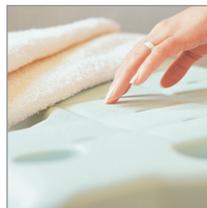

Surface sûre

La surface de l'assise est antidérapante même lorsqu'elle est humide.



Tabouret de douche Etac Swift



Chaise de douche Etac Swift avec dossier et accoudoirs



Chaise de douche Etac Swift version basse avec dossier et accoudoirs

Accessoires



Dossier

Vert : 81701120
Gris : 84005069
Bleu : 84005071



Coussin de dossier

Vert : 81701130
Gris : 84005072
Le coussin antidérapant apporte une sensation de chaleur instantanée et est imperméable. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max.



Porte-savon

Vert : 81701140
Gris : 80209266
Bleu : 81701340



Coussin d'assise

Vert : 81701132
Gris : 84005073
Le coussin antidérapant apporte une sensation de chaleur instantanée et est imperméable. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max.



Paire d'accoudoirs

Verts : 81701110
Gris : 84005074
Bleus : 84005075