

magic
Mobility™

Magic 360

**SUIVEZ VOTRE
PROPRE CHEMIN**



BUILT
TO LAST

TAILORED FOR
YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN
MADE

360 magic™



LA MANIABILITÉ URBAINE S'ATTAQUE DÉSORMAIS AU TOUT-TERRAIN

Base motrice compacte 610-660 mm

Le premier fauteuil suffisamment compact pour naviguer facilement à l'intérieur et équipé de tout ce dont vous avez besoin pour les grands espaces en plein air.

PAS DE SECOURSSE

Suspension intégrale optimale développée par les experts du tout-terrain.

Un système de suspension entièrement indépendant pour prendre soin de vous et de votre corps.



GARDEZ LE RYTHME

5 km/h en position liftée

Pas de ralentissement, même le lift déployé car le monde ne s'arrête pour personne.

ALLEZ PARTOUT POLYVALENCE

Choisissez parmi les trois types de roues interchangeables.

Allez où bon vous semble, que ce soit à l'intérieur ou dans les bureaux, dans les parcs, les jardins ou hors des sentiers battus.

CONFIGUREZ VOTRE FAUTEUIL EN FONCTION DE VOS BESOINS ET DE

VOS ENVIES

360° Freedom

Magic 360 est le fauteuil compact le plus polyvalent au monde avec une capacité tout-terrain.

Adapté au monde dans lequel vous vivez, avec Magic 360 vous choisissez la vie que vous voulez. Configurez le style de votre fauteuil selon vos goûts.

Sélectionnez les roues selon vos aventures.

Adaptez le monde à vos besoins.

Votre fauteuil. Votre choix.

Because the world's not flat™

DES INTÉRIEURS ÉTROITS, DES ESPACES URBAINS AU TOUT-TERRAIN



Urban - roues motrices 14"
manoeuvrabilité ultime en milieu urbain
(largeur base motrice 610 mm)



Crossover - roues motrices 14"
suspension et confort optimum
(largeur base motrice 635 mm)



Off-road - roues motrices 14"
traction optimale outdoor
(largeur base motrice 660 mm)

2X

PLUS DE PUISSANCE POUR PERFORMER

Moteurs 800 watt

Seuls les moteurs les plus puissants vous permettront de dépasser vos limites en toute confiance.

ADAPTÉ A VOTRE IMAGE

Et à votre style de vie. Choisissez comment vous voulez qu'il soit.

CHOISIR LE STYLE/TYPE

> DES ROUES MOTRICES

La flexibilité est clef - et trois types de roues différentes vous offrent des possibilités comme jamais auparavant. Simple à interchanger et toutes de redoutables performeuses.



ROUES INTERCHANGEABLES	URBAN 14"	CROSSOVER 14"	OFF-ROAD 14"
LARGEUR BASE MOTRICE	610 mm	635 mm	660 mm
TERRAIN	Pour intérieurs étroits et environnement urbain	Pour tout entre le urban et le off-road	Pour aller plus loin, en dehors des sentiers battus

CHOISIR LA

> COULEUR A SON IMAGE

Choisissez la couleur qui vous ressemble le mieux. Parmi des tons texturés ou des couleurs très brillantes. Parmi l'élégance des couleurs sobres ou l'explosion des coloris flashy.



MAGIC 360 DONNÉES TECHNIQUES

POIDS MAX. UTILISATEUR	160 kg		
VITESSE MAXIMALE	10 km/h		
	avec lift 300 mm		
LONGUEUR TOTALE	983 mm		
LARGEUR BASE MOTRICE	610 mm	635 mm	660 mm
HAUTEUR D'ASSISE	435 mm		
GARDE AU SOL	90 mm		
ROUES AVANT & ARRIÈRE	Ø200 mm / 8" bandage		
RAYON DE GIRATION	555 mm		
MOTEURS	2 x 800W		
POIDS FAUTEUIL (minimum)	base, batteries, assise rehab, potence centrale, sans lift		
	140 kg		
(standard)	base, batteries, assise rehab, lift, bascule d'assise et dossier électrique et repose-jambes		
	175 kg		
ÉLECTRONIQUE	R-net 120A		
BATTERIES	73Ah gel		
ASSISE (profondeur & largeur)	305 - 560 mm		

MAGIC 360 FONCTIONS ÉLECTRIQUES

Lift et bascule d'assise 30cm / 45°

95-180°
Repose-jambes


95-160°
Inclinaison dossier

Bascule d'assise 50°

Accroche taxis compatible avec système de retenue Q'Straint® et EZ Lock

Lift 300 mm

Crash testé selon Iso 7176-19:2008

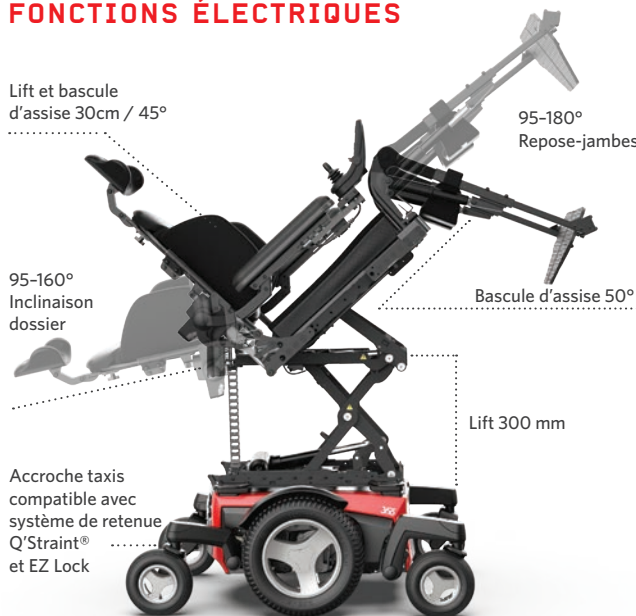

magic
Mobility™

Because the world's not flat

Magic Mobility +61 3 8791 5600
sales@magicmobility.com.au
Explore with us magicmobility.com.au



FAMILY OF BRANDS

SUNRISE
MEDICAL.

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickael Faraday
37170 Chambray-Les-Tours
Tel + 33 (0) 2 47 55 44 00
Fax +33 (0) 2 47 55 44 03
www.SunriseMedical.fr

N'oubliez pas que votre fauteuil roulant est équipé de moteurs électriques et ne doit JAMAIS être conduit dans l'eau, dans les rivières, les criques et la mer. Les informations et les données techniques contenues dans cette brochure sont correctes et à jour au moment de l'impression et peuvent être modifiées.
©Magic Mobility. Product of Australia.

