

ottobock.

La nouvelle famille des Start se dévoile

Plus de légèreté, de fonctionnalité et de polyvalence.



Quality for life



► Start B2



► Start M1



► Start M2S



► Start M2



La nouvelle génération de Start est née

Les attentes des utilisateurs par rapport aux dispositifs médicaux sont aussi complexes que leurs besoins individuels et leurs activités quotidiennes.

Prendre en compte tous ces critères en apportant un grand nombre de nouveautés constitue l'objectif de cette nouvelle génération de fauteuils.

La famille des Start a tout au long de ces années su trouver un large public. Aujourd'hui, grâce au retour des experts et des patients, nous avons effectué des modifications ciblées




permettant de répondre à un éventail encore plus large d'utilisateurs pour qu'ils bénéficient exactement de l'aide dont ils ont besoin. L'ensemble de cette gamme a été crash testé pour tenir compte des problématiques de transport.

Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations détaillées sur cette nouvelle famille de produits.



Effet antibactérien des poignées de poussée


Tous les modèles de la famille des Start sont équipés de poignées de poussée antibactériennes.

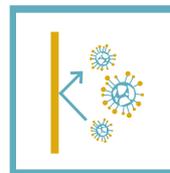

L'effet antibactérien des poignées de poussée a été attesté par l'institut ACTEGA DS GmbH. Ce dernier a prouvé dans des conditions de laboratoire que les poignées de poussée fabriquées avec le matériau ProvaMed® permettent de repousser les germes et ainsi d'obtenir un effet antibactérien.

Cet effet constitue une propriété importante notamment dans les collectivités, car il empêche la transmission des bactéries.

La famille des Start

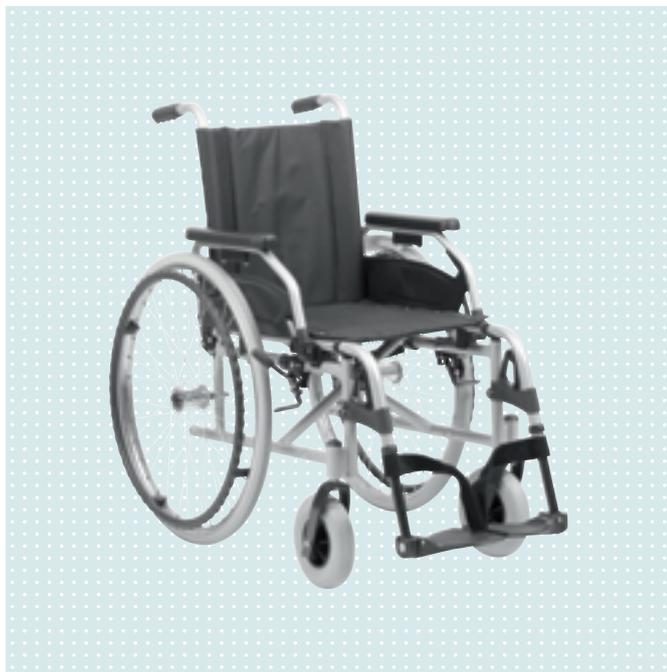

Start B2 - Le basic

Le fauteuil roulant standard Start B2 constitue le produit d'entrée de gamme de la série Start.

Avec son châssis en acier et ses composants en aluminium au niveau des repose-pieds et des accoudoirs, le B2 se caractérise dans ce segment par un poids léger.

Les différentes versions préconfigurées lui permettent de répondre aux besoins d'un grand nombre d'utilisateurs.



Start M1 - Le fauteuil malin

Le fauteuil roulant standard Start M1 est un fauteuil tout en aluminium. Il se distingue par un poids ultra-léger et peut supporter un poids utilisateur de 125 kg.

Ce produit est particulièrement simple à entretenir et peut donc être réutilisé notamment dans un parc de location.

Les nombreuses variantes disponibles permettent de trouver exactement le produit qui convient au patient. Les différentes préconfigurations s'étendent du produit de base à des variantes entièrement équipées comprenant : anti-bascule, porte-canne, accoudoirs ajustables en hauteur, coussin d'assise, ceinture de sécurité, freins à tambour et une toile de dossier réglable en tension.



Start M2S - Le léger préconfiguré

Le fauteuil roulant standard M2S est la version préconfigurée du Start M2, notre modèle haut de gamme.

Il est destiné aux patients souhaitant disposer de leur fauteuil rapidement grâce à un stock constitué de plusieurs variantes.



Start M2 - Le configurable

Le Start M2 est le modèle de fauteuil roulant entièrement configurable et haut de gamme de la famille des Start.

Il dispose de toutes les options de la série Start. Les possibilités d'association au niveau des dimensions, des couleurs et des réglages atteignent leur maximum sur ce modèle. Ce qui permet également aux utilisateurs grands voire très grands de bénéficier d'un dispositif médical optimal.

Il se décline en 3 versions : Start M2, Start M2 Hemi et Start M2 Backster (avec une assise modulaire évolutive).

Doté d'une véritable platine de réglage, le fauteuil peut s'ajuster parfaitement aux besoins de l'utilisateur grâce à la modification du centre de gravité (actif/passif) et aux réglages de l'inclinaison de l'assise.

Pour la première fois, sur ce segment, il existe deux tailles de châssis différents.

Start B2 - Le basic



• Repose-pieds réglables en angle



► Focus produit

- Poids très faible (à partir de 16 kg pour le poids complet, à partir de 10,7 kg pour le poids de transport*)
- Poignées de poussée antibactériennes**
- Compatibilité des pièces pour les repose-pieds et les accoudoirs
- Grand choix de largeurs d'assise
- Repose-pieds escamotables réglables en hauteur et en angle
- Réglage sans outil de la longueur du segment jambier

► Autres caractéristiques du produit

- Repose-pieds et accoudoirs en aluminium, châssis en acier
- Couleur du châssis: argent métallisé ou noir
- Aide au basculement intégrée dans le châssis
- Toile d'assise et de dossier: nylon noir
- Dossier doté d'une courbure lombaire
- Accoudoirs ajustables en hauteur (3 niveaux) ou réglables en hauteur (8 positions)
- Roues directrices 8" (200 x 50 mm) avec pneus en polyuréthane
- Frein à pression
- Roues motrices 24" avec pneus en polyuréthane
- Repose-pieds en deux parties, inclinaison réglable, palettes en plastique
- Potences repose-pieds pivotantes
- Freins à tambour pour utilisateur et accompagnateur

* Le poids de transport correspond au poids complet du fauteuil roulant moins le poids des roues motrices, des repose-pieds et du coussin d'assise.

** L'effet antibactérien des poignées de poussée a été attesté par un institut indépendant.

Équipement	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4	Variante 5	Variante 6
Roues motrices	Standard 24"	24" avec frein à tambour	Standard 24"	24" avec frein à tambour	Standard 12"	Standard 24"
Roues directrices	8" PU (200 x 50 mm)	8" PU (200 x 50 mm)	8" PU (200 x 50 mm)			
Freins à tambour pour accompagnateur et utilisateur	–	Oui	–	Oui	–	–
Main courante	Aluminium, anodisé clair	Aluminium, anodisé clair	Aluminium, anodisé clair	Aluminium, anodisé clair	–	Plastique
Accoudoirs avec plaque protège-vêtements	Ajustable en hauteur	Ajustable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Ajustable en hauteur	Ajustable en hauteur
Couleur du châssis	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé	Noir	Noir
Dossier	Avec courbure lombaire	Avec courbure lombaire	Avec courbure lombaire	Avec courbure lombaire	Cassant	Cassant
Toile	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Anti-bascule	–	–	À gauche	À gauche	–	–
Porte-canne	–	–	À droite	À droite	–	–
Ceinture de sécurité	–	–	Fournie	Fournie	–	–
Coussin d'assise	–	–	Fourni	Fourni	–	–

Caractéristiques techniques

Poids max. utilisateur	100 kg
Poids du fauteuil roulant	à partir de 16 kg
Largeur d'assise	5 largeurs d'assise 380 / 405 / 430 / 455 / 480 mm
Profondeur d'assise	420 mm
Hauteur du dossier	430 mm
Hauteur du siège à l'avant	470 mm
Hauteur du siège à l'arrière	440 mm
Inclinaison du siège	4°
Longueur du segment jambier	360–460 mm (réglable sans outil à intervalle de 20 mm)

Start M1 - Le fauteuil malin



• Accoudoirs réglables en hauteur avec bouton



• Focus produit

- Poids très faible (à partir de 14,6 kg pour le poids complet, à partir de 9,5 kg pour le poids de transport*)
- Poignées de poussée antibactériennes**
- Réglage de la profondeur du siège 20 mm
- Très bonne compatibilité des pièces
- Nouvelle toile de dossier réglable en tension Eco
- Réglage sans outil de la longueur du segment jambier

• Autres caractéristiques du produit

- Châssis en aluminium
- Réglage de la profondeur du siège 20 mm
- Couleur du châssis: argent métallisé
- Aide au basculement intégré dans le châssis
- Toile d'assise et de dossier: nylon noir
- Dossier doté d'une courbure lombaire
- Accoudoirs ajustables en hauteur (3 niveaux) ou réglables en hauteur (8 niveaux), réglables en profondeur, relevables mais fixes
- Roues directrices 8" (200 x 50 mm) avec pneus en polyuréthane ou 6" PVC
- Freins à pression
- Roues motrices 24" avec pneus en polyuréthane ou roues motrices 12"
- Repose-pieds en deux parties, inclinaison réglable, palettes en plastique
- Potences repose-pieds pivotantes
- Freins à tambour pour utilisateur et accompagnateur

* Le poids de transport correspond au poids complet du fauteuil roulant moins le poids des roues motrices, des repose-pieds et du coussin d'assise.

** L'effet antibactérien des poignées de poussée a été attesté par un institut indépendant.

Équipement	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4	Variante 5	Variante 6	Variante 7
Roues motrices	Standard 24"	Standard 24"	24" avec frein à tambour	Standard 24"	24" avec frein à tambour	Standard 12"	Standard 24"
Roues directrices	6" PVC	8" PU (200 x 50 mm)	8" PU (200 x 50 mm)	8" PU (200 x 50 mm)	8" PU (200 x 50 mm)	6" PVC	6" PVC
Freins à tambour pour accompagnateur et utilisateur	–	–	Oui	–	Oui	–	–
Accoudoirs avec plaque protège-vêtements	Ajustable en hauteur	Ajustable en hauteur	Ajustable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Ajustable en hauteur	Ajustable en hauteur
Couleur du châssis	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé
Dossier	Avec courbure lombaire	Avec courbure lombaire	Avec courbure lombaire	Avec courbure lombaire	Avec courbure lombaire	Cassant	Cassant
Toile du dossier	Standard	Standard	Standard	Régl. en tension Eco	Régl. en tension Eco	Standard	Standard
Poignées de poussée	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Toile d'assise	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Anti-bascule	–	–	–	Fourni	Fourni	–	–
Porte-canne	–	–	–	Fourni	Fourni	–	–
Ceinture de sécurité	–	–	–	Fournie	Fournie	–	–
Coussin d'assise	–	–	–	Fourni	Fourni	–	–

Caractéristiques techniques

Poids max. utilisateur	125 kg
Poids du fauteuil roulant	à partir de 14,6 kg
Largeur d'assise	6 largeurs d'assise 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm
Profondeur d'assise	420 mm (réglable à 400 mm)
Hauteur du dossier	420 mm (réglable à 400 mm)
Hauteur du siège à l'avant	460–510 mm
Hauteur du siège à l'arrière	450–500 mm
Inclinaison du siège	2°
Longueur du segment jambier	280–500 mm (réglable sans outil à intervalle de 20 mm)

Start M2S - Le léger préconfiguré



• Toile de dossier réglable en tension Eco



• Focus produit

- Version en stock du Start M2 entièrement configurable
- Réglage rapide de la profondeur de l'assise brevetée sans outil (50 mm)
- Poids très faible (à partir de 14,7 kg pour le poids complet, à partir de 9,6 kg pour le poids de transport*)
- Poignées de poussée antibactériennes**
- Très bonne compatibilité des pièces
- Nouvelle toile de dossier réglable en tension Eco

• Autres caractéristiques du produit

- Châssis en aluminium
- Couleur du châssis: argent métallisé
- Aide au basculement intégrée dans le châssis
- Toile d'assise et de dossier: nylon noir
- Accoudoirs ajustables en hauteur (3 niveaux) ou réglables en hauteur (8 niveaux), réglables en profondeur, relevables
- Roues directrices 8" (200 x 50 mm) avec pneus en PU ou 6" PU
- Fourche réglable
- Frein à pression
- Roues motrices 24" avec pneus en polyuréthane
- Repose-pieds en deux parties, inclinaison réglable, palettes en plastique
- Potences repose-pieds pivotantes
- Freins à tambour pour utilisateur et accompagnateur

* Le poids de transport correspond au poids complet du fauteuil roulant moins le poids des roues motrices, des repose-pieds et du coussin d'assise.

** L'effet antibactérien des poignées de poussée a été attesté par un institut indépendant.

Équipement	Variante 3	Variante 4	Variante 6	Variante 7	Variante 8
Roues motrices	Standard 24"	Standard 24"	Standard 24"	Standard 24"	Standard 24"
Roues directrices	6" PU	6" PU	6" PU	6" PU	8" PU (200 x 50 mm)
Accoudoirs avec plaque protège-vêtements	Ajustable en hauteur	Ajustable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Ajustable en hauteur
Couleur du châssis	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé
Dossier	Réglage de l'inclinaison du dossier 30°	Cassant	Avec courbure lombaire	Droit	Avec courbure lombaire
Toile du dossier	Standard	Standard	Standard	Régl. en tension Eco	Standard
Poignées de poussée	Standard	Standard	Ajustable en hauteur	Standard	Standard
Toile d'assise	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Anti-basculé	-	-	-	Fournie	-

Caractéristiques techniques

Poids max. utilisateur	125 kg
Poids du fauteuil roulant	A partir de 14,7 kg
Largeur d'assise	6 largeurs d'assise 380/405/430/455/480/505 mm
Profondeur d'assise	405/430/455 mm (réglable sans outil)
Hauteur du dossier	400/425/450/475 mm
Hauteur du siège à l'avant	430–520 mm
Hauteur du siège à l'arrière	410–505 mm
Inclinaison du siège	0–5°
Longueur du segment jambier	280–500 mm (réglable progressivement)

Start M2 - Le configurable



• Système de réglage de la profondeur d'assise

• Autres caractéristiques du produit



- Châssis en aluminium
- 6 couleurs différentes disponibles (anthracite métallique, noir profond, bleu glace, argent métallisé, bleu nuit, blanc neige)
- Aide au basculement intégrée dans le châssis
- Toile d'assise et de dossier : nylon noir
- Accoudoirs ajustables en hauteur (3 niveaux) ou réglables en hauteur (8 niveaux), réglables en profondeur, relevables et amovibles
- Roues directrices 8" (200 x 50 mm) avec pneus en polyuréthane ou 5", 5,5", 6", 7", 8"
- Fourche réglable
- Frein à pression
- Roues motrices 24" avec pneus en polyuréthane ou roues motrices 22"
- Pneus 1" 3/8" ou 1"
- Repose-pieds en deux parties, inclinaison réglable, palettes en plastique
- Potences repose-pieds pivotantes
- Freins à tambour pour utilisateur et accompagnateur

• Focus produit

- Fauteuil roulant léger entièrement configurable
- Réglage rapide de la profondeur de l'assise brevetée sans outil (50 mm max.)
- Poids très faible (à partir de 14,7 kg pour le poids complet, à partir de 9,6 kg pour le poids de transport*)
- Poignées de poussée antibactériennes**
- Nouvelle toile de dossier réglable en tension Eco
- Plage de réglage du centre de gravité plus importante
- Choix plus large de profondeurs d'assise, également pour les personnes mesurant plus de 2 m
- Choix encore plus grand de largeurs d'assise
- Plus de possibilités de réglages de la hauteur et de l'inclinaison du siège
- Agrandissement de l'espace réservé aux pieds pour les hémiplegiques permettant une utilisation podale du produit (Start M2 Hemi)
- Double main courante (Start M2 Hemi)
- Gouttière hémiplegique
- Appui-tête réglable
- Freins unilatéraux
- Assise modulaire évolutive (Start M2 Backster)
- Nombreux accessoires modifiés et améliorés

* Le poids de transport correspond au poids complet du fauteuil roulant moins le poids des roues motrices, des repose-pieds et du coussin d'assise.

** L'effet antibactérien des poignées de poussée a été attesté par un institut indépendant.

Caractéristiques techniques

Poids max. utilisateur	125 kg
Poids du fauteuil roulant	à partir de 14,7 kg
Largeur d'assise	6 largeurs d'assise 380/405/430/455/480/505 mm
Profondeur d'assise	Taille de châssis 1 : 405/430/455 mm Taille de châssis 2 : 480/505 mm
Hauteur du dossier	400/425/450/475 mm
Hauteur du siège à l'avant	380–510 mm
Hauteur du siège à l'arrière	380–510 mm
Inclinaison du siège	Réglable
Longueur du segment jambier	250–470 mm (réglable progressivement)

Options du Start M2



• Toile de dossier réglable en tension Eco (de série)



• Dossier réglable en tension Advanced



• Toile d'assise rembourrée



• Anti-bascule (de série)



• Gamme d'appui-tête réglable en hauteur et en profondeur



• Repose-pieds symétrique en deux parties, inclinaison réglable, palettes en plastique

Options du Start M2



• Repose-pieds asymétrique en deux parties, inclinaison réglable, palettes en plastique (de série)



• Palette monobloc en aluminium



• Repose-moignon



• Relève-jambes réglable



• Accoudoirs réglables en hauteur



• Poignées de poussée anti-bactériennes réglables en hauteur

Options du Start M2



Frein à pression (de série)



Porte-canne



Ceinture de sécurité avec fermeture en plastique



Ceinture de sécurité avec fermeture en métal



Différents pneus/roues motrices/mains courantes (de série)




Différentes roues directrices (de série)


Options et accessoires Start M2 Backster



• Dossier Backster avec kit de coussins latéraux et lombaires de confort (de série)

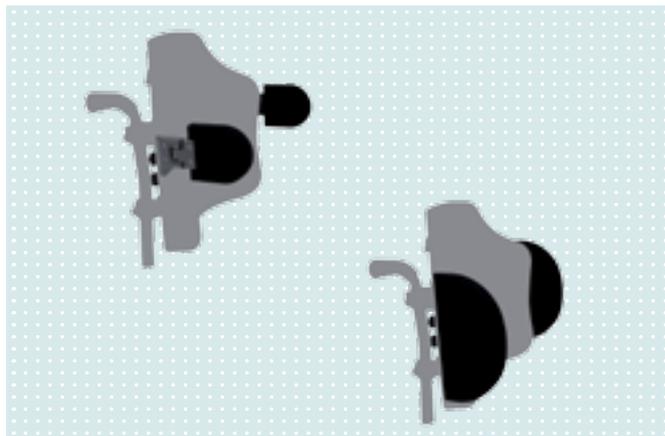

• Maintiens latéraux courts ou longs réglables (de série)

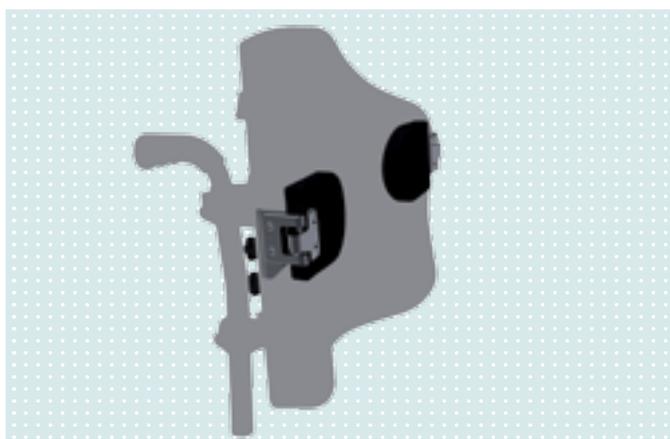

• Maintiens latéraux escamotables



• Coussin d'assise Terra (de série)



• Coussin d'assise Terra Aquos (de série)



• Coussin d'assise Terra Flair

Options et accessoires Start M2 Hemi



Frein unilatéral (de série)



Déport de fourche pour déplacement podale (de série)



Double main courante (de série)



Gouttière avec rotateur élévateur



Différents appui-mains



Rallonge de levier de frein

Options et accessoires




• Talonnières



• Tablette thérapeutique



• Roulettes de transit

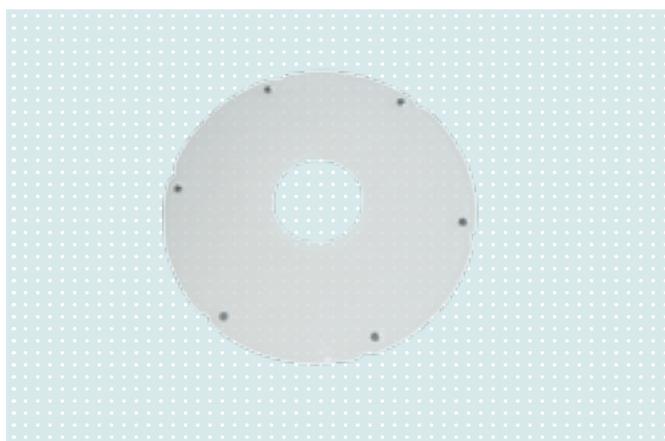

• Flasques



• Kit outillage

Matrice d'options / d'accessoires disponibles ou de série

	Start B2	Start M1	Start M2S	Start M2
Charge max.				
100 kg	•			
125 kg		•	•	•
Crash test	•	•	•	•
Accessoires pour châssis				
Roulettes de transit	•	•	•	•
Anti-bascule à fixer	•	•	•	•
Porte-canne	•	•	•	•
Roues directrices				
5" bandage				•
5,5" bandage				•
6" pneumatique				•
6" PVC		•	•	•
7" pneumatique				•
7" bandage				•
8" pneumatique, étroit (longue fourche de roue directrice requise)				•
8" pneumatique, large (longue fourche de roue directrice requise)				•
8" bandage plein, étroit (longue fourche de roue directrice requise)				•
8" pneu PU, large (longue fourche de roue directrice requise)	•	•	•	•
Fourches des roues directrices				
Fourche longue	•	•	•	•
Fourche courte				•
Déport de fourches				•
Taille des roues motrices				
12"		•		
22"				•
24"	•	•	•	•
Empattement				
Court/actif			•	•
Long/passif	•	•	•	•
Jante de roue motrice				
Standard	•	•	•	•
Roue motrice avec frein à tambour / accompagnateur	•	•	•	•
Double main courante (possible uniquement avec des pneus 1")				•

Matrice d'options / d'accessoires disponibles ou de série

	Start B2	Start M1	Start M2S	Start M2
Pneus				
Pneumatiques 1 3/8"				•
Pneumatiques Rightrun profil fin, 1"				•
Pneus anti-crevaison 1 3/8"				•
Pneus PU 1 3/8"	•	•	•	•
Main courante				
Plastique, noire	•			
Main courante en aluminium, anodisée argent, haute	•	•	•	•
Main courante en acier inoxydable, polie, haute				•
Main courante plastifiée				•
Frein				
Frein à pression standard	•	•	•	•
Frein à double commande pour utilisateur et accompagnateur				•
Frein unilatéral				•
Accessoires des freins				
Rallonge du levier de frein à fixer				•
Système de dossier				
Dossier doté d'une courbure lombaire, standard	•	•	•	•
Dossier droit			•	•
Réglage de l'inclinaison du dossier 30° (hauteur du dossier possible: 475 mm uniquement)			•	•
Dossier rabattable (hauteur du dossier possible: 475 mm uniquement)	•	•	•	•
Hauteur du dossier				
400 mm		•	•	•
420 mm		•		
425 mm			•	•
430 mm	•			
450 mm			•	•
475 mm			•	•
Toile de dossier				
Standard	•	•	•	•
Réglable en tension Eco		•	•	•
Réglable en tension Advanced				•

Matrice d'options / d'accessoires disponibles ou de série

	Start B2	Start M1	Start M2S	Start M2
Poignées de poussée				
Standard – antibactériennes	•	•	•	•
Télescopique (fonction impossible avec un dossier rabattable ou un réglage de l'inclinaison du dossier à 30°)			•	•
Accoudoirs				
Accoudoir standard, accoudoir 300 mm	•	•	•	•
Accoudoir standard, accoudoir 365 mm			•	•
Accoudoir réglable en hauteur, accoudoir 300 mm	•	•	•	•
Toile d'assise				
Toile standard	•	•	•	•
Toile rembourrée				•
Repose-pieds				
Repose-pieds en deux parties, inclinaison réglable, palettes en plastique symétriques	•	•		
Repose-pieds en deux parties, inclinaison réglable, palettes en plastique asymétriques			•	•
Repose-pieds en deux parties, palettes en aluminium 160 mm				•
Palette monobloc, inclinaison réglable, en aluminium				•
Repose-jambe relevable sans compensation automatique de la longueur, paire	•	•	•	•
Repose-jambe relevable sans compensation automatique de la longueur, à droite, (plus repose-pieds standard à gauche)				•
Repose-jambe relevable sans compensation automatique de la longueur, à gauche, (plus repose-pieds standard à droite)				•
Repose-moignon tibial, à droite (plus repose-pieds standard à gauche) ou				•
Repose-moignon tibial, à gauche (plus repose-pieds standard à droite)				•
Repose-moignon tibial (paire)		•	•	•
Finition Backster (dossier et coussins)				
Dossier Backster avec maintiens latéraux				•
Coussin d'assise Terra				•
Coussin d'assise Terra Aquos				•
Coussin d'assise Terra Flair				•
Coussin d'assise Cubic Foam				•
Coussin d'assise Z Flo				•
Coussin d'assise Contur Gel				•
Coussin d'assise Cloud				•
Coussin d'assise Advantage				•
Coussin d'assise Evolight				•
Kit de coussins latéraux et lombaires de confort				•

Matrice d'options / d'accessoires disponibles ou de série

	Start B2	Start M1	Start M2S	Start M2
Gamme d'appui-têtes				
Appui-tête et appui-nuque				•
Kit de montage				•
Gamme d'appuis thoraciques				
Appui thoracique				•
Gouttières				
Accoudoirs (différentes versions) avec rotateur				•
Appui-mains (différentes versions)				•
Aides au positionnement (différentes versions)				•
Gamme de ceintures				
Ceinture de poitrine et des épaules				•
Ceintures pelviennes (différentes versions)	•	•	•	•
Flasques				
Flasque transparent				•
Autres accessoires				
Anti-bascule	•	•	•	•
Porte-canne	•	•	•	•
Roulettes de transit	•	•	•	•
Prolongation d'empatement				•
Rallonge de levier de frein	•	•	•	•
Tablette thérapeutique				•
Sangle talonnière pour repose-pieds à deux palettes	•	•	•	•
Kit outillage				•
Barre stabilisatrice de dossier				•
Couleur du châssis				
Anthracite métallique				•
Noir profond				•
Bleu glace				•
Argent métallisé	•	•	•	•
Blanc neige				•
Bleu nuit				•

Vous pouvez également commander un grand nombre des accessoires cités ci-dessus (par ex. le coussin d'assise et l'appui-tête) pour des produits non configurables. Pour cela, veuillez utiliser notre tarif 2016.

POIDS (kg)- Famille START										
Largeur d'assise (mm)	M1	M1 Transport	M1 FT*	M1 FT* Transport	M2S	M2S Transport	M2S FT*	M2S FT* Transport	M2	M2 Transport
380	14,6	9,5	16,0	10,5	14,7	9,6	15,8	10,3	14,7	9,6
405	14,7	9,6	16,1	10,6	14,8	9,7	15,9	10,4	14,8	9,7
430	14,8	9,7	16,2	10,7	14,9	9,8	16,0	10,5	14,9	9,8
455	14,9	9,8	16,3	10,8	15,0	9,9	16,1	10,6	15,0	9,9
480	15,0	9,9	16,4	10,9	15,1	10,0	16,2	10,7	15,1	10,0
505	15,1	10,0	16,5	11,0	15,2	10,1	16,3	10,8	15,2	10,1

* Frein à tambour



Dispositifs médicaux de classe I.
Fabricant Otto Bock HealthCare.
Dispositifs pris en charge par les organismes d'assurance
maladie sous la référence 4107723 et 4118193.
Lire attentivement la notice d'utilisation.

Otto Bock France
4 rue de la Réunion - CS 90011
91978 Courtaboeuf Cedex · France
T +33 (0) 1 69 18 88 30 · F +33 (0) 1 69 18 06 17
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr