

Alesia

FAUTEUIL GÉRIATRIQUE

Ce fauteuil de gériatrie est équipé de roues ø125 mm pour faciliter les déplacements, le dossier est bas, facilitant ainsi les transferts ou l'accès à un lavabo.

Le dossier est renforcé au niveau des lombaires et il est inclinable par l'utilisateur ou la tierce personne car les commandes sont reliées. L'assise est Procline/Declive, et la palette de repose-pieds est rétractable et montée

sur ressort. Les accoudoirs sont réglables en hauteur. Il existe en version repose-jambes avec crémaillères ou sans repose-jambes. Le frein est centralisé et les roues arrière sont directionnelles.


Il y a trois pédales de fonctionnement : La bleu pour la Procline/Declive, la rouge pour les freins et la verte pour bloquer les roues directionnelles.



Appui-tête en option



C32
jaune mirabelle

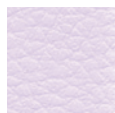

C33
parme




C34
orange citrouille



C35
vert amande



C36
rouge morgon

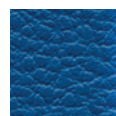

C37
bleu nuit



C38
marron



C39
vert basilic

OPTIONS

- Porte sérum
- Appui-tête réglable et démontable
- Tablette AL12
- Porte documents
- Porte obus
- Support poche à urine



700



540




0-270



530



1330

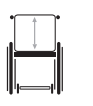

800



12°




30°



480



800*
1330**

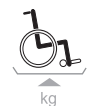

33



140

(*dossier et repose-jambes non inclinés. **avec dossier et repose-jambes inclinés.)

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°