

Wellington

LA SOLUTION RELAXATION ADAPTÉE
ÉGALEMENT AUX COLLECTIVITÉS

FONCTION LIFT ET BATTERIE INTÉGRÉES

VOUS APPRÉCIEREZ

CONFORT

- Assise et repose jambes munis d'une mousse à mémoire de forme.
- Dossier muni d'oreillettes amovibles pour le maintien de la tête.
- Assise continue avec le repose pieds pour un soutien complet de la totalité du segment jambier.

UN ENTRETIEN FACILE

- Assise déhoussable pour faciliter l'entretien ou échanger des parties abîmées.
- Accoudoirs et oreillettes du dossier escamotables.
- Revêtement, nouvelle génération très résistant, et imperméable.
- NB : - Son revêtement bénéficie de la norme EN1021-1 & 2 (test de la cigarette et retardant au feu, l'équivalent de la NF M1).

« **SON PLUS** ». La fonction lift fonctionne également en position allongée rendant les mobilisations ou « interventions » à effectuer sur la personne alitée moins contraignantes pour le dos des accompagnants ou des personnels soignants.



ZOOM SUR

REVÊTEMENT


« Easyclean » R+++
(explications p10)

Revêtement nouvelle génération très facile d'entretien. Microfibre mixte (polyester, polyuréthane, coton) souple, et très confortable il est résistant car moins sensible à l'abrasion (frottements).

Le traitement Easyclean permet un simple nettoyage à l'eau pour enlever les tâches domestiques les plus communes (café, vin, encre, chocolat...). Il évite l'infiltration immédiate des liquides (propriété déperlante) afin que ceux-ci puissent être absorbés à l'aide d'un simple chiffon propre (de préférence 100% coton). Ce revêtement est également traité contre le développement des champignons, moisissures et bactéries évitant ainsi l'apparition d'odeurs causées par des micro-organismes. Il répond également à la norme Oeko-Tex 100 garantissant son innocuité et l'absence dans sa composition de 100 substances identifiées comme potentiellement nocives ou toxiques pour la santé et l'environnement.




DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm

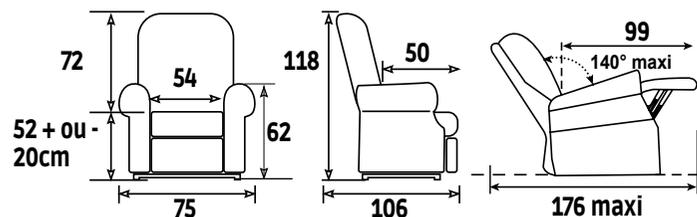

ECARTEMENT DU MUR : MINI 60 CM

TAILLE

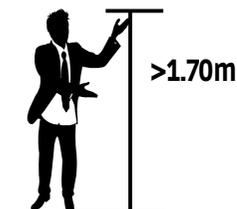

Télécommande
fauteuil 2 moteurs
simple d'utilisation

ZOOM SUR



«FACILITER LES TRANSFERTS»

Aide au lever et à l'assise avec la fonction releveur
« La fonction « lift » intégrée permet une élévation de
+ ou - 18 cm pour régler la hauteur d'assise (à la hauteur
du lit ou du fauteuil roulant par exemple) ou permettre le
passage d'un souleve patient. Combiné avec la possibilité
d'escamoter les accoudoirs et les oreillettes latérales
verticales du dossier tous les cas de figure
de transferts sont facilités.



+ ou
- 18cm



DÉPLACER LE FAUTEUIL



« 4 roulettes dont 2
à l'arrière avec frein
équipent ce fauteuil.



«une barre de
poussée sur le haut
dossier pour faciliter
les déplacements»



Accoudoir
amovible



La batterie intégrée permet de déplacer le fauteuil, tout en conservant toutes les fonctionnalités du fauteuil, d'une pièce à l'autre en toute « autonomie », sans nécessité forcément de proximité d'une prise murale (sauf en cas de nécessité de recharger la batterie : charge recommandée au moins 2 fois par mois selon utilisation – signal sonore pour informer de la nécessité de recharger la batterie avant que celle-ci ne soit complètement déchargée).