
HALUX N50 / HALUX N30
LUMINAIRES D'EXAMENS MÉDICAUX



SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉ À VOS BESOINS. LE LUMINAIRE D'EXAMENS HALUX.

Un classique au nouveau design : le HALUX séduit par sa forme minimaliste et l'attention portée aux moindres détails si typique du «Made in Switzerland». Sa réputation d'éclairage fiable dans le domaine médical depuis trois décennies n'est plus à faire ! La nouvelle édition offre différents modèles dotés de différents équipements. Chacun trouvera ainsi de quoi satisfaire ses exigences. Du cabinet de médecine général jusqu'au lit du malade, en passant par la gynécologie, la gamme HALUX offre un modèle parfaitement adapté.

Nettoyage rapide

Grâce à une construction fermée, aucun risque de pénétration du produit de nettoyage dans la tête du luminaire

Sans entretien

Matériaux de grande qualité et technologie LED durable

Positionnement fiable

Système de bras de grande qualité, positionnement facile

Champ lumineux

Grand champ d'éclairage homogène pour un confort optique maximum



LE MODÈLE PREMIUM. HALUX N50.

HALUX N 50 est le luminaire parfait pour ceux qui souhaitent une performance lumineuse supérieure et une température de couleur modifiable. Avec son champ d'éclairage de 18 cm et sa puissance lumineuse allant jusqu'à 50 000 lux à 0,5 m, HALUX N50 offre des conditions d'examens optimales.


Parfait rendu des couleurs

Température de couleur optimale pour des diagnostics précis et fiables



Puissance lumineuse individualisée

La gradation en 5 niveaux * permet une adaptation de la lumière en toute simplicité

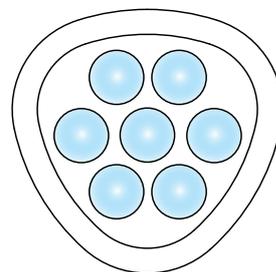

HALUX N50

Utilisation intuitive

Emploi simple, commande par clavier à membrane*



Vision optimalement contrastée


3 niveaux de température de couleur* pour un rendu fidèle des détails et des contrastes optimaux



* Modèles HALUX N50-3

LE MODÈLE DE BASE. HALUX N30.

HALUX N30 convient pour ceux qui doivent faire attention à leur budget sans devoir renoncer à la qualité. Le champ d'éclairage de 18 cm de diamètre et d'une puissance lumineuse allant jusqu'à 30 000 lux à 0,5m est parfaitement adapté aux diverses tâches quotidiennes.

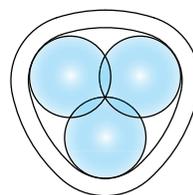

HALUX N30

Large gamme diversifiée


Différents systèmes de bras



Modèle avec ou sans support articulé



Raccordement de la tête de lampe de côté ou à l'arrière

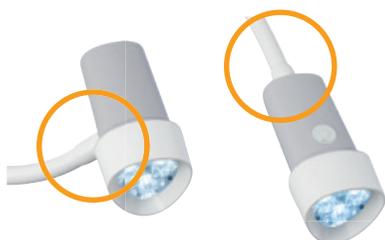

APPLICATIONS



Dermatologie

- Grand champ d'éclairage
- Température de couleur réglable Halux N50-3
- Excellentes caractéristiques de rendu des couleurs



Gynécologie

- Connexion au fauteuil d'examen / de gynécologie
- Commande ergonomique
- Éclairage gradable



Traitement du patient

- Lumière gradable
- Diverses possibilités de raccordement
- Robustesse et nettoyage facile



Médecine générale / aide médicale d'urgence

- Grand champ d'éclairage
- Excellent rendement lumineux jusqu'à 50 000 Lux @ 0,5m
- Nombreuses possibilités de fixation

| | Système de bras | Urgences | Examens | Examens spécialisés | Soins intensifs | Gradable | Couleur modifiable |
|-------------------|-------------------------------------|----------|---|------------------------|-----------------|----------|--------------------|
| PRODUIT | | | Dermatologie générale Néonatalogie Anesthésie | Gynécologie / urologie | | | |
| HALUX N50-1 P SX | Bras flexible | ○ | | | ○ | | |
| HALUX N50-3 P SX | Bras flexible | ○ | ● | | ○ | ✓ | ✓ |
| HALUX N50-1 P FX | Bras compensé par ressort | ● | ● | | ● | | |
| HALUX N50-3 P FX | Bras compensé par ressort | ● | ● | | ● | ✓ | ✓ |
| HALUX N30-1 P SV | Bras flexible | | ○ | | | ✓ | |
| HALUX N30-1 P SH | Bras flexible | | | ● | ○ | ✓ | |
| HALUX N30-1 P SGV | Bras flexible avec support articulé | | ○ | | | ✓ | |
| HALUX N30-1 P SGH | Bras flexible avec support articulé | | ○ | ● | ○ | ✓ | |
| HALUX N30-1 P F1 | Bras compensé par ressort | | ○ | | ● | ✓ | |

- idéal
- bien adapté



www.derungslicht.com/halux-N50

HALUX N50

Caractéristiques techniques de HALUX N50

| | |
|---------------------------------|--|
| Rendement lumineux ** | 50 000 lx @ 0,5 m |
| Champ d'éclairage ** | Ø 18 cm @ 0.5 m |
| Gradation * | 5 niveaux de gradation |
| Indice de rendu des couleurs Ra | 93 |
| Température de couleur | Fixe : 4400 K Réglable : 3 300 K / 3 800 K / 4 400 K* |
| Alimentation | Prise réseau intégrée |
| Indice de protection | IP 20 (tête de lampe) |
| Bras | Bras flexible ou bras compensé |
| Commande | Touche sensible sur la tête de la lampe ou interrupteur à bascule (I/O) |
| Accessoires | Système de rail médical, bras prolongateur, pince pour fixation sur table, embase universelle, pince étau pour rail, fixation murale, fixation pour câblage, piètement à roulettes |

** -10 % / +20 % de tolérance

* en option

Liste des sources :

Les images utilisées dans cette brochure sont la propriété des fournisseurs suivants :

Source des images : stock.adobe.com/WavebreakMediaMicro, 123rf.com/KirillKedrinski, [123rf.com/Jasmin Merdan](http://123rf.com/JasminMerdan), [123rf.com/Wavebreak Media Ltd](http://123rf.com/WavebreakMediaLtd)

Siège en Allemagne

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen
Allemagne
Tél. +49 7720 601-0
Tél. +49 7720 601-100 (Service commercial)
Fax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com



www.derungslicht.com/halux-N30

HALUX N30

Caractéristiques techniques de HALUX N30

| | |
|---------------------------------|---|
| Rendement lumineux ** | 30 000 lx @ 0,5 m |
| Champ d'éclairage ** | 18 cm @ 0.5 m |
| Gradation | Gradation en continu |
| Indice de rendu des couleurs Ra | 93 |
| Température de couleur | Fixe : 4400 K |
| Alimentation | Prise réseau externe |
| Indice de protection | IP 20 (tête de lampe) |
| Bras | Bras flexible ou bras compensé |
| Commande | Touche sensible sur la tête de la lampe |

Accessoires : Système de rail médicalisé, bras prolongateur, pince pour fixation sur table, embase universelle, pince étau pour rail, fixation murale, fixation pour câblage, piètement à roulettes

Fauteuil de gynécologie : SCHMITZ u. Söhne, GmbH & Co. KG, Wickede (Ruhr), Allemagne.

Photos des produits et de référence de Jerry Gross Fotostudio AG, Saint-Gall, Suisse. Les autres photos et graphiques sont la propriété de Derungs Licht AG et de Waldmann Group.

Centre de compétences Soins et santé :

Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Suisse
Tél. +41 71 388 11 66
Fax +41 71 388 11 77
www.derungslicht.com
mailbox@derungslicht.com

Derungs Licht AG est une société
du Groupe Waldmann.

