



CONTACT
SÉCURITÉ

MAI 2005

MATELAS IMMOBILISATEUR A DEPRESSION Réf. NPICN & NPICN110

Matelas immobilisation à dépression anti-rétractable,
homologué à la Norme NF EN 1865 (Numéro d'enregistrement fr/CA01/0104952V
et conforme à la N.I.T. 330.



FABRICATION FRANÇAISE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

- ⇒ Anti-rétraction
 - ⇒ Forme rectangulaire.
 - ⇒ Dimensions : 2,2 x 0,90 m (existe en largeur 1,1 m. réf. NPICN110).
 - ⇒ Poids : 5,5 kg.
 - ⇒ Epaisseur : 7 cm.
 - ⇒ Triple couche (2 couches polyuréthane + 1 couche PVC).
 - ⇒ 12 poignées de portage ergonomiques et anatomiques dont 4 poignées sur chacun des grands côtés et 2 poignées à la tête et 2 aux pieds.
 - ⇒ 4 sangles de fermeture centrales équipées de boucles à fermeture rapide résistant à 400 kg de traction.
 - ⇒ Valve $\frac{1}{4}$ de tour métal haute sécurité. (Existe en version ABS radio-transparente).
 - ⇒ Emplacement pour identification du propriétaire.
 - ⇒ Marquage personnalisé possible suivant quantitatif / nous consulter.
-
- ACCESSOIRES : -Pompes à dépression métal (Réf.PV22) ou PVC (Réf. PVC)
-Sac de rangement en Nylon bleu (Réf. SM79)
-Kit de réparation (Réf.NKIT)

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

e-mail : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : <http://www.contactsecurite.fr>

S.A. au CAPITAL DE 80 000 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 331 B – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

Certifié ISO 9001 : 2000 par






Constitution générale

CONTACT SÉCURITÉ

Il est composé de 3 couches
Vue en coupe du matelas :

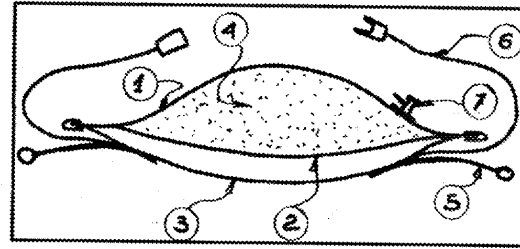

1 - Enveloppe supérieure :

Toile polyamide 6/6 avec double enduction
polyuréthane 500 g/m² pour :

- Etanchéité, nettoyage facile, aucune imprégnation possible
- Double couche d'étanchéité (externe et interne)



2 - Enveloppe interne :

Toile polyamide 6/6 avec simple enduction polyuréthane 330 g/m²

3 - Enveloppe inférieure :

En tissu PVC 950 gr/m² haute résistance à la déchirure.

Les enveloppes 1 et 2 constituent la poche étanche

L'enveloppe 3 est une protection, mais aussi le support
de tous les équipements de sanglage.



Résistance à la traction : 250 daN. Résistance à la déchirure : 22 daN

4 - Les billes :

Environ 120 litres de billes

Dimensions moyennes : diamètre de 0,5 mm à 1 mm

Nature : polystyrène expansé 30 kg./m³

La petitesse des billes est la garantie d'un retrait minimum du matelas.

5 - Les poignées :

4 poignées de chaque côté et 2 à la tête et 2 aux pieds

Répartition idéale pour assurer le transport et
conserver la raideur du matelas lors du transport.



6 - Les sangles :

3 séries de sangles réglables (largeur 40 mm)

équipées de boucle à clipage rapide.

(résistance à la traction 400 Kg).




7 - Valve $\frac{1}{4}$ de tour métal haute sécurité.

(Existe en version ABS radio-transparente).



8 - Bandes latérales orange pour une meilleure
visualisation du matelas en intervention.

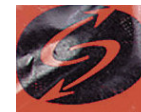

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

e-mail : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : <http://www.contactsecurite.fr>

S.A. au CAPITAL DE 80 000 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 331 B – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

Certifié ISO 9001 : 2000 par

