

Clario



MOBILITÉ ET FIABILITÉ



Aspirateur des voies respiratoires Clario

Clario

Facile à utiliser et très mobile

Les équipes de soins de santé à domicile et les patients nécessitant une aspiration des voies respiratoires apprécient l'aspirateur Clario pour sa conception intelligente.

Conçu de façon modulaire, **Clario** se compose de trois pièces principales, pour un montage facile sans complications :

- Unité constituée du moteur
- Bocal désinfectable
- Chambre de sécurité

Grâce à ses trois niveaux d'aspiration prédéfinis, **Clario** est facilement manipulable.

Il est également très hygiénique : aucune sécrétion ne peut pénétrer dans l'aspirateur, ce qui facilite le nettoyage quotidien.

Clario est rapidement prêt pour l'utilisateur suivant.

Son format léger lui permet d'être emporté partout. **Clario** est disponible en version avec batterie, pour une mobilité accrue.



- a** Le flotteur empêche les trop-pleins
- b** Des bouchons pour un transport en toute sécurité
- c** Bocal désinfectable 500 ml
- d** Régulateur de vide
- e** Chambre de sécurité
- f** LED indiquant l'état de charge de la batterie
- g** Poignée de transport

Une grande mobilité associée à une fiabilité élevée

Clario associe une technique intelligente à une conception pratique, tout en étant facile à utiliser. Il se compose uniquement de trois pièces, qui peuvent être assemblées en un tournemain.

Pratique : les tuyaux nécessaires à l'aspiration sont attachés au couvercle du bocal. Clario propose 3 réglages de vide faciles à effectuer et à expliquer. L'affichage LED (sur la version CA/CC) indique lorsqu'il faut recharger la batterie. Toutes ces fonctionnalités sont présentées dans un appareil au design attrayant, puisque discret non-médical, et étonnamment silencieux.



Facile à utiliser

Conception triplement hygiénique

Clario a été conçu de manière triplement hygiénique. Le flotteur empêche les trop-pleins. La chambre de sécurité récolte les sécrétions en l'absence du flotteur. Enfin, la membrane empêche les sécrétions de pénétrer dans le mécanisme. Vous êtes ainsi assuré qu'aucune partie mécanique de l'aspirateur ne puisse déborder. Inutile d'ouvrir l'appareil pour le nettoyer, ou d'acheter des filtres. L'appareil est très facile à nettoyer afin d'éviter toute contamination croisée entre les patients.



Facile à nettoyer

Compact et portable

Clario offre plus de liberté à l'utilisateur. La version avec batterie, qui ne pèse que 2 kg, comprend une batterie rechargeable offrant 50 minutes d'aspiration. Grâce au sac de transport facultatif, vous transportez discrètement et aisément Clario et ses accessoires.



Facile à transporter

En bref

- Medela met à disposition des professionnels de la santé ses 50 ans d'expérience en matière de technologie d'aspiration médicale.
- Nos processus de développement et de fabrication suisses offrent une précision mécanique qui nous permet de garantir un excellent fonctionnement.
- Clario est très apprécié des personnes responsables de soins à domicile, pour sa fiabilité et sa facilité d'utilisation.
- Clario présente un design à la fois moderne et intemporel. Il ne ressemble pas aux appareils médicaux habituels.
- Clario est chaudement recommandé par les équipes de soins médicaux à domicile.
- Le nettoyage de Clario nécessite peu de temps et d'efforts.
- La conception triplement hygiénique de Clario aide à éliminer les risques de contamination croisée.
- Clario facilite la mobilité, améliorant ainsi la qualité de vie.
- 2 ans de garantie pour l'appareil, 6 mois de garantie pour la batterie.

Accessoires

Prise pour le secteur 12 V

câble allume-cigare pour une utilisation en voiture.



Manomètre

pour contrôler les niveaux de vide.






Sac de transport semi rigide


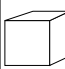
pour un transport facile et discret.




Utilisez les accessoires Medela pour encore plus de flexibilité et d'aisance d'utilisation.

Caractéristiques techniques

 vacuum	min. -18 kPa med. -36 kPa max. -80 kPa	-131 mmHg -266 mmHg -595 mmHg
 flow	low flow 15 L/min.	
	Power 100 – 240 V 50 – 60 Hz	

 kg	AC AC/DC	1,7 kg 2,0 kg
	H x W x D 223 x 255 x 95 mm	

	ISO 9001 ISO 13485 CE (93/42/CEE), Ila 2 years warranty	 0123
		

Medical Vacuum Technology for Healthcare Professionals

Veuillez prendre contact avec nous ou avec votre représentant local Medela pour plus de détails.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland
www.medela.com

Contact local :

Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB's-Hertogenbosch
Belgium
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.be
www.medela.be

Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Cres., Unit #8
Mississauga, ON, L5L 0A1
Canada
Phone +01 905 608 7272
Fax +01 905 608 8720
info@medela.ca
www.medela.ca

Medela France
14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone +33 (0)1 69 16 10 30
Fax +33 (0)1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch