



QUICKIE
Live without limits.

XENON²
PLIAGE PARFAIT
ET CONDUITE HORS PAIR

XENON² – STYLE ET PERFORMANCES PREMIUMS

Que vous recherchiez la conduite la plus dynamique ou des dimensions de pliage très compactes, il y a un **Xenon²** fait pour vous.

Vous laisserez-vous séduire par le design raffiné et épuré du **Xenon²**? Ou par la rigidité supérieure du **Xenon² Hybrid**? Ou encore, par tous les atouts pratiques du **Xenon² SA**? Quel que soit le modèle, le **Xenon²** s'adresse à tous ceux qui aiment faire rimer l'esthétisme avec la performance...



” La musique est sa passion. Sa voix est expressive: Monika Kuszyńska a représenté la Pologne au concours de l’Eurovision de la Chanson à Vienne en interprétant “In the Name Of Love”. Déjà très célèbre en Pologne, elle partage ses messages au fil de ses voyages .



XENON² LE PLUS LEGER

Le fauteuil roulant pliant le plus léger au monde.
Châssis ouvert à potences fixes.
Design épuré, moderne et soigné.



XENON² HYBRID LE PLUS RIGIDE

Aucun compromis en terme de rigidité.
Châssis renforcé à potences fixes.
Poids maximal Utilisateur 140 kg.



XENON² SA LE PASSE-PARTOUT

Transferts facilités
Châssis à potences escamotables et amovibles.
Dimensions ultra-compactes une fois plié pour faciliter le chargement en voiture.





LE PLUS LEGER AU MONDE DES FAUTEUILS PLIANTS...

Comment atteindre un poids si faible de 8.8 kg, pour un fauteuil pliant ? En utilisant des matériaux ultra haut de gamme pour le châssis, comme l'aluminium provenant de l'aéronautique, et en les usinant selon un procédé innovant et unique à Quickie – ShapeLoc Technology.

Grâce au traitement thermique de l'aluminium, sa résistance est augmentée et cela permet d'utiliser des tubes plus fins, plus légers tout en étant plus rigides, que ceux d'un fauteuil pliant traditionnel. **Just feel it ...**





...AUX INCOMPARABLES PERFORMANCES DE PLIAGE

Au coeur du **Xenon²**, un croisillon unique. Il s'intègre si remarquablement sous l'assise qu'il en devient imperceptible – lui conférant ainsi un châssis ouvert très minimaliste, comparable à celui d'un fauteuil roulant rigide.

Et les similitudes ne s'arrêtent pas à l'apparence! Le tout nouveau support d'axe combiné au nouveau croisillon assurent une rigidité et une stabilité optimales, à l'image d'un fauteuil rigide sans oublier tous les côtés pratiques d'un fauteuil pliant.

→ Mécanisme de pliage

Les nouvelles biellettes en aluminium sur le croisillon gardent les roues du fauteuil parallèles lors du pliage, ainsi votre **Xenon²** reste stable, quelle que soit la situation.






STYLE EN MOUVEMENT

Soyez au centre de tous les regards en personnalisant votre **Xenon**²!
Trente deux coloris attrayants pour le châssis, cinq choix de couleurs d'anodisation pour les fourches et les jantes des roues avant. Et pour une touche finale d'originalité ou d'harmonie, pourquoi ne pas jouer avec les couleurs du galon de la toile de dossier EXO!

→ **Personnalisez votre Xenon**²
avec sa palette de 32 coloris.

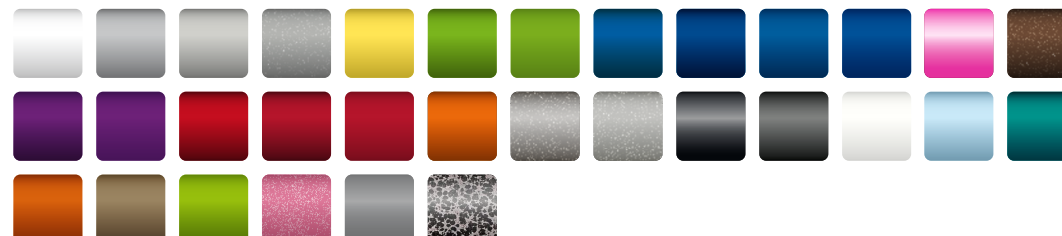

” **Monika Kuszyńska:** *J'aime tout ce qui touche à la mode.
Le design élégant du Xenon² complète à la perfection mon style.*



→ **Ajoutez de la couleur à votre toile de dossier**
La toile Exo, très confortable et stylée, propose 5 coloris de galon.



→ **Choisissez votre propre style**
Fourches et jantes de roues avant anodisées disponibles en argent, bleu, rouge, orange ou noir pour un look unique



” **Monika Kuszyńska:** *Mon Xenon² ressemble à ma musique, il est le prolongement de moi. Il est comme un compagnon quand je voyage à travers le monde.*

REGLABLE SELON VOS EXIGENCES

Exactement comme il se doit – conçu pour s'adapter à vos besoins et éventuels changements. Le support d'axe du **Xenon²** permet un réglage simple de la hauteur d'assise.

Vous souhaitez passer d'une conduite dynamique à plus tranquille ou vice-versa? Modifiez simplement le réglage du centre de gravité en glissant le support d'axe sur les tubes d'assise. Et pour une posture plus ergonomique, n'oubliez pas de régler l'angle du dossier ou d'opter pour un dossier **Jay J3 Carbon** ... la combinaison idéale pour une vie active!

**Dossier Jay
J3 Carbon**



❶ Centre de Gravité

Permet des caractéristiques de conduite de très actif à passif.

❷ Dossier Réglable en Angle

Un réglage précis favorise une bonne posture.

❸ Hauteur d'Assise Arrière

Réglable selon vos besoins personnels.





XENON²
LE PLUS LEGER



XENON² HYBRID
LE PLUS RIGIDE



XENON² SA
LE PASSE-PARTOUT

XENON²

Fauteuils roulants ultra-légers
au pliage et performances de
conduite exceptionnelles



Options de la famille **Xenon²** – Configurez votre fauteuil roulant selon vos besoins spécifiques.
Pour consulter la liste complète d'options et d'accessoires, veuillez-vous référer à la fiche de mesure du **Xenon²** et **Xenon² SA**.



// DOSSIER CASSANT

Ce dossier se rabat sur l'avant pour un gain de place pour le transport.



// MAIN-COURANTES SURGE®

Bande de caoutchouc Gripton sur le dessus de la main-courante ovale offrant un grip maximal.



// DOSSIER REGLABLE EN ANGLE

Support de dossier usiné en corrélation avec le châssis. Dossier réglable de 75° à 103° par incréments de 4°.



// ACCOUDOIRS

Accoudoirs relevables et amovibles disponibles avec manchettes fixes ou réglables en hauteur.



// ACCOUDOIRS TUBE

Escamotables, ils apportent le soutien en cas de besoin et ne gênent pas durant la propulsion.



// GARDE-BOUE CARBONE

Très légers au look unique.



// PALETTE REPLIABLE AUTOMATIQUEMENT

Réglable en angle et en profondeur, disponible en carbone et composite. Uniquement pour Xenon² et Xenon² Hybrid



// ACCROCHES TAXI

Option approuvée pour le transport en véhicule (crash testé selon ISO 7176-19).

DONNEES TECHNIQUES

	Xenon ²	Xenon ² Hybrid	Xenon ² SA
Poids max. Utilisateur:	110 kg	140 kg	125 kg
Largeur d'assise:	32 – 46 cm	32 – 50 cm	32 – 50 cm
Profondeur d'assise:	34 - 50 cm	34 - 50 cm	34 - 50 cm
Hauteur d'assise avant:	43 – 55 cm	43 – 55 cm	43 – 56 cm
Hauteur d'assise arrière:	37 – 50 cm	37 – 50 cm	37 – 50 cm
Hauteur de dossier:	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm
Angle du dossier:	-15° à +13° par paliers de 4°	-15° à +13° par paliers de 4°	-15° à +13° par paliers de 4°
Centre de gravité:	4 – 13 cm	4 – 13 cm	4 – 13 cm
Carrossage:	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°
Type de châssis:	châssis ouvert à potences fixes	châssis renforcé à potences fixes	châssis à potences escamotables
Poids du fauteuil (complet), à partir de:	8,8 kg *	9,5 kg *	10,3 kg *
Coloris de châssis:	32	32	32
Crash test:	oui	oui	oui
Marquage CE:	oui	oui	oui

Configuration du fauteuil: largeur 36 cm, profondeur 40 cm, supports d'axes légers, hauteur d'assise basse, protège-vêtements carbone slim, sans poignées de poussée, roues Proton, pneu Schwalbe one, main-courantes alu anodisées.

Tolérance usine: +/- 1 cm

Pour plus d'informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure disponible sur notre site internet.

Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

