

SANGLE HAMAC FILET FORTE CHARGE

Référence :


XL : SR2350800
XXL : SR2350900

Charge maximum :

300 kg

S 039 06 10 1

Dimensions :

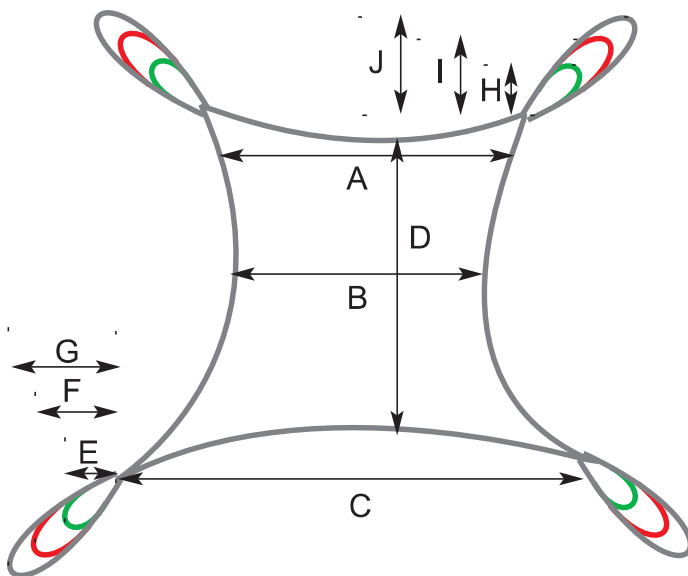

	XL	XXL
A :	125 cm	150 cm
B :	80 cm	100 cm
C :	145 cm	170 cm
D :	140 cm	145 cm
E :	18 cm	18 cm
F :	26 cm	26 cm
G :	35 cm	35 cm
H :	13 cm	13 cm
I :	25 cm	25 cm
J :	35 cm	35 cm
Poids de la sangle :	1,250 kg	1,400 kg
Coloris :	Gris et vert	

Matières utilisées :

- **Filet** : Polyester haute ténacité Heavy Polyester Mesh 100 %
- Masse spécifique 400 gr/m²
- Résistance à la traction selon norme ISO 13934.1
- Résiste aux solvants chlorés et acide organique
- **Fil** : 100 % polyamide continu haute ténacité
- Résistance 6.6 kg – allongement 26 %
- Imputrescible, résistant à l'abrasion et aux ultra-violet.

- **Coutures** zig zag testées à 450 kg
- **Sangle** dde périphérie et d'accrochage 100 % :Polyester.
- Résistant > 2 650 daN
- Masse spécifique 56.0 g/m
- Dimensions : largeur 47 mm épaisseur 1.1 mm

Utilisation / Recommandation :

- Facile à positionner autour du patient
- Soutient bien le corps
- Recommandée pour les personnes souffrant de douleurs chroniques et pour les personnes amputées.
- Utilisée depuis une position allongée vers une position assise et réciproquement.
- Utilisée pour le ramassage au sol
- Poignée dorsale de positionnement
- Existe en 2 tailles XL & xxl
- Réglages des attaches par 3 positions avec code couleur
- Une sangle doit être dédiée à une personne / patient.

- Un lavage / désinfection doit être réalisé entre 2 personnes / patient.

Lavage / désinfection :


- Avant chaque utilisation avec une nouvelle personne / patient, il est impératif de laver et de désinfecter la sangle afin d'éviter les risques d'infection croisée.
- Lavage en machine à 60 °, sans phénol.
- Pas de repassage.
- Désinfection par spray pulvérisé sur les surfaces externes de la sangle.

Référence :

Taille unique SR2351000

Charge maximum :
250 kg

S 036 06 10 1

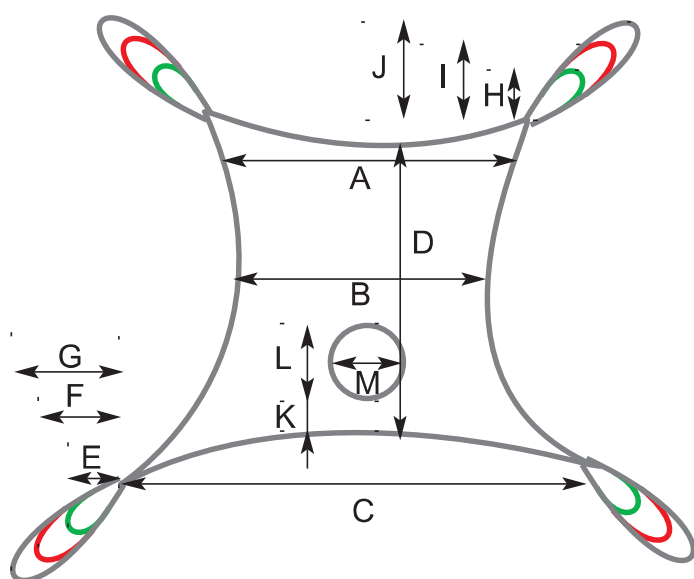Dimensions :


	Taille unique
A :	150 cm
B :	100 cm
C :	170 cm
D :	145 cm
E :	18 cm
F :	26 cm
G :	35 cm
H :	13 cm
I :	25 cm
J :	35 cm
K :	16 cm
L :	21 cm
M :	15 cm
Poids de la sangle :	1.450 kg
Coloris :	gris et vert

Matières utilisées :

- **Filet** : Filet : Polyester haute ténacité Heavy Polyester Mesh 100 %
- Masse spécifique 400 gr/m²
- Résistance à la traction selon norme ISO 13934.1
- Résiste aux solvants chlorés et acide organique
- **Fil** : 100 % polyamide continu haute ténacité
- Résistance 6.6 kg – allongement 26 %

- Imputrescible, résistant à l'abrasion et aux ultra-violet.

- **Couture** zig zag testées à 450 kg
- **Sangle** de périphérie et d'accrochage 100 % :
- Polyester.
- Résistant > 2 650 daN
- Masse spécifique 56.0 g/m
- Dimensions : largeur 47 mm épaisseur 1.1 mm

Utilisation / Recommandation :

- Facile à positionner autour du patient
- Soutient bien le corps
- Recommandée pour les personnes souffrant de douleurs chroniques et pour les personnes amputées.
- Utilisée depuis une position allongée vers une position assise et réciproquement.
- Utilisée pour le ramassage au sol
- Poignée dorsale de positionnement
- Existe en taille unique
- Réglages des attaches par 3 positions avec code couleur
- Une sangle doit être dédiée à une personne / patient.

- Un lavage / désinfection doit être réalisé entre 2 personnes / patient.

Lavage / désinfection :

- Avant chaque utilisation avec une nouvelle personne / patient, il est impératif de laver et de désinfecter la sangle afin d'éviter les risques d'infection croisée.
- Lavage en machine à 60 °, sans phénol.
- Pas de repassage.
- Désinfection par spray pulvérisé sur les surfaces externes de la sangle.


Référence :

XL : SR 2351100
XXL : SR 2351200

Charge maximum :

300 kg

S 038 06 10 1

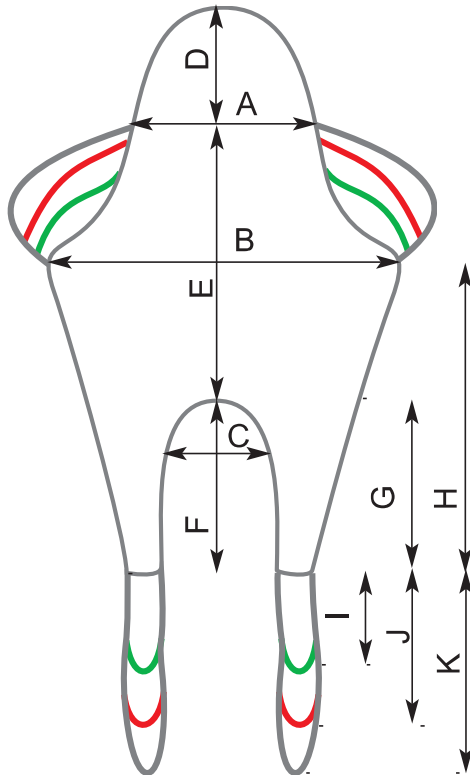

Dimensions :

	XL	XXL
A :	72 cm	80 cm
B :	110 cm	120 cm
C :	40 cm	45 cm
D :	36 cm	42 cm
E :	56 cm	58 cm
F :	75 cm	80 cm
G :	75 cm	80 cm
H :	90 cm	92 cm
I :	24 cm	24 cm
J :	37 cm	37 cm
K :	50 cm	50 cm
Poids de la sangle :	2 kg	2,250 kg
Coloris :	Gris et vert	

Matières utilisées :

- **PVC toile** de Polyester enduite sur 2 faces BT450 – non feu
- Epaisseur 0,38 mm +/- 0,02
- Masse spécifique 450 gr/m² +/- 20 gr - 180 g support + 270 g PVC
- Résistance à la traction selon norme ISO 13934.1
- Trame 250 daN / 5 cm et Chaîne : 286 daN / 5 cm
- **Fil** : 100 % polyamide continu haute ténacité
- Résistance 6.6 kg – allongement 26 %
- Imputrescible, résistant à l'abrasion et aux ultra-violet.

- **Rembourrage** : mousse Dry Feel traitée anti-bactérien Sanitized-sans CFC
- Masse volumique : 32 kg / m³
- **Coutures** zig zag testées à 450 kg
- **Sangle** de périphérie et d'accrochage 100 % :Polyester.
- Résistant > 2 650 daN
- Masse spécifique 56.0 g/m
- Dimensions : largeur 47 mm épaisseur 1.1 mm

Utilisation / Recommandation :

- Facile à positionner autour du patient
- Forme coquille épousant la courbure du dos.
- Des renforts incluant des baleines en partie supérieure permettent de former une têtère enveloppante sécurisante et confortable.
- Cette sangle de grand confort est entièrement rembourrée et sa surface intérieure est tapissée avec une toile type DARTEX.
- Recommandée pour les personnes ayant un faible maintien de la tête, du tronc et des hanches.
- Recommandée pour les transferts assis-assis ou pour les transferts depuis une position allongée.
- Poignée dorsale de positionnement
- Existe en 2 tailles : XL & XXL
- Réglages des attaches par 3 positions avec code couleur

- Pour un transfert assis, utiliser les attaches courtes aux épaules et longues aux jambes.
- Une sangle doit être dédiée à une personne / patient.
- Un lavage / désinfection doit être réalisé entre 2 personnes / patient.

CROISER IMPERATIVEMENT LES JAMBIERES

Lavage / désinfection :

- Avant chaque utilisation avec une nouvelle personne / patient, il est impératif de laver et de désinfecter la sangle afin d'éviter les risques d'infection croisée.
- Lavage en machine à 40 °, sans phénol.
- Pas de repassage.
- Désinfection par spray pulvérisé sur les surfaces externes de la sangle.