

SCOOTER HOMOLOGUÉ « ROUTE »

LE MANS 900-M4

Moteur 4 pôles et batteries 100 ampères :
la version sport du scooter.

2 BATTERIES DE 100 AMPÈRES !
PLUS D'AUTONOMIE !



POINTS FORTS

- Châssis tout suspendu et Amortisseurs réglables :
- Un des rares scooters sur le marché équipé d'un système de suspension avant indépendante « double A »
- Amortisseur arrière réglable mono bras type "moto"
- Couple moteur : Moteur « 4 pôles » pour obtenir un couple supérieur qui vous permettra de vous extraire des conditions d'utilisation et situations délicates pour un plus grand agrément de conduite
- Confort d'assise: siège pivotant multi réglages de positions, équipé de sa ceinture de sécurité. Un dossier haut pour un maintien complet du dos. Accoudoirs, dossier, assise, appui tête réglables
- Equipements : 2 rétroviseurs, pack éclairage complet LED (plus de visibilité pour une consommation moindre) et catadioptr latéraux, protection de carrosserie : sabot avant et pare-chocs latéraux
- Passage automatique en mode «éco» des éclairages
- Feux arrière de recul, de décélération et stop

DONNÉES TECHNIQUES


- Longueur totale 142cm
- Largeur totale 72cm
- Rayon de Braquage 130cm
- Garde au sol au plus haut 8cm
- Assise (largeur x profondeur) 51 x 48cm
- Hauteur du dossier 75cm
- Poids maximum supporté 160kg
- Poids sans batteries 150kg
- Poids total 200kg
- Batteries 2 x 12V – 100Ah
- Puissance 900W Moteur 4 pôles
- Autonomie maximale cumulée 55*km
- Vitesse ajustable jusqu'à 10-15km/h**
- Dimensions (cm) des roues avant et arrière – pneus + chambre à air 330x101.5(AV) – 355.5x127 (AR)
- * : explications page 24
- **: 15 km/h en option

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Panier avant, panier arrière, pinces guidon (porte bouteille et/ou porte canne), porte cannes latéral, coffre arrière, pack Confort (présentation de ces accessoires p34)

COLORIS

(RÉF. 2519)

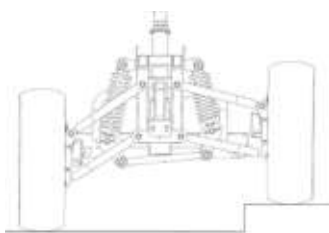

Suspension avant brevetée « double A »



Châssis tout suspendu

VOUS APPRÉCIEREZ

Tableau de bord à cristaux liquides nouvelle génération avec données complètes (vitesse, température extérieure, capacité et autonomie des batteries, distance parcourue (totaliseur et par trajet), heure, indicateur de marche arrière, indicateur de vitesse ralentie en virage, activation/désactivation au tableau de bord du signal sonore de marche arrière, indicateur d'éclairage mode éco...

